




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

**IN 26359 Kompressziós masszázstérdpánt inSPORTline
Mishair**

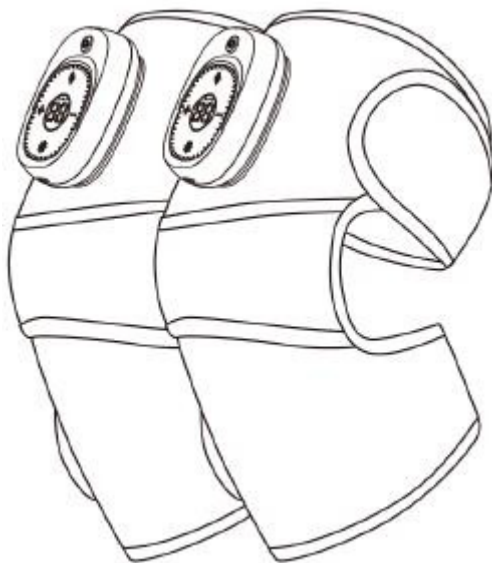

TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	3
SPECIFIKÁCIÓK.....	4
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS	4
HASZNÁLAT	4
KÖRNYEZETVÉDELEM	6

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
 - Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket. Ha a készülék sérült, forduljon a szervizhez.
 - Használat előtt fel kell töltenie a vezérlőt.
 - Ne hagyja felügyelet nélkül gyermekek vagy csökkent szellemi képességű személyek közelében.
 - Gyámság alatt álló személyek, illetve korlátozott mozgásképességű vagy szellemi képességű személyek csak felnőtt és felelős személy felügyelete alatt használhatják a terméket.
 - Csak biztonságos környezetben használja.
 - Ne tárolja gyermekek számára könnyen hozzáférhető helyen.
 - Ne használja, ha gyulladása, duzzadt lábai vagy sérült bőre van (nyílt sebek, vágás, visszerek stb.).
 - Ne használja vízben (fürdőkád, zuhany stb.).
 - Tartsa távol víztől. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
 - Ne használjon rajzszöveget vagy más fémtárgyat a rögzítéshez.
 - Tartsa a terméket szárazon.
 - Ne használja párás környezetben.
 - Ne használja olyan helyiségekben, ahol aeroszol van jelen, vagy magas az oxigénkoncentráció.
 - Első használatkor alacsony intenzitáson használja.
 - Használat közben üljön le vagy feküdjön le.
 - Ne helyezzen idegen tárgyakat a tömlőkbe.
 - Csak otthoni használatra alkalmas.
 - Ne viseljen olyan ruházatot, amely károsíthatja a terméket (fém alkatrészeket vagy éles széleket tartalmazó ruházat).
 - Mellékhatások jelentkezése esetén (vörös vagy irritált bőr, kiütés, viszketés stb.) azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.
 - Minden használat előtt ellenőrizze a termék állapotát és működését.
 - A készülék nem helyettesíti az orvosi ellátást. Fájdalom vagy hányinger esetén azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon orvoshoz. Ha nem biztos benne, a készülék használata előtt mindig konzultáljon orvosával.
 - Ha a következő betegségekben szenvedett, forduljon orvoshoz a használattal kapcsolatban: daganatok, szívbetegség, rossz hőmérséklet-érzékelés, eszméletvesztés, nyílt seb az alkalmazás helyén, láz (gyulladás, vérnyomásváltozás stb. miatt).
- Ne használja:
- Terhesség alatt vagy szülés után.
 - Pacemakert vagy más orvosi implantátumot használó személyeknél.
 - Szív- vagy érrendszeri betegségben szenvedők.
 - Rendellenes vérnyomásban szenvedők.
 - Csontritkulásban, gerincvelő-károsodásban, izomkárosodásban vagy más akut betegségben szenvedők.
 - Daganatban szenvedők.
 - Műtéten átesett személyek.
- Érzékeny bőrű vagy vérkeringési problémákkal küzdő személyek.

SPECIFIKÁCIÓK

Név	Térdmasszírozó
Modell	TD01-FM-073
Szabványok	GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Méretek	Meghajtó: 60x86x22mm
	Termék: 500x310x5 mm
	Töltőkábel hossza: 1 m
Tömeg	205 g
Időzítő	15 perc üzemidő
Anyag	Fő rész: poliészter, nejlon, chinlon
	Meghajtó: ABS gyanta
Feszültség	5V
Teljesítmény	10W
Töltés	DC5V/500~200mA USB C típusú USB-hez
Akkumulátorkapacitás	250mAh
Töltés	1 ~ 2 óra
Folyamatos használat	60 – 120 perc
Gyártva:	Kína


KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- A vezérlőt csak száraz, puha ruhával tisztítsa.
- A textil részeket alkoholos vízdoldatban vagy textiltisztítóval tisztítsa. Tisztítás után mindig szárítsa meg a terméket egy ruhával. Ne használjon benzin alapú oldószereket vagy tisztítószeret.
- Soha ne tisztítsa az elektromos alkatrészeket vízzel.
- A terméket száraz, árnyékos, alacsony páratartalmú helyen tárolja, és védje a portól.
- Az eredeti csomagolásban tárolja.
- Gyermektől elzárva tartandó.
- Tárolás előtt hajtsa össze megfelelően a töltőkábelt.

HASZNÁLAT


Töltés és akkumulátor

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy feltöltötte a vezérlőt.
- Töltés közben az akkumulátor töltöttségének jelzőfénye villog. Amikor a jelzőfény világít  , az akkumulátor fel van töltve.
- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a jelzőfény villog.
- Az akkumulátor töltési ideje 1-2 óra, az üzemidő töltésenként 60~120 perc. Az üzemidő a környezeti hőmérséklettől és a masszázs intenzitásától függően változhat.
- Ha hosszabb idő után használja a terméket, fel kell tölteni. Rendszeresen, 3 havonta töltsse fel a terméket.
- Ne használja töltés közben.
- A töltéshez bármilyen USB adaptert (5V, 500mA – 2000mA) használhat.

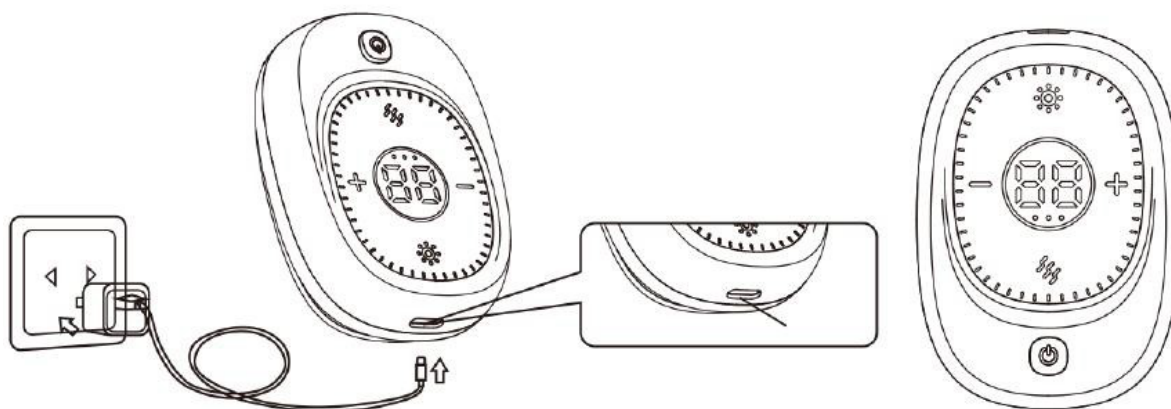


Vezérlő

Rögzítse a képen látható módon

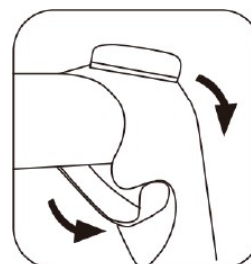


Tartsa lenyomva a bekapcsológombot. . A készülék elindul, a jelzőfények kigyulladnak, és hangjelzés hallható. (Ha nem kapcsol be, a készüléket fel kell tölteni.)

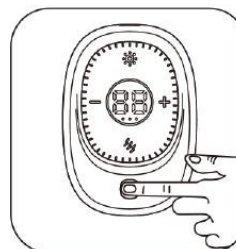


A fűtés gomb megnyomásával , elindítja a fűtést, és a + és - gombokkal állíthatja be a hőmérsékletet. Amikor eléri a felső határértéket, hangjelzés hallható. A kijelzőn megjelenik az aktuális fűtési hőmérséklet.


5 fűtési mód: 45°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 00°C (ki)

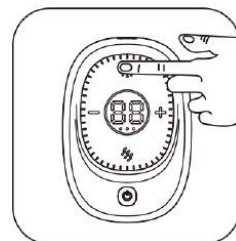


A rezgés gomb megnyomásával , elindítja a rezgés beállítását, a + és - gombokkal pedig beállíthatja a rezgés típusát. A kijelzőn megjelenik az aktuális rezgési mód: 01, 02, 03, 00 (ki)

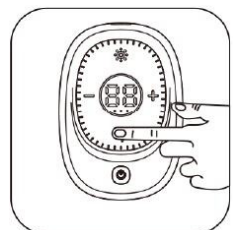

Az időzítő beállításához nyomja meg a bekapcsológombot. Az alapértelmezett érték 15 perc. A gomb megnyomásával 5 perccel növelheti az értéket, maximum 30 percig. A minimális üzemidő 5 perc. Ha a beállítás során túllépi a 30 perces értéket, az időzítő a legalacsonyabb értéktől számol. Az időzítő az indítás után 10 másodpercig zárolva van. A vezérlő feloldásához nyomja meg a bekapcsológombot.

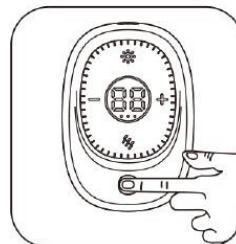

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot  2 másodpercig.

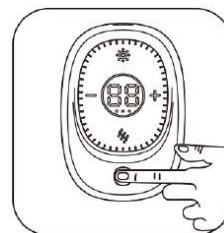

Lehetséges használat



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi

hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.