



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

**IN 28325 Elektromos masszáz és fűtő deréköv
inSPORTline Soncharge**



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	3
TERMÉK LEÍRÁS	4
HASZNÁLAT	4
VEZÉRLŐ	4
TÖLTÉS	5
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	5
GYAKORI KÉRDÉSEK	5
SPECIFIKÁCIÓK	6
KÖRNYEZETVÉDELEM	6

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu oldalra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Ne használjon sérült vagy kopott készüléket.
- A készülék nem alkalmas a következő személyek számára:
 - Várandós vagy nemrég szült nők.
 - Hőre érzékeny vagy a hőmérsékletet helyesen meghatározni nem képes személyek.
 - Cukorbetegségben vagy lázban szenvedő személyek.
 - Műtéten átesett vagy olyan kezelésen átesett személyek, akiket a magasabb hőmérséklet negatívan befolyásolhat.
 - Csípősérülésből lábadozó személyek.
 - Rákos, daganatos, szívbetegségben, túlérzékenységben stb. szenvedő személyek.
 - Olyan személyek, akiknek fém vagy más orvosi eszköz, például pacemaker van a testükben.
 - Törésben, perforációban, gyulladásban vagy migrénben szenvedő személyek.
 - Kiskorúak vagy csökkent motoros vagy szellemi képességű személyek számára.
- Új felhasználók számára az első hőmérsékleti szint használatát javasoljuk.
- Javasoljuk a termék folyamatos, legfeljebb 30 perces használatát. Mindig ellenőrizze a testét.
- Használat után a bőr rövid ideig kipirosodhat. Ha a bőrpír továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
- Ha bármilyen kellemetlenséget, fájdalmat, hányingert vagy egyéb negatív tünetet érez, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.
- Használja körültekintően a masszázsfunkciót, ne terhelje túl a testét.
- 5°C és 40°C közötti környezeti hőmérsékleten használja.
- Ne használja a derékövet, ha fáradt, vagy alvás közben.
- Használat közben pihenjen, ne végezzen más fizikailag megterhelő tevékenységet.
- Ne üljön vagy álljon a készülékre.
- Ne használja a derékövet nedves környezetben, és ne használja/kezelje a terméket nedves kézzel. Áramütés veszélye áll fenn.
- Ne takarja le a terméket, mert túlmelegedés és tűzveszély áll fenn.
- Tisztítás és karbantartás közben a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.
- Óvja az állatoktól és a kisgyermekektől.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
- Lítium elemet tartalmaz. Ne dobja a derékövet nyílt tűzbe, ne helyezze hőforrás, láng és víz közelébe.
- Ne húzza a tápkábelt. Ha a tápkábel sérült, azonnal állítsa le a működést, és forduljon a szervízhez.

- Ne helyezzen más tárgyakat a kábelre, ne lépjen rá, és ne szakítsa el.
- Javasoljuk, hogy a derékövet egy réteg ruha felett viselje.

TERMÉK LEÍRÁS



1. Merevítő

2. Nyomóöv

3. Jelzőfény

4. Bekapcsológomb

5. Vezérlőpanel


6. Zseb

7. Tépőzár

HASZNÁLAT

A deréköv felhelyezése előtt távolítson el minden kiegészítőt, például az övet stb.

Ha zsebben szeretné tárolni a tárgyakat, először textil csomagolásba kell tennie őket.

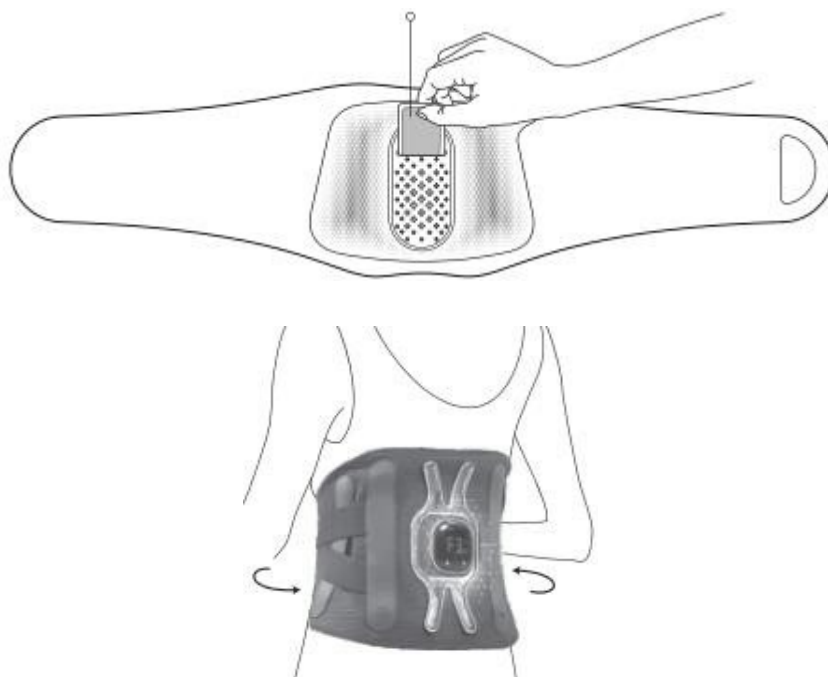


Állítsa be a derékövet a kívánt hosszúságra tépőzárral. Győződjön meg róla, hogy a vezérlő a deréktáji szakasz közepén helyezkedik el.

VEZÉRLŐK

- Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig az indításhoz. Sípoló hang hallatszik. A készülék 15 percnyi aktivitás után automatikusan kikapcsol. A hőmérsékletváltozás nem befolyásolja a kikapcsolási időzítő hosszát.
- 3 hőmérsékleti szint: H1 - 40 °C, H2 - 45 °C, H3 - 50 °C
- Rövid sípoló hang hallatszik, amikor a hőmérséklet változik.
- 3 rezgéstípus: F1 (gyenge), F2 (ritmikus), F3 (nyomás)
- Két rövid sípoló hang hallatszik, amikor a rezgés megváltozik.

TÖLTÉS

- Csatlakoztassa a töltőt a vezérlőpanel oldalához.
- Csatlakoztassa a kábelt az 5V=1A töltőhöz, és dugja be a konnektorba.
- Töltés közben a jelzőfény piros, töltés után zöldre vált.
- A töltési idő körülbelül 4 óra.

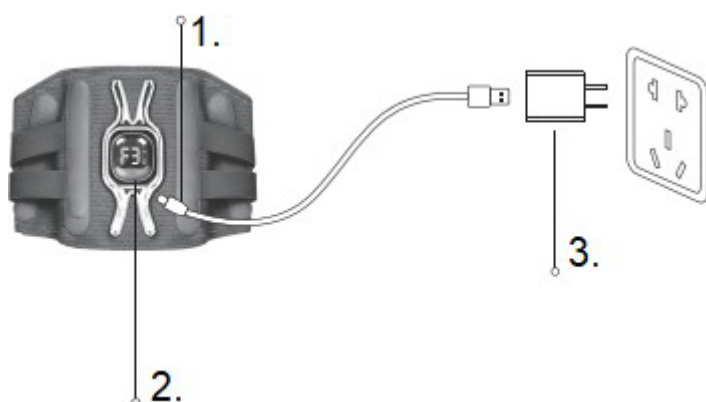

1. Töltőkábel

2. csatlakozó

3. Töltő (nem tartozék)

- Ne indítsa el a készüléket töltés közben.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva a töltőhöz.
- Védje a kezelőpanelt a nedvességtől és a víztől. A kijelzőt puha ruhával tisztítsa.
- A textil részeket vízzel tisztíthatja, ha a masszáz-/elektronikus elemeket eltávolította.
- Vizes tisztítás után hagyja megfelelően megszáradni.
- Ne használjon agresszív, alkohol-, benzin- és oldószer alapú tisztítószeret.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Nem lehet elindítani	Lemerült akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort
	Töltőhöz csatlakoztatva	Húzza ki a töltőt
A töltésjelző nem világít	A kábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Ellenőrizze a kábelcsatlakozást
Alacsony akkumulátorkapacitás	Az akkumulátor élettartama körülbelül 5 év üzemidő	Forduljon a szervizhez
A deréköv nem melegszik fel	Nem megfelelő környezeti hőmérséklet	A környezeti hőmérsékletnek 5°C és 40°C között kell lennie
Működés közben leáll	Az akkumulátor lemerült	Töltse fel az akkumulátort
	Automatikus kikapcsolás 30 perc üzem után	Indítsa újra a készüléket

SPECIFIKÁCIÓK

Üzemi feszültség	3.7 V
Működési teljesítmény	8 W
Töltési feszültség	5 V
Töltőáram	1 A
Súly	0.62 kg
Akkumulátor kapacitása	2000 mAh
Csatlakozó interfész	USB-C
Akkumulátor típusa	Beépített lítium akkumulátor

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.