



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV – HU


IN 28768 Újratölthető szilikon LED maszk inSPORTline Santorina

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A terméket kizárólag a gyártás céljára használja.
- Ne használja, ha nemrégiben műtéten, arcsérülésen vagy bármilyen orvosi/kozmetikai beavatkozáson esett át.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Ne használja, ha a korábbi használat során bőrpír vagy duzzanat jelentkezett. Ha a bőrpír vagy duzzanat 2 óránál tovább fennáll, forduljon orvoshoz.
- Ha érzékeny bőre van, használat előtt konzultáljon orvosával.
- Ne használja nyílt sebeken.
- Használat után a bőr érzékenyebb lehet a napfényre.
- Gyermekek számára nem alkalmas.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket saját kezűleg.
- Ne nézzen közvetlenül a lámpákba.
- Ne haladja meg az ajánlott használati időt.
- Ha az alábbi betegségekben szenved, használat előtt konzultáljon orvosával: daganatok, gyulladás, hőérzékenység, fényérzékenység, nyílt sebek, vérzés, bőrsérülések, duzzanat, bőrpír stb.
- Terhesség esetén használat előtt konzultáljon orvosával.
- Ha hányingert vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát.
- Használat előtt tisztítsa meg a bőrt a kozmetikumoktól és krémektől.
- Ne használja víz közelében vagy nedves környezetben.
- Tartsa távol hőforrásoktól és nyílt lángtól.
- Ne használja, ha az akkumulátor, a töltőkábel vagy a töltő megsérült.
- Használja és töltsse jól szellőző helyiségben, robbanásveszélyes gázoktól távol.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- Ne töltsön 1 óránál tovább.
- Óvja az ütésektől és a leeséstől.
- Használat közben ne takarja le a terméket.
- Töltés közben nem használható.
- Mielőtt a maszkot az arcra helyezné, tesztelje a készüléket a karján.
- Ajánlott használati gyakoriság: hetente 3–5 alkalom, 10–20 perc

TERMÉK LEÍRÁS

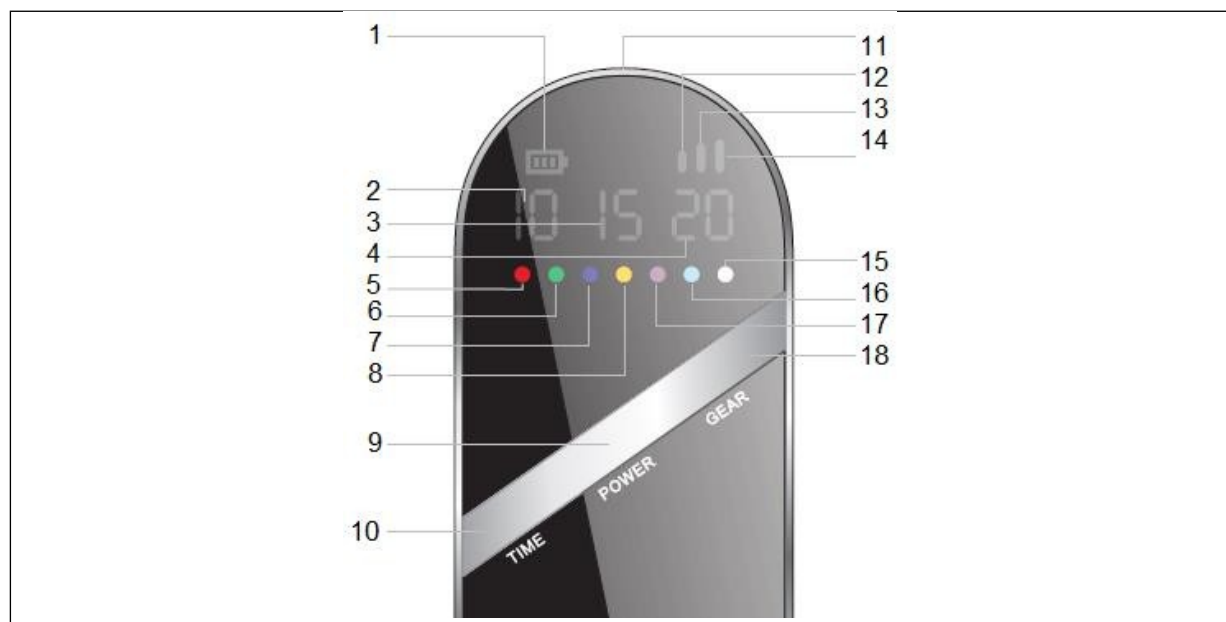

1. Akkumulátor-jelző	10. Idő
2. 10 perc	11. Töltőcsatlakozó/kimeneti csatlakozó
3. 15 perc	12. 1. intenzitási szint
4. 20 perc	13. 2. intenzitási szint
5. Piros fény	14. 3. intenzitási szint
6. Zöld fény	15. Fehér fény
7. Kék fény	16. Világoskék fény
8. Sárga fény	17. Lila fény
9. Bekapcsoló/Mód gomb	18. Intenzitás szint

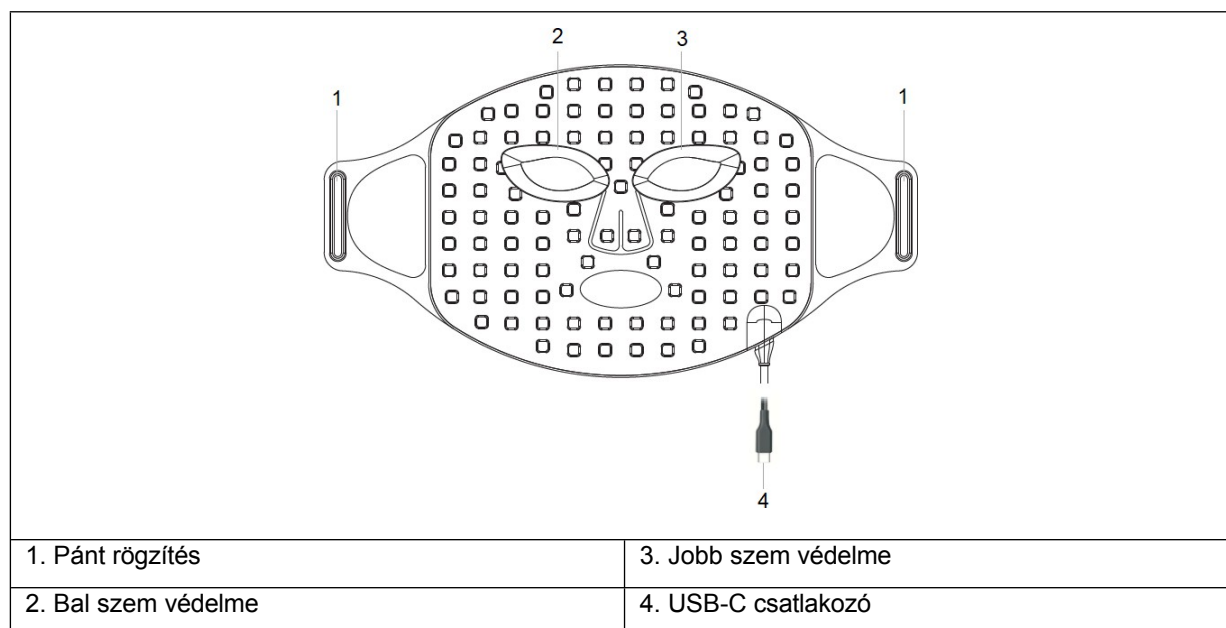

1. Pánt rögzítés	3. Jobb szem védelme
2. Bal szem védelme	4. USB-C csatlakozó

HASZNÁLAT

Mielőtt a maszkot az arcára helyezné, javasoljuk, hogy tesztelje a maszkot úgy, hogy a karjára helyezi.

1. Helyezze a maszkot a karjára.
2. Nyomja meg a POWER gombot a maszk elindításához, és hajtsa végre a 10 perces programot.
3. Ha égő érzést vagy kellemetlenséget érez, azonnal hagyja abba a használatát.
4. A tesztelés után várjon legalább 6 órát, és figyelje meg a kezelt területet. Ha bőrpírt, kiütést, viszketést vagy egyéb problémákat észlel, ne használja a maszkot.

Használati gyakoriság: hetente 3-5 nap, 10-20 percig.

Első használatkor javasoljuk a maszk 1-2-es intenzitási szintjén történő használatát. A tolerancia kialakulása után növelheti az intenzitást.

Az intenzitást és a használat időtartamát a bőr reakciója szerint állítsa be. (Kék fény esetén a használat időtartama nem haladhatja meg a 10 percet)

Használat előtt meg kell tisztítani a bőrt a szennyeződésektől, kozmetikumoktól, krémektől, olajoktól stb. A maszk felhelyezése előtt szárítsa meg a bőrt.

Helyezze a maszkot az arcára, és rögzítse a pántokkal. Tartsa lenyomva a POWER gombot a maszk elindításához.

A maszk piros fényjelzéssel indul. A POWER gomb megnyomásával válthat az egyes fénymódok között.


A TIME gomb megnyomásával állítsa be a használat időtartamát. A POWER gomb lenyomva tartásával bármikor befejezheti a használatot.

A GEAR gombbal állítsa be az intenzitást.


A maszk eltávolítása után kozmetikai termékeket alkalmazhat.

A maszkot nedves ruhával tisztítsa meg, ne használjon vegyszereket. A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a maszk ki van kapcsolva és nincs csatlakoztatva a töltőhöz.


A MASZK FELHELYEZÉSE

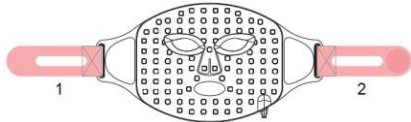

1. bal oldali pánt, 2. jobb oldali pánt

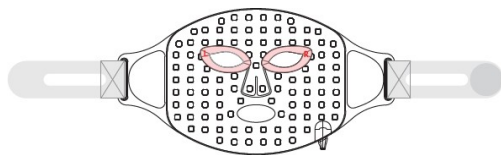

Távolítsa el a védőfóliát, és rögzítse a bal és jobb szemvédőt.

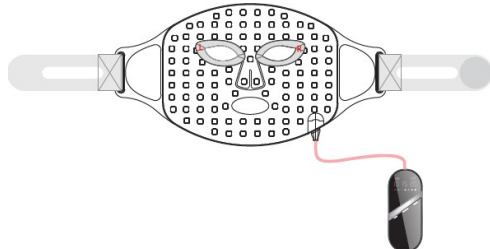

Csatlakoztassa a vezérlőt az USB-C csatlakozóval.

A KÜLÖNBÖZŐ VILÁGÍTÁSI MÓDOK ELŐNYEI

Vörös fény

Serkenti a kollagén termelést. Alkalmas a szövetek helyreállítására és az öregedett bőrszövetek pótlására. Alkalmas a pórusok csökkentésére.

Zöld fény

Segít kiegyenlíteni a pigment szint és felgyorsítja a bőr regenerálódását, csökkenti a zsíros érzést.

Kék fény

Alkalmas a baktériumok elpusztítására és a bőr megnyugtatóására, csökkenti a gyulladást.

Sárga fény

Felfrissíti a bőrt, csökkenti a ráncokat, kiegyenlíti a pigment szint, javítja a bőr puhaságát stb.

Ibolya fény

Pattanásos bőrre alkalmas.

Világoskék fény

Támogatja a sejtek energiáját és anyagcseréjét.

Fehér fény

Javítja a bőr feszességét és felgyorsítja a szövetek anyagcseréjét.

MŰSZAKI ADATOK

LED-es világítás	Piros, zöld, kék, sárga, lila, világoskék, fehér
Lámpák száma	100 db
Akkumulátor	1500 mAh
Feszültség	5 V / 1 A
Teljesítmény	Kb. 6,5 W
Vezérlő mérete	110x45x22 mm
Maszk mérete	380x200x3 mm
Időzítő	10 / 15 / 20 min
Anyag	ABS + szilikon
A csomag tartalma	1x LED maszk, 1x távirányító, 2x szemvédő, 2x rugalmas pánt, 1x használati utasítás, 1x töltőkábel, 1x tárolótáska

KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

