



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 29104 Kompressziós masszázrendszer inSPORTline Compafare

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Első használatkor alacsonyabb intenzitás használatát javasoljuk.
- Ha fájdalmat, kellemetlenséget vagy hányingert érez, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.
- Ne használja más melegítőberendezésekkel (takarók, párnák stb.) együtt.
- Tartsa távol víztől.
- Használat előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a bőrét. Ne használja nedves vagy vizes bőrön.
- Korlátozott fizikai vagy szellemi képességű személyek csak felelős felnőtt vagy gondviselő felügyelete mellett használhatják a terméket.
- Javasoljuk, hogy használat közben tartsa mozdulatlanul a lábait. Ne végezzen semmilyen más tevékenységet.
- Használat közben ne fogyasszon alkoholt, drogokat vagy olyan gyógyszereket, amelyek befolyásolják az ítélőképességet.
- Védje magát a fizikai sérülésektől.
- Ha a készülék sérült, vagy működés közben rendellenességeket mutat, azonnal hagyja abba a használatát, és ne használja, amíg a sérülést meg nem javították.
- Ne használja, ha bőrbetegsége van; gyulladás, nyílt sebek vagy nem gyógyult sérülések vannak a használati területen; visszérműtét után vagy előtt álló személyek; szívbetegség; elzáródott erek stb.
- Gyermekek és állatok elől elzárva tartandó.
- Ne tegye ki hosszú ideig napfénynek. Ne használja magas páratartalmú helyiségekben (szaunák, úszómedencék stb.).
- Használat közben ne aludjon el.

SPECIFIKÁCIÓK

Üzemi hőmérséklet: 5°C ~ 40°C	Zaj: < 55 dB
Tápfeszültség: 110V-240V, 50/60Hz	Maximális nyomás: 250 Hgmm
Nyomás: 86 kPa – 106 kPa	Időzítő: 10-60±3 perc
Áramforrás: 110-240V±22V, 50Hz/60Hz+1Hz	

TISZTÍTÁS, TÁROLÁS, KARBANTARTÁS

Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket. Tisztítsa meg a felületet 75%-os alkoholos oldattal. Csak nedvesítse meg a kendőt, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe. Tisztítás után hagyja szabadon megszáradni, és tárolja tiszta, árnyékos és száraz helyen.

HASZNÁLAT



1. Nyomás csökkentése

Nyomja meg a gombot az érték egy szinttel csökkentéséhez

2. Nyomás növelése

Nyomja meg a gombot az érték egy szinttel növeléséhez

3. Légkamra kiválasztása

Az 1–6. gombokkal válassza ki a légkamrát. A jelződióda mutatja az aktív kamrát, az aktuálisan felfújt kamra villogó fényét.

4. Programválasztás

Nyomja meg a gombot a használati program kiválasztásához

5. Időzítő

Állítsa be a működési időt

6. Főkapcsoló

A gomb működés közben kék, leállított állapotban narancssárga

7. Tápellátás

100V-240V, 50/60Hz

8. Légtömlők csatlakoztatása

Csatlakoztassa és indítsa el, a kezelőpanel reagálni fog a gombok megnyomására.

A légtömlő csatlakozásának iránya: a tömlő és a tömlőcsatlakozás háromszöggel van jelölve. Győződjön meg róla, hogy ugyanabba az irányba néznek.

Csatlakoztassa a légtömlőket a légzsákokhoz.

Vegye fel a masszázrendszer, és rögzítse tépőzárral.

Indítás után állítsa be a masszázs időtartamát 10 és 60 perc között. A nyomás 30 és 250 mmHg között állítható. Az egyes légzsákok felfújási ideje az aktív légzsákok számától és a beállított nyomástól függ.

Használat után kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a masszázrendszer a cipzár kinyitásával.

A felesleges levegő kiengedéséhez válassza le a tömlőket, és nyomja ki a levegőt a zsákokból.

PROGRAMOK


A: A program fokozatosan felfújja és leereszti a légzsákokat a lábfejektől a combokig. Minden szakasz kb. 12 másodpercig fújódik fel.

B: A program a lábfejektől a combokig fújja fel a légzsákokat. A felfújás után minden szakasz felfújva marad. Egy szakasz felfújási ideje kb. 12 másodperc, és mind a 6 légzsák felfújása körülbelül 72 másodpercet vesz igénybe.

C: A program két légzsák felfújását kombinálja. Minden második rész felfújódik és leeresztődik a lábfejektől a combokig. A teljes ciklusidő körülbelül 75 másodperc.

D: A program 72 másodpercig felfújja az összes légzsákot, majd 25 másodpercig leereszti azokat. A ciklus a beállított ideig ismétlődik.

E: A program megismétli az A (70 másodpercig) és a B (70 másodpercig) programot. Egy ciklus (140 másodperc) után a légzsákok 25 másodpercig leeresztenek, majd a ciklus megismétlődik.

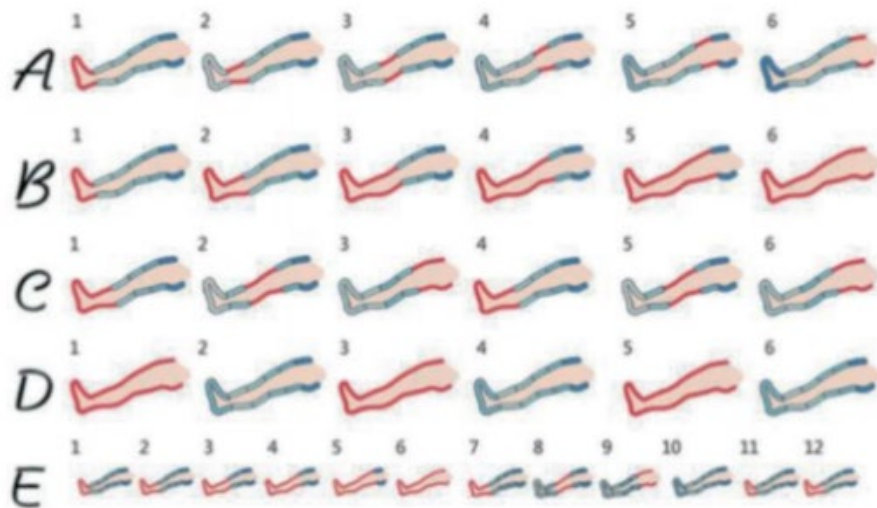

CSOMAG TARTALMA



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.