



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

**IN 29214 Nyak- és hátmasszázs párna inSPORTline
Belvetino**

TARTALOM


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A CSOMAG TARTALMA	4
TERMÉK LEÍRÁS	4
HASZNÁLAT	4
VEZÉRLŐ	7
TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS	11
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	11
KÖRNYEZETVÉDELEM	11

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu-ra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A párna nem alkalmas a következő személyek számára:
 - Pacemakerrel vagy hasonló eszközzel rendelkező személyek.
 - Daganatos vagy rákos betegek.
 - Keringési rendellenességekkel vagy betegségekkel küzdő személyek.
 - Szívbetegségben szenvedők.
 - Hőérzékeny vagy rossz hőérzékenységgű emberek.
 - Várandós nők vagy nemrég szült nők.
 - Cukorbetegség vagy hasonló betegségek miatt sérült erekkel vagy idegkárosodással rendelkező emberek.
 - Csontritkulásban, gerincsérülésekben, rándulásokban szenvedő vagy izomgörcsökkel küzdő emberek.
 - Az alkalmazás területén sérülésekkel rendelkező emberek.
 - Használat előtt mindig konzultáljon orvosával.
- A fűtőtest hosszabb ideig tartó használata, még alacsony hőmérsékleten is, égési sérüléseket okozhat.
- Ne használjon hosszabbító kábelt vagy adaptert.
- Ne használjon kopott vagy sérült terméket.
- A használat során az elektródáknak érintkezniük kell a bőrrel.
- Csak a hát és a nyak területén használja.
- Védje a terméket ütésektől, leeséstől és fizikai sérülésektől. Ne lépjen rá a termékre.
- Védje a tápkábelt a sérülésektől.
- Ne használja más, hőt kibocsátó termékekkel egyidejűleg, illetve ilyen tárgyak (radiátorok, fűtött takarók, párnák stb.) közelében.
- A termék egy helyen történő maximális használati ideje 15 perc.
- Ne használja alvás közben vagy fáradt állapotban.
- Ne használja nedves környezetben, például fürdőszobában, úszómedencében stb.
- 15 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol. Ezután 1 óra pihenőidő szükséges.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- Az elektródákat csak a háton, nyakon, combok elülső részén, vádlin, karokon és derékon használja. Ne használja a szemeken, nemi szerveken vagy más érzékeny bőrfelületeken.
- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.
- Minden elektróda élettartama 10-15 használat.

A CSOMAG TARTALMA

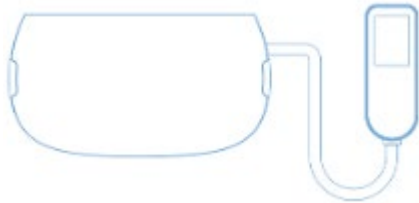Masszázs párna	
Tápegység	
Elektródák csatlakozása	
Elektródák	

TERMÉK LEÍRÁS

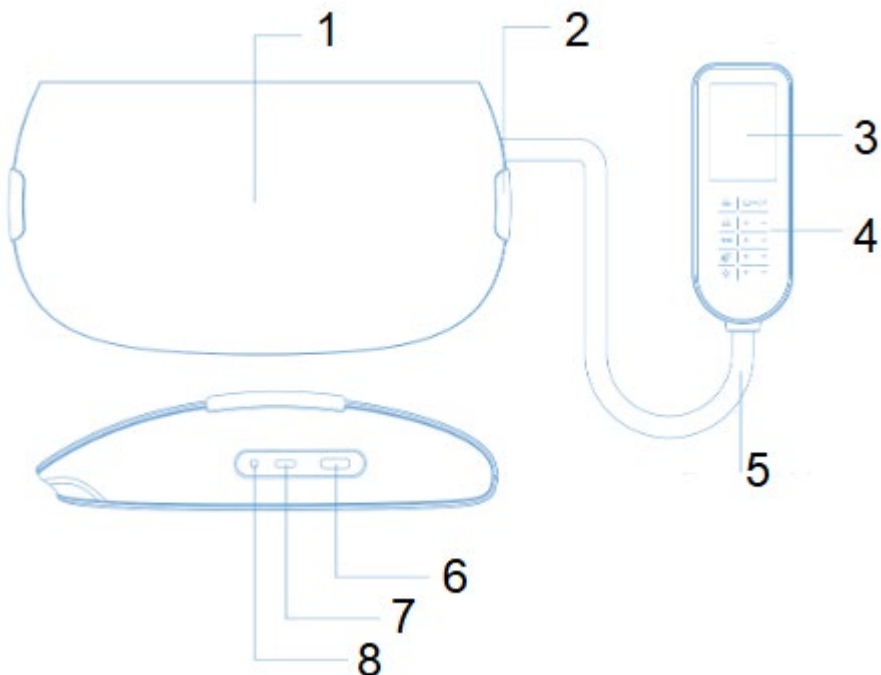	
1. Masszázs terület	5. Vezérlőkábel / légtömlő
2. Világító jelző	6. Vezérlő / légtömlő csatlakozás
3. Kijelző	7. Bekapcsológomb
4. Gombok	8. Fűtés / masszázs gomb

HASZNÁLAT

Kiválaszthatja a masszázs irányát. A különböző irányok eltérő masszázsélményt eredményezhetnek. Javasoljuk, hogy a masszázspárnát a masszázs előre irányítva használja.

Derék

Előre




Hát




Nyak


Előre

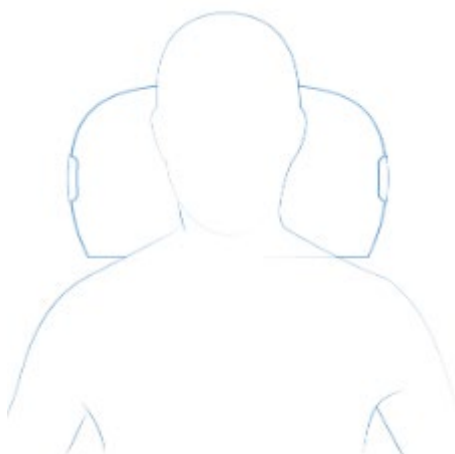

Hát

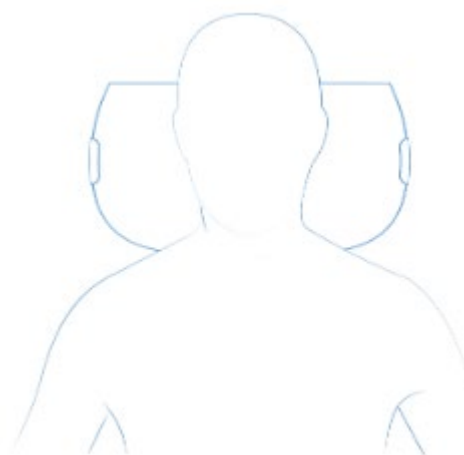


Csatlakoztassa a párnát a konnektorhoz. A tápkábel vége L alakú, ezért ajánlott, hogy a tápkábel a konnektor felé nézzen.

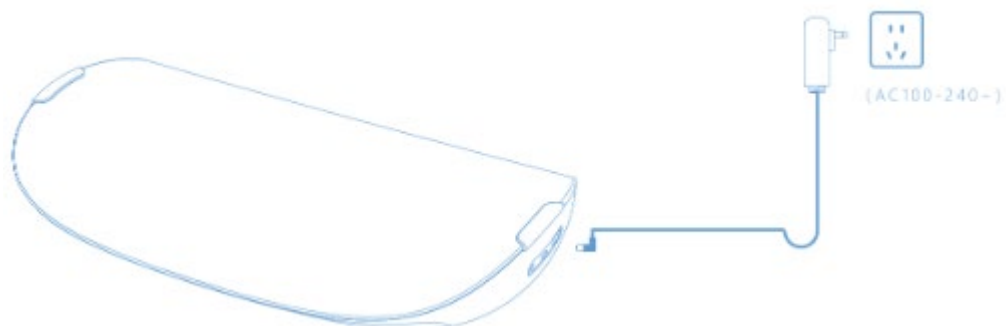

Válassza ki a masszázrs irányát és területét.


Derék

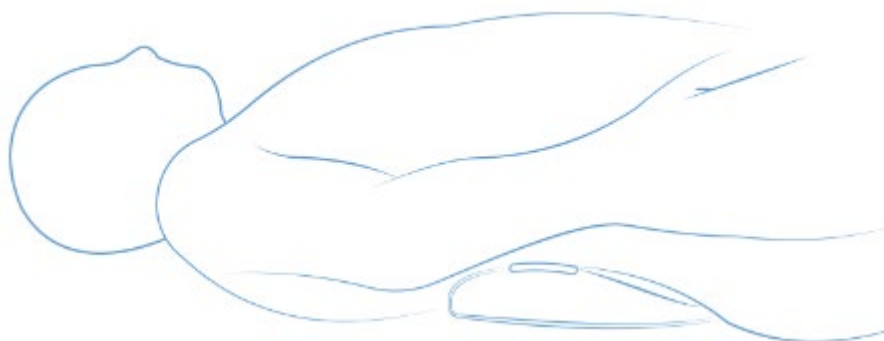

Nyak




VEZÉRLŐ

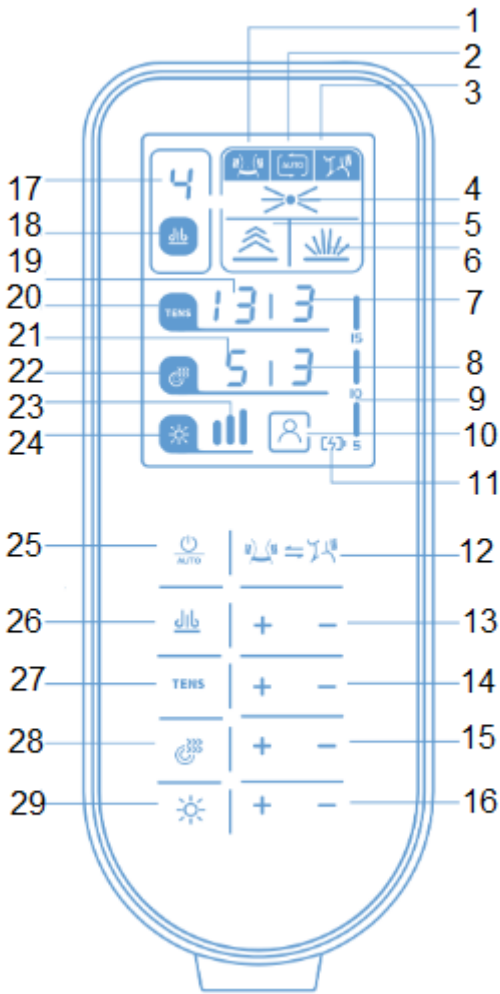		1.	Derék masszáz program
		2.	Automatikus program
		3.	Nyakmasszázs program
		4.	Swing program
		5.	Emelési program
		6.	Traction program
		7.	Pulzáló mód
		8.	Rezgés visszaszámlálás
		9.	Idő visszaszámlálás
		10.	Várakozási ikon a masszázs pozíció kiválasztásához
		11.	Bekapcsolás ikon
		12.	Masszázs terület váltása
		13.	Légmasszázs beállítás
		14.	Pulzáló beállítás
		15.	Rezgés beállítás
		16.	Fűtés beállítása
		17.	Légmasszázs intenzitása
		18.	Légmasszázs ikon
		19.	Pulzáló intenzitás
		20.	Pulzálás ikon
		21.	Rezgés intenzitása
		22.	Rezgés ikon
		23.	Fűtés intenzitása
		24.	Fűtés ikon
		25.	Tartsa lenyomva a párna indításához/leállításához Nyomja meg az automatikus programok közötti váltáshoz
		26.	Légmasszázs elindítása/leállítása
		27.	A pulzálás elindítása/leállítása
		28.	Rezgés indítása/leállítása
		29.	Fűtés indítása/leállítása

Automatikus nyakmasszázs program



A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot ( AUTO).

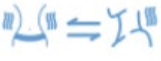A masszázs pozícióváltoztató gombbal () válassza ki a nyakmasszázszt ().

Nyomja meg a bekapcsológombot ( AUTO), hogy kiválassza a légmasszázs típusát.

A gombokkal  állítsa be a légmasszázs intenzitását  .

Automatikus derékmasszázs program



Tartsa lenyomva a bekapcsológombot  AUTO a program elindításához.

A masszázs pozícióváltoztató gombokkal  válassza ki a derék  opciót.

Nyomja meg a bekapcsológombot  AUTO a légmasszázs típusának kiválasztásához.

A gombokkal  állítsa be a légmasszázs intenzitását  .

Feszültségmasszázs (elektródák)

Csatlakoztassa az elektródakábelt a párnához, majd csatlakoztassa az elektródákat a kábelhez.






A funkció elindításához használja a **TENS** gombot.

Az **TENS** gomb megnyomásával válassza ki a masszázs típusát.


Az **(+ -)** gombokkal állítsa be az intenzitást.

Tartsa lenyomva az „**TENS**” gombot a program kikapcsolásához.


Az elektródákat a következő helyekre helyezheti:

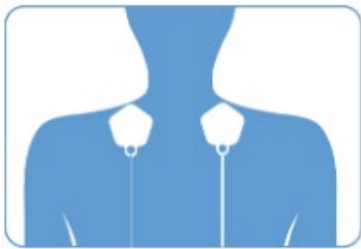


Vállak

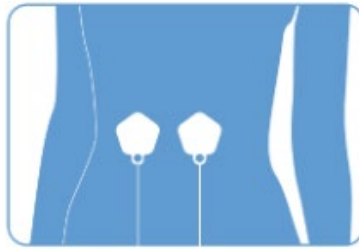

Hasi

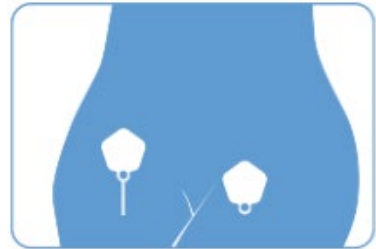

Combok / vádlik

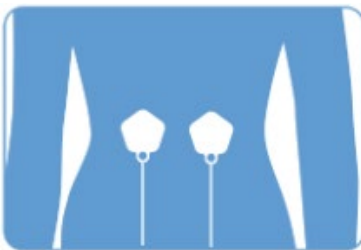

Derék



Karok



Rezgésprogram

A funkció elindításához nyomja meg az „” (Masszázs típus) gombot.

A masszázs típusának kiválasztásához nyomja meg a „” gombot.

Az „” gombokkal állítsa be a vibráció intenzitását (, 5 szint).

A program kikapcsolásához tartsa lenyomva a „” gombot.




Fűtés

Nyomja meg az „” gombot a funkció elindításához.

Az „” gombokkal állítsa be a hőmérsékletet .

Tartsa lenyomva a „” gombot a fűtés kikapcsolásához.

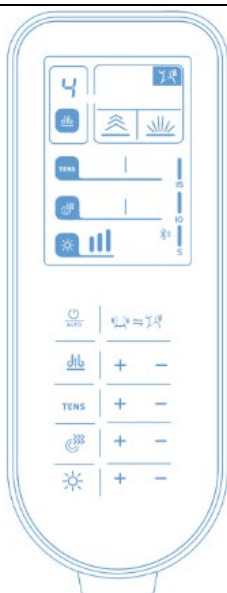

Kézi légmasszázs

Az automatikus programban nyomja meg a „” gombot a kézi üzemmódra való átváltáshoz.

Az  gomb megnyomásával válassza ki a masszázstípusát.

Az „” gombokkal állítsa be az intenzitást  (4 szint).

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Használat után húzza ki a dugót. Ne húzza ki a dugót működés közben.
- Ne tekerje a kábeleket és tömlőket a párnára.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne tárolja nedves környezetben.
- Száraz, árnyékos helyen, napfénytől elzárva tárolja.
- Ne helyezzen más tárgyakat a termék tetejére.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ne használjon maró hatású tisztítószeret. Tisztításhoz használjon nedves ruhát, majd szárítsa meg száraz ruhával. Védje a víztől.
- Ne dörzsölje erősen a párnát.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvjaa a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.