




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 29495 IPL epilátor inSPORTline Aphira

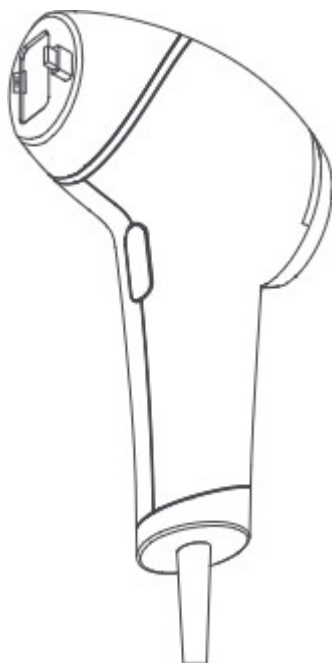

TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
FIGYELEM	4
NEM ALKALMAS AZ ALÁBBI ESETEKBEN.....	4
VÉDJÉK A BŐRÜKET.....	5
A CSOMAG TARTALMA.....	6
TERMÉKLEÍRÁS	6
FUNKCIÓK.....	7
HASZNÁLAT.....	8
HASZNÁLAT UTÁN ÁPOLÁS.....	9
AJÁNLOTT TERV.....	9
ISMERT MELLÉKHATÁSOK.....	10
HIBAELHÁRÍTÁS	10
MEGJEGYZÉSEK.....	10
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	11
MŰSZAKI ADATOK.....	11
KÖRNYEZETVÉDELEM	12

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu-ra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Tartsa távol víztől és nedvességtől. Ne használja az epilátort vízforrások közelében, például zuhany, úszómedence stb. közelében.
- Az epilátort és a tápegységet tartsa szárazon.
- Ne használja a terméket, ha sérült vagy kopott.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a nyílásokba.
- Ne használja a szem közelében.
- Használat közben viseljen védőszemüveget.
- Ha egy testrészét nem tudja magától elérni, kérjen segítséget egy másik személytől.
- Használat előtt aszörszálakat legalább 3 mm-re le kell vágni. A hosszú szörszálak közvetlenül bőrön felszívhatják a hőt, ésbőrpírt vagy duzzanatot okozhatnak. Az égett hosszú szörszálak kellemetlen szagot is árasztanak.
- Győződjön meg arról, hogy bőr száraz és tiszta. A besugárzási ablakon lévő szennyeződések vagy szörszálak befolyásolhatják a készülék működését és váratlan villanásokat okozhatnak.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne alkalmazza az izzadásgátlót közvetlenül a hónalj területének használata után.
- Ne használja mágneses hullámokra érzékeny tárgyak közelében.
- Ne használja háziállatokon.
- Ne használja a használati utasításban leírtaktól eltérő módon. A termék csak bőrre alkalmas.
- Használat után tisztítsa meg az epilátort.
- Első használatkor állítsa az intenzitást a legalacsonyabb szintre.
- Ne használja, ha a szellőzőnyílások és a légnyílások bármilyen módon el vannak tömítve.
- Ne irányítsa a készüléket fekete tárgyakra, mert ez a készülék meghibásodásához vezethet. A készüléket csak a bőrön használja.
- Ne alkalmazzon gél kozmetikumokat a használat előtt és után.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Használat előtt hagyja a készüléket szobahőmérsékletre melegedni.
- Tartsa távol gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól.
- Ne érintse meg a fényt és hőt kibocsátó aktív részt. A kezelés után 24 órán keresztül ne tegye ki a kezelt területet napfénynek és UV-sugárzásnak.
- Nem alkalmas: terhes és szoptató nők számára, menstruáció alatt, heges területeken, érzékeny bőrű emberek számára, hőre és fényre érzékeny emberek számára, sérült végtagokkal rendelkező emberek számára, szívbetegségben, daganatokban, gyulladásban, rákban, leégésben, nyílt sebekben, visszérben, vénás betegségben vagy károsodásban, bőrkütesben stb. szenvedő emberek számára.
- Ne használja, ha olyan gyógyszert szed, amely befolyásolhatja a gyógyulást vagy a vérzést.
- Ne használja nemi szerveken, szemeken és érzékeny bőrfelületeken.
- Ne használja anyajegyeken, tetoválásokon, pattanásokon és hegeknél.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.

- Tárolási hőmérséklet: 5 °C – 40 °C.
- Figyelem: A helytelen használat sérüléseket okozhat.

FIGYELEM

1. **Kerülje a napfényt:** használat előtt és után védje bőrét a közvetlen napfénytől. A napfény bőrirritációt okozhat.
2. **Alkalmas bőrszín:** az epilátor nem alkalmas sötét bőrű személyek számára.
3. **Kezdeti intenzitás:** hagyjon időt a bőrnek az alkalmazkodásra, kezdje az epilátor használatát az 1. intenzitási szinttel.
4. **Használat előtti előkészítés:** használat előtt borotválja le a szőrtelenítendő területet. Ne használjon vegyszereket, mert azok bőrirritációt okoznak.
5. **Szemvédelem:** használat közben viseljen védőszemüveget.
6. **Szoba megvilágítás:** az epilátort jól megvilágított helyiségben használja.
7. **Védje a készüléket a sérülésektől:** óvatosan kezelje az epilátort, védje a fizikai sérülésektől.
8. **Kerülje a napfényt:** ne használja az epilátort közvetlen napfényben, mert túlmelegedhet.

Megjegyzés: Használat után helyezze az epilátort úgy, hogy a szellőzőnyílások szabadok legyenek, és az epilátor lehűlhessen.

- Használat után kapcsolja ki és húzza ki a dugót.
- Ha a készüléket 20 °C-nál nagyobb hőmérséklet-különbségű környezetbe viszi, kapcsolja ki az epilátort, és hagyja 2 órán át alkalmazkodni a hőmérsékletéhez.
- Ha a készüléket más személy is használja, az epiláló adaptert fertőtleníteni kell.
- Az epilátor elektromágneses hullámokat bocsát ki. Az elektromágneses hullámok nem károsak az egészségre.
- Ha az elektromágneses hullámok hatással vannak a közelben lévő más eszközökre, tartson legalább 5 méteres távolságot más eszközöktől.

NEM ALKALMAS AZ ALÁBBI ESETEKBEN

- Bőre érzékenységi rendellenességekkel küzdő személyek.
- Azok, akik 2 hétig vagy annál hosszabb ideig folyamatosan napfénynek voltak kitéve.
- Terhes vagy szoptató nők számára nem alkalmas. Menstruáció alatt nem alkalmas. Hegek, vékony vagy érzékeny bőrön nem alkalmas. Cukorbetegség számára nem alkalmas.
- Végtag sérülésekkel, idegvégződésekkkel vagy mentális betegségekkel küzdő személyek.
- Szívbetegségben, közepes vagy súlyos magas vérnyomásban, daganatokban, szőrtüszőgyulladásban, fertőző bőrbetegségekben, égési sérülésekben vagy véralvadási rendellenességekben szenvedő személyek.
- Kerülje a használatát, ha rendellenes kollagén anyagcserével rendelkezik, például hegeseddel vagy rossz sebgyógyulással.
- Érendszeri betegségekben, például visszérben vagy értágulatban szenvedő betegek az alkalmazás helyén.
- Ne használja, ha bőre fényérzékeny és hajlamos kiütésekre vagy allergiára.
- Ne használja, ha az alkalmazás helye gyulladt, vagy ha herpes simplex, bőrlézió vagy hematoma van.
- Vérzési rendellenességben szenvedők, illetve izotretinoint, gyümölcsvasat (AHA), szalicilsavat (BHA) vagy azelainsavat szedők.
- Legyen óvatos, ha az elmúlt 30 napban kémiai szőrtelenítő termékeket használt, vagy nemrégiben bőrfehéritő termékeket vagy A-vitamin tartalmú összetevőket használt.
- Krémek, síkosítók vagy más kozmetikumok használata piszkos vagy nedves bőrön befolyásolhatja a termék hatékonyságát és károsodást okozhat.

- Kerülje a készülék használatát aszpirin, immunszuppresszív gyógyszerek, izotretinoin vagy más gyógyszerek szedése közben. A használat nem ajánlott, ha fényérzékenyítő gyógyszereket, például tetraciklint vagy szulfátot szed.
- Kisebb bőrkárosodás (napégés) esetén ne használja a készüléket, amíg a bőr meg nem gyógyult.
- Ne használja érzékeny területeken, például nyálkahártyákon.
- Ne használja gyógyulatlan sebeken.
- Nem ajánlott hirsutizmusban vagy betegség okozta hirsutizmusban szenvedő betegek számára.
- A fájdalomcsillapítók csökkenthetik a bőr hőérzékenységet; óvatosan használja, amíg hatása el nem múlik.
- Ne használja, ha a bőr pigmentje és a szőr színe nem alkalmas a termék használatára.

VÉDJE BŐRÉT

- Az epilátor nem alkalmas sötét bőrszínre vagy barnult bőrfelületekre.
- Használatkor mindig kerülje a bőrön lévő foltokat és hegeket.
- Ne használja gyógyulatlan sebeken, daganatos területeken és hemangiómás területeken.
- Ne használja fertőzött vagy gyulladt bőrön, bőrelváltozásokon, vérömlenyeknél vagy kóros pigmentációknál.
- Ne használja a test belső részein, nemi szerveken, nyálkahártyákon.
- Ne használja plasztikai sebészeti beavatkozások területén.
- Ne használja a nyak területén.
- Ne használja a szem és a szemhéj területén.
- Ne használja aknéval érintett területeken.

Továbbá ne használja a következő területeken:

- Szemöldök és haj.
- Fül.
- Mellbimbók, köldök és bimbóudvar.
- Nagy vénák és artériák.
- Tetoválás vagy pigmentált bőr.

FIGYELMEZTETÉS:

A készülék nem diagnosztikai segédeszközként, illetve betegségek kezelésére vagy megelőzésére szolgál. A készülék nem alkalmas fizikai, mentális vagy bőrbetegségek kezelésére. Használat előtt konzultáljon orvosával, és beszélje meg vele az esetleges mellékhatásokat.



A sugárzás károsíthatja a látást.





BF típusú alkalmazott alkatrész




II. osztályú berendezés

A CSOMAG TARTALMA

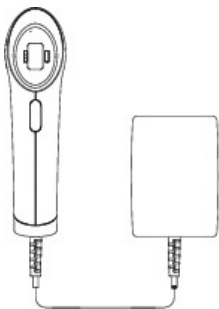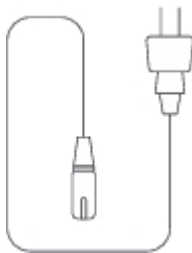Eszköz hálózati adapterrel 	Epiláló adapter 	Tápkábel 
Borotvapenge 	Védőszemüveg 	Kézikönyv 

TERMÉKLEÍRÁS

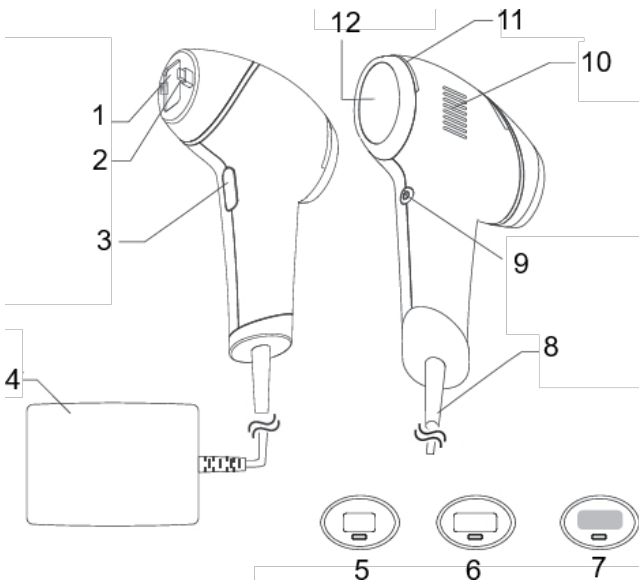	
1. Impulzusfény	7. Szórtelenítő adapter – arc
2. Bőrszín-érzékelő	8. Tápkábel
3. Használati gomb (villog)	9. Be-/kikapcsoló gomb / intenzitás beállítás
4. Hálózati adapter	10. Szellőzőnyílás
5. Epiláló adapter – bikini	11. Jelzőfény
6. Epiláló adapter – test / lábak	12. LCD kijelző

FUNKCIÓK

Auto Automatikus fény		300999 Villanások száma
> > > > > Intenzitás		
 Arc – arcszőrzet	 Test/lábak – test- és lábszőr	 Bikini – intim szőr

Skin tone							
Hair colour		White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Black
Grey/White		×	×	×	×	×	×
Red		×	×	×	×	×	×
Light blond		×	×	×	×	×	×
Light brown		4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Brown		4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Dark brown		4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Black		4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×

A hatékony epiláláshoz fontos a szőr színe és a bőr pigmentje közötti kontraszt. Az epilátor világosbarnától feketéig hatékony.

Az epilátor nem alkalmas nagyon sötét bőrpigment vagy világos szőrszín (fehér/szürke és szőke) esetén.

1. Automatikus bőrpigment-felismerés

A készülék automatikusan érzékeli a bőr pigment színét.

2. A szőr színének azonosítása

A táblázat szerint azonosítsa a szőrszálak színét.

3. A táblázat segítségével határozza meg a megfelelő intenzitást és használatot

Határozza meg a hajszínét és a bőr pigmentjét. A metszéspontban található érték (pl. 4/5) jelzi az ajánlott intenzitást.

Az X jelölés nem megfelelő kombinációt jelöl, ezért a használat nem ajánlott.



A készüléknek érintkeznie kell a bőrrel



Nagy távolság





HASZNÁLAT ELŐTTI ELŐKÉSZÜLET

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a bőr tiszta, szőrtelen, száraz és mentes minden kozmetikai terméktől, például parfümtől, dezodortól, naptejtől, hidratáló krémtől stb.

Borotválja le a szőrt az alkalmazás területén borotvával. Ne használja a borotvát száraz bőrön – használjon borotvahabot vagy krémet.

Győződjön meg arról, hogy az epiláló adapteren nincs szennyeződés vagy szőr. A szennyeződés károsodást, a termék meghibásodását vagy a bőr sérülését okozhatja.

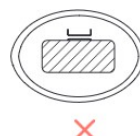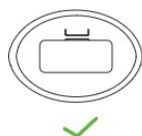

Használat előtt ne alkalmazzon géleket, krémeket vagy más kozmetikai termékeket.


HASZNÁLAT

Előkészítés

Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van. Az LCD képernyő kigyullad, a kijelzőn az OFF felirat jelenik meg. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.


Használat

- Helyezze az epiláló adaptert vízszintesen a bőrre.
- Győződjön meg arról, hogy az adapter teljes felületével érintkezik a bőrrel.
- Amikor a jelzőfény zöldre vált, az azt jelenti, hogy a termék használatra kész.
- Nyomja meg a besugárzás gombot. A fény háromszor villog.
- Lépjen a bőr következő részére, és ismételje meg a folyamatot, amíg az egész célterületet kezelte.

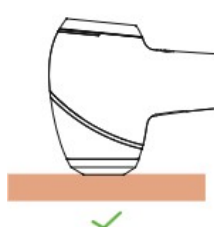


A legjobb eredmény érdekében az epiláló adapternek érintkeznie kell a bőrrel.


A bőrfelület teljes lefedése

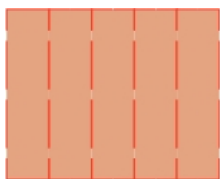

Kihagyott terület

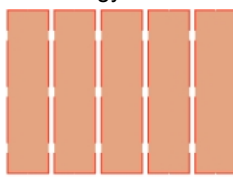

Átfedő terület

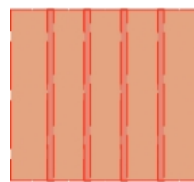

Automatikus program

Miután az epilátor bekapcsolódott és érintkezik a bőrrel, tartsa lenyomva a használat gombot 2 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az AUTO felirat, jelezve az automatikus használatot.

Az automatikus program használata

Tartsa az epilátort a bőrrel érintkezve, és lassan mozgassa az alkalmazási területen. A készülék sugárzást bocsát ki, amikor érintkezik a bőrrel és mozgást érzékel.

Lassan és simán mozgassa a bőr felett, nem szükséges megnyomni a villanás gombot. A villanás gomb megnyomásával kikapcsolhatja az automatikus programot.

HASZNÁLAT UTÁNI ÁPOLÁS

Kerülje a vízzel való érintkezést: használat után legalább 2 órán át óvja a területet a vízzel való érintkezéstől.

Ne használjon maró hatású kozmetikai termékeket: ne használjon parfümöket, maszkokat vagy más maró hatású anyagokat tartalmazó kozmetikai termékeket közvetlenül az epilálás után.

Védje a bőrt az UV-sugárzástól: az epilálás után 48 órán keresztül védje a bőrt a napfénytől és az UV-sugárzástól. Legalább 72 órán keresztül védje a bőrt napvédő krémmel.

Figyelje a bőrt: figyelje a bőr reakcióját a szőrtelenítésre, ha irritációt vagy kellemetlen érzést észlel, forduljon orvoshoz.

Forduljon orvoshoz: ha bármilyen sebészeti vagy kozmetikai beavatkozást tervez a szőrtelenítés területén, használat előtt konzultáljon orvosával.

Bőrápolás

Használat után vigyen fel nyugtató krémet vagy aloe verát.

A készülék tárolása

A készüléket száraz, árnyékos helyen tárolja. Tárolás előtt a készüléket meg kell tisztítani a szennyeződésektől.

Biztonság

Használat közben védőszemüveg viselése szükséges.

AJÁNLOTT TERV

12 hetes használati tervet javasunk:

Kezdeti szakasz (1–8. hét)

Használja az epilátort hetente egyszer, 8 héten keresztül.

Következő használat (9–12. hét)

Használja az epilátort kéthetente egyszer (pl. a 10. és 12. héten).

ISMERT MELLÉKHATÁSOK

Mellékhatás	Kezelés
Enyhe fájdalom/kellemetlen érzés a szőrtelenítés területén	Ez gyakran előfordul, és az érzés ismételt használat mellett csökkenni fog.
Az alkalmazás helyén melegség vagy bizsergés érzése, amely az alkalmazás után néhány másodperc vagy perc múlva elmúlik. Az érzés a használat során elmúlik.	
Viszketés az alkalmazás helyén	Ne vakarja a területet, a készüléket továbbra is használhatja.
A bőrpír az alkalmazás alatt vagy után, amely néhány perc múlva eltűnik a használat után	A bőrpír eltűnése után a termék használata folytatható.
24-48 órán belül nem múló bőrpír	Azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.
Erős fájdalom vagy kellemetlen érzés az alkalmazás során és után	
A használat után 2 napon belül nem múló duzzanat vagy bőrpír	
Ideiglenes bőr elszíneződés	Azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.
Hólyagok vagy égési sérülések a bőrön	Azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

HIBAMEGÁLLAPÍTÁS

Hiba: a készülék nem indul el

- Ellenőrizze, hogy az epilátor csatlakozik-e az áramellátáshoz.

Hiba: a villanások nem indulnak el

- Ellenőrizze, hogy az epiláló adapter érintkezik-e a bőrrel.
- Győződjön meg arról, hogy a pigment és a szőr színe alkalmas a termék használatára.
- Várjon, amíg a termék lehűl.

Hiba: a kijelző nem világít, és az ikonok nem jelennek meg

- Ellenőrizze, hogy az epilátor csatlakozik-e az áramellátáshoz.
- Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
- Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Hiba: a zöld fény kigyullad, és a készülék leáll

- Várjon, amíg az epilátor lehűl.

Hiba: a termék megsérült vagy elhasználódott

- Azonnal hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

MEGJEGYZÉSEK

- Az indítás során hallható a ventilátor működése, ez normális jelenség.
- Az első használat során kezdje el az epilátor használatát a legalacsonyabb intenzitással, és fokozatosan növelje az intenzitást, ha szükséges.

- Használat közben ne nézzen közvetlenül a fénybe, és ne irányítsa a villanásokat közvetlenül a szemére.
- Ne használja a készüléket a bőrön kívüli más testrészeken.
- Normális, ha a bőr a használat után enyhén piros és meleg.
- Ne használjon alkohol alapú termékeket közvetlenül üveg vagy fényforrások tisztítására.
- Ne alkalmazzon gél kozmetikumokat használat előtt és után.
- Kérjen meg valakit, hogy segítsen eltávolítani a nehezen elérhető területeken (hát) lévő szőrszálakat.
- A használat előtt kerülje a fényérzékeny ételek (spenót, szőlő, mustár stb.) fogyasztását.
- Fokozatosan szoktassa hozzá bőrét a táblázatban ajánlott intenzitásig.
- A sötét bőrű embereknél a sugárzás hatása késleltetve jelentkezhet.
- Használat közben ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- Használat közben az adapter belső széle elsötétülhet vagy fekete foltok jelenhetnek meg rajta a szőr vagy szennyeződések tapadása miatt. Ezek a változások nem befolyásolják a termék működését.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készüléket indítás után ne hagyja felügyelet nélkül, használat után kapcsolja ki és húzza ki a dugót.
- Használat után kapcsolja ki, húzza ki a dugót, és hagyja lehűlni a készüléket.
- Használat után törölje le egy száraz, puha ruhával.
- Száraz és tiszta helyen, 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.
- Erős elektromos vagy mágneses hullámok által érintett helyeken ne tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Név	inSPORTline Aphira
Hullámhossz	560 nm- 1200 nm
Villanások száma	990 000
Névleges teljesítmény	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	120 W
Méret	220*87*55 mm
Intenzitás	5 intenzitási szint
Energia sűrűség	2,0 – 5,0 J/cm ²
Tartozék	3 adapter
Flash program	Kézi, automatikus
Szőrtelenítési terület	2,7 cm ² (30*9 mm) 2,0 cm ² (22*9 mm)
Üzemi hőmérséklet	5 °C – 35 °C
Üzemi nyomás	80 kPa – 106 kPa



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

