



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 29682 Infravörös lámpa inSPORTline Zelara

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

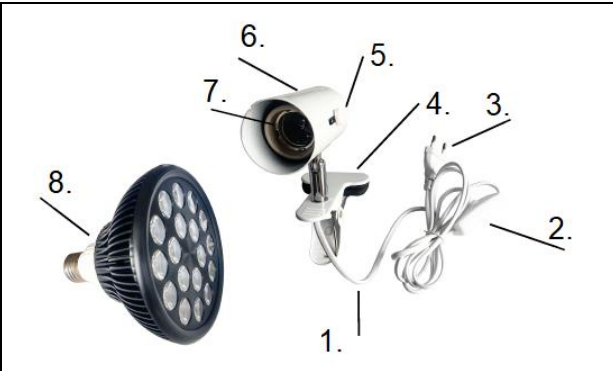
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Ne használja a lámpát magas páratartalmú helyeken vagy víz közelében (fürdőkád, úszómedence, szauna stb.).
- Ne merítse a lámpát vízbe.
- Ne használja a lámpát, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- Használat közben ne takarja le. Ne használja a lámpát, ha fáradt, vagy alvás közben.
- Ne nézzen közvetlenül a fénybe.
- Ne használja a lámpát a nemi szervek környékén.
- Ne használja a lámpát, ha nedves vagy nyirkos.
- Ne használja folyamatosan 30 percnél tovább.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket saját kezűleg. Ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- Védje az ütésektől, leejtésektől és fizikai sérülésektől.
- Használat közben az izzó felmelegszik, ne érintse meg.
- Ha nedves ruhával tisztítja a lámpát, használat előtt alaposan szárítsa meg.
- Ne működtesse és ne fogja meg a lámpát, ha nedves vagy nyirkos a keze.
- Ne sugározza be a test egy részét 30 percnél tovább.
- Takarja le papírtörölővel a kozmetikai termékekkel kezelt testrészeket.
- Ha kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a lámpa használatát.
- Győződjön meg arról, hogy a lámpa rögzítési felülete biztonságos. A bilincshez ideális egy 10-25 mm vastagságú és 40 mm szélességű felület.
- Figyelmeztetés: Nem alkalmas terhes vagy szoptató nők, gyermekek, daganatos betegek, vérzésben, véralvadási zavarokban, égési sérülésekben, sérült bőrű vagy rossz vérkeringésben szenvedők számára.
- Figyelmeztetés: A termék nem alkalmas fényre, hőre érzékeny vagy érzékeny bőrű személyek számára.

SPECIFIKÁCIÓ

Bemeneti feszültség	220 V, 50 Hz
Névleges teljesítmény	22 W $\pm$ 5 %
Fényforrás	LED égők
Izzó menete	E27
Hullámhossz	Vörös fény (R): 650 nm Infravörös fény (IR): 850 nm

TERMÉK LEÍRÁS

	1. Tápkábel
	2. Kapcsológomb
	3. Dugó
	4. Bilincs
	5. Csavar
	6. Izzószög-állító csavarok
	7. Izzó menete
	8. Égő

HASZNÁLAT

1. Vegye ki a lámpát a dobozból és a csomagolóanyagból.
2. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész rendben van. Ezután csavarja be az izzót az óramutató járásával megegyező irányba.
3. Kösse le a tápkábelt, és helyezze a lámpát megfelelő helyre.
4. 2 csavarral rögzítse az izzó helyzetét.
5. Csatlakoztassa a tápegységhez, és kezdje el használni a kapcsolót.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

