



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

### IN 29688 Infravörös LED maszk inSPORTline Radora

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra, a [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu) oldalra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


#### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Kizárólag a kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.
- Terhes és szoptató nők, gyermekek és kisgyermekek számára nem alkalmas.
- Nem alkalmas fényérzékenységben szenvedő vagy bőrkezelés alatt álló személyek számára. Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Ne használja, ha fényérzékenységet fokozó gyógyszert szed.
- Használat közben védőszemüveget kell viselni, javasoljuk, hogy csukja be a szemét.
- Ha kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot.
- A termék nem vízálló, ne merítse vízbe.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- Ne javítsa, módosítsa vagy szerelje szét a terméket saját kezűleg.

#### SPECIFIKÁCIÓ

| Vezérlő                   |                            | Maszk                 |               |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Töltő                     | 5 V/1 A vagy 5 V/2 A       | Teljesítmény          | 5W            |
| Töltési idő               | 4 óra                      | Hullámhossz           | Piros: 630 nm |
| Használati alkalmak száma | 5x (idő 30 perc, L4 szint) |                       | Kék: 470 nm   |
| Akkumulátor               | 3,7 V 2500 mAh             |                       | Sárga: 590 nm |
| Teljesítmény              | 5 V/2 A                    |                       | IR: 850 nm    |
| Méretek                   | 123*50*31 mm               | Méretek               | 256*209*6 mm  |
| Súly                      | 95 g                       | Súly                  | 200 g         |
| Üzemi hőmérséklet         | 0 °C – 45 °C               | Üzemi hőmérséklet     | 0 °C – 45 °C  |
| Tárolási hőmérséklet      | -5 °C – 55 °C              | Tárolási hőmérséklet  | -5 °C – 55 °C |
| Üzemi páratartalom        | 30% - 95                   | Üzemi páratartalom    | 30% - 95      |
| Tárolási páratartalom     | 20% - 85                   | Tárolási páratartalom | 20% - 85      |

## A CSOMAG TARTALMA

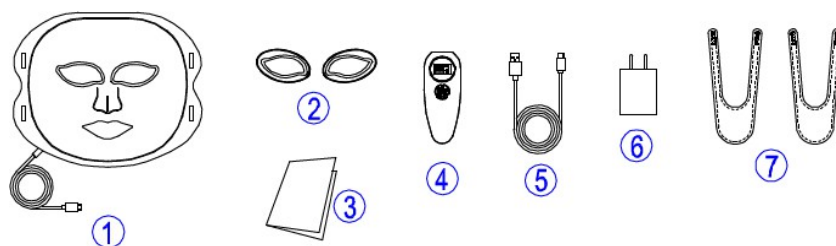

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 1. LED maszk    | 5. Töltőkábel                |
| 2. Védőszemüveg | 6. Töltőadapter (opcionális) |
| 3. Kézikönyv    | 7. Tépőzáras pántok          |
| 4. Vezérlő      |                              |

## VEZÉRLŐ

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | 1. Kimeneti port / töltés    |
|  | 2. Időzítő                   |
|  | 3. Visszaszámláló            |
|  | 4. Idő szimbólum             |
|  | 5. Akkumulátor kapacitás     |
|  | 6. Intenzitás                |
|  | 7. Mód                       |
|  | 8. Dinamikus kijelző         |
|  | 9. LCD kijelző               |
|  | 10. Vezérlőgombok            |
|  | 11. Módválasztás             |
|  | 12. Intenzitás beállítása    |
|  | 13. Bekapcsológomb / időzítő |

### Gombok



Bekapcsoló gomb / időzítő

Tartsa lenyomva 2 másodpercig a vezérlő indításához/leállításához. Nyomja meg az időzítő beállításához: 30 perc / 25 perc / 20 perc / 15 perc / 10 perc / 5 perc.



Mód

Nyomja meg a gombot a hat üzemmód egyikére való átváltáshoz.



Intenzitás

Nyomja meg a gombot a négy intenzitási szint egyikének beállításához.

## Ikonok

### Akkumulátor

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | 25% akkumulátor kapacitás  |
|  | 50% akkumulátor kapacitás  |
|  | 75% akkumulátor kapacitás  |
|  | 100% akkumulátor kapacitás |

### Intenzitás

|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | L1 – legalacsonyabb intenzitás |
|  | L2                             |
|  | L3                             |
|  | L4 – legmagasabb intenzitás    |

### Mód

A kiválasztott üzemmód kijelzése.

### Időzítő

A beállított időzítő megjelenítése:

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>30<sup>s</sup></b> | 30 perc |
| <b>25<sup>s</sup></b> | 25 perc |

### INDÍTÁS

Tartsa lenyomva a vezérlőn található bekapcsológombot () , hogy elindítsa a vezérlőt. Az alapértelmezett beállítás: 30 perc, L4 intenzitás, 1. üzemmód.

Az idő beállításához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, hogy beállítsa a  időt a használat időtartamának beállításához. Az idő 3 másodpercnyi inaktivitás után beállítódik.

A mód beállításához nyomja meg a gombot a mód  beállításához. Hat mód közül választhat. Az

intenzitás beállításához nyomja meg az intenzitás gombot  . Négy szint közül választhat.

A vezérlő túlzott kisülés elleni védelemmel rendelkezik. Folyamatosan ellenőrizze az akkumulátor feszültségét. Ha az 3 V alá csökken, az akkumulátor szimbólum 3 másodpercig villog, majd kialszik.

A vezérlő túlfeszültség elleni védelemmel rendelkezik. A CH szimbólum a töltés során jelenik meg. Az akkumulátor addig töltődik, amíg a feszültség el nem éri a 4,2 V-ot. Ezt követően a töltés leáll. Amikor az akkumulátor feltöltődött, a FU karakter jelenik meg.

Megjegyzés:

- Ne töltsé a vezérlőt használat közben.
- Töltés előtt kapcsolja ki a vezérlőt.
- Hosszú tárolás után a vezérlő teljesen lemerülhet. Ha nem indul el, akkor tölteni kell.


## MÓDOK

|            |        |                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. üzemmód | R      | Piros                              | Fokozott véráramlás és kollagéntermelés. Segít a szövetek helyreállításában (a régi bőrsejtek újjal való pótlásában) és a pórusok csökkentésében.                           |
| 2. mód     | B      | Kék                                | Nyugtató, gyulladáscsökkentő, elpusztítja a bőr baktériumait.                                                                                                               |
| 3. mód     | Y      | Sárga                              | Energizálja a bőrt, segít csökkenteni a ráncokat, kiegyensúlyozza a pigment színének és simítja a bőrt.                                                                     |
| 4. mód     | R+IR   | Piros +<br>Infravörös<br>fény      | Elősegíti a sejtek regenerálódását, felgyorsítja az anyagcserét, lebontja a bőr alatti cellulitist, összehúzza a pórusokat, feszesíti a bőrt és növeli annak rugalmasságát. |
| 5. mód     | R+Y+IR | Piros + sárga +<br>infravörös fény | Lebontja a cellulitot, világosítja a kloazmát és a szeplőket, javítja a vér- és nyirokkeringést.                                                                            |
| 6. mód     | R+B+IR | Piros + Kék<br>Infravörös fény     | Csökkenti a bőr gyulladását és a hegek láthatóságát, elősegíti a sejtek regenerálódását, javítja a nyirokkeringést és gyengéden tisztítja a bőrt.                           |

## A MASZK FELHELYEZÉSE

### Bőr érzékenységi teszt

1. Helyezze a maszkot a karja belső részére.
2. Csatlakoztassa a maszkot a vezérlőhöz, és futtassa a programot 10 percig.
3. Ha meleget vagy kellemetlen érzést érez, azonnal állítsa le a készüléket.
4. A teszt után várjon 6 órát. Ha bőrpír vagy viszketés jelentkezik, ne használja a terméket.

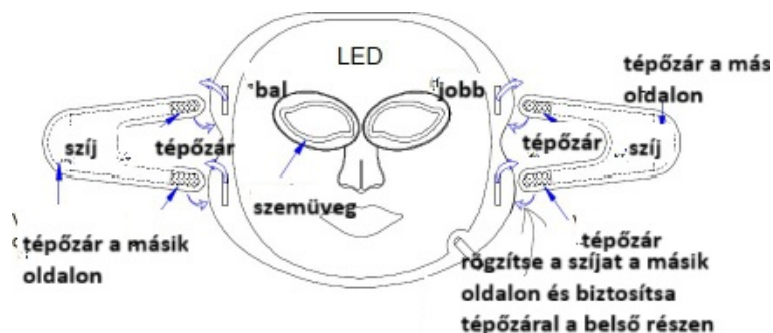

### 1. lépés

#### Felkészülés a használat előtt



Tisztítsa meg bőrét a sminktől és más kozmetikai termékektől.  
Öblítse le a megtisztított bőrt vízzel, majd törölje szárazra.

## 2. lépés

### A maszk előkészítése és felhelyezése



Helyezze fel a védőszemüveget a maszk szemnyílásain keresztül.

Helyezze a maszkot az arcára, és húzza meg a tépőzáras pántokat.

Csatlakoztassa a maszkot a vezérlő egyik kimenetéhez. Állítsa be az időzítőt, a módot és az intenzitást. Használat után 5-10 percig bőrpír jelentkezhet.

## 3. lépés

### Tisztítsa meg a bőrt vízzel



Tisztítsa meg a bőrt vízzel, majd alkalmazzon kozmetikai termékeket a bőr védelme érdekében.

## KARBANTARTÁS

- A tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
- A maszkot nedves ruhával tisztíthatja.
- A látható szennyeződések enyhe tisztítószerrel tisztíthatja. A fertőtlenítéshez 70%-os izopropil-alkohol oldat használható. Vigye fel az oldatot a maszkra, és hagyja hatni 1 percig. Ezután tisztítsa meg, és ismételje meg az eljárást 3-szor. Soha ne merítse a maszkot folyadékba, mindig csak nedves ruhával tisztítsa.
- A szemüveget ugyanúgy tisztítsa meg, mint a maszkot.
- A tisztítás után szárítsa meg a maszkot, és tárolja a csomagolásában. A tisztítás után a maszknak nem szabad szennyeződés vagy nedvesség nyomát mutatnia.

## KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.



