



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 30131 Lábmasszírozó inSPORTline Lunari

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.inSPORTline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A készülék nem alkalmas a következők számára: daganatos, rákos, csonttritkulásos, gyulladásos, vénás trombózis, fémimplantátumokkal élő, várandós nők számára. Használat előtt mindig konzultáljon orvossal.
- Ne masszírozza a csontokat.
- Tartsa a masszírozandó területet szárazon és tisztán. Használat közben zokni viselését javasoljuk.
- A nagy sebesség és nyomás fájdalmat és kellemetlenséget okozhat.
- A gyakori használat egy területen és nagy sebességgel horzsolásokat, fájdalmat és bőrirritációt okozhat. Mellékhatások esetén azonnal hagyja abba a használatot.
- Tartsa távol az ujjait, végtagjait, haját és más testrészeit a készülék mozgó alkatrészeitől.
- Ne használja a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon.
- Ne végezzen semmilyen módosítást vagy beállítást, ne javítsa a készüléket saját kezűleg.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Nem alkalmas gyermekek és korlátozott motoros, szellemi vagy fizikai képességekkel rendelkező személyek számára.
- A felület használat közben felforrósodhat, nem alkalmas hőre érzékeny vagy hőérzékelésre képtelen személyek számára.
- Győződjön meg arról, hogy a masszázsfekék mozgása nem korlátozott.
- A készülék nem vízálló, védje a víztől.
- A hosszú távú folyamatos működés a motor felmelegedését okozhatja. Használatok között mindig hagyja lehűlni a motort.
- Védje a fizikai sérülésektől, leejtésektől és ütésektől.
- Gyermekek és háziállatok elől elzárva tartandó.
- Figyelmeztetés: Használat közben üljön le. Ne álljon a készülékre.
- Figyelmeztetés: Nem helyettesíti az orvosi vagy egészségügyi ellátást.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.
- Lángtól és hőforrásoktól távol tárolandó.
- Tiszta, száraz és árnyékos helyen tárolandó.
- Ne töltsen túl, és ne hagyja lemerülten az akkumulátort. Tárolás közben rendszeresen töltsen fel az akkumulátort.
- Szobahőmérsékleten üzemeltesse.

SPECIFIKÁCIÓ

Méretek: 34.80 x 32.51 x 17.27 cm	Áramforrás: 24 W
Súly: 3.10 kg	Időzítő: 15 min
Kimeneti feszültség: 12VDC 2.0A	Bemeneti feszültség: AC 100-240V ~50/60Hz

FUNKCIÓ

- Shiatsu masszázs, masszázsgörgők, kompressziós masszázs, fűtési funkció
- 3 masszázssebesség-szint, 3 kompresszióintenzitás-szint
- 2 fűtési szint
- Időzítő: 15 perc


HASZNÁLAT

Helyezze a masszírozót sík felületre.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a masszírozóhoz.


Csatlakoztassa a hálózati adaptert a konnektorba.

Kapcsolja be a vezérlőpanelt, és állítsa be a kívánt masszázst.

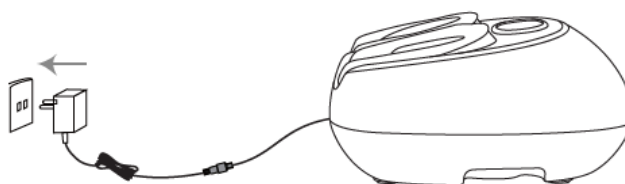

FIGYELMEZTETÉS: Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem sérült. Ne fogja meg a hálózati adaptert nedves kézzel. Ne húzza meg a hálózati adaptert. Ne használja párás környezetben.

SZÁMÍTÓGÉP

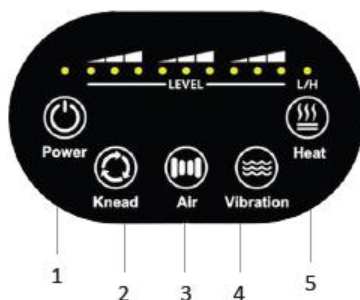

1. Bekapcsológomb: Nyomja meg a masszírozó elindításához/leállításához. Az alapértelmezett masszázs automatikusan elindul.

2. Masszázsgörgők/gyúrás: alapértelmezett sebesség: alacsony. Nyomja meg a gombot a funkció sebességének beállításához.

3. Kompresszió: alapértelmezett intenzitás: alacsony. Nyomja meg a gombot az intenzitás beállításához.

4. Rezgés: alapértelmezett intenzitás: alacsony. Nyomja meg a gombot az intenzitás beállításához.

5. Fűtés: alapértelmezett érték: alacsony. Nyomja meg a gombot a fűtés intenzitásának beállításához vagy a funkció kikapcsolásához. Alacsony szint (kék dióda): 45–50 °C, Magas szint (piros dióda): 50–55 °C

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból.
- Száraz ruhával tisztítsa meg a kezelőpanelt és a készülék felületét.
- Ne használjon vizet vagy maró hatású tisztítószeret a tisztításhoz.
- A levehető burkolatok mosógépben vagy kézzel moshatók. Használat előtt hagyja megszáradni a burkolatokat.
- Száraz és árnyékos helyen tárolandó.

GYIK

1. Hirtelen kikapcsolás.

15 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék újraindításához.

2. A masszázs nem indul el.

15 perc működés után hagyja a készüléket 15 percig hűlni.

Ellenőrizze a hálózati adapter csatlakozását.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.



