



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ– HU

IN 30133 inSPORTline Vintari lábmasszírozó

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu oldalra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A készülék nem alkalmas olyan személyek számára, akik: daganatos betegségben, rákban, csonttritkulásban, gyulladásban, vénás trombózisban szenvednek, fém implantátummal rendelkeznek, vagy terhesek. Használat előtt mindig konzultáljon orvosával.
- Ne masszírozza a csontokat.
- Ne masszírozza egy területet 5 percnél tovább folyamatosan.
- Tartsa a masszázs területét szárazon és tisztán. Használat közben zokni viselését javasoljuk.
- A nagy sebesség és nyomás fájdalmat és kellemetlenséget okozhat.
- Az egy területen történő gyakori használat és a nagy sebesség horzsolásokat, fájdalmat és bőrirritációt okozhat. Ha mellékhatások jelentkeznek, azonnal hagyja abba a használatot.
- Tartsa ujjait, végtagjait, haját és más testrészeit távol a készülék mozgó alkatrészeitől.
- Ne használja a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon.
- Ne végezzen módosításokat vagy beállításokat, ne javítsa meg a készüléket saját maga.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Nem alkalmas gyermekek és korlátozott motorikus, mentális vagy fizikai képességekkel rendelkező személyek számára.
- A felület használat közben felmelegedhet, ezért nem alkalmas hőérzékeny vagy hőérzékelésre képtelen személyek számára.
- Győződjön meg arról, hogy a masszázsfekék mozgása nem korlátozott.
- A készülék nem vízálló, védje a víztől.
- Hosszú távú folyamatos használat esetén a motor felmelegedhet. Használat között mindig hagyja a motort lehűlni.
- Óvja fizikai sérülésektől, leejtéstől és ütésektől.
- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.
- Figyelem: Használat közben üljön le. Ne álljon a készülékre.
- Figyelem: Nem helyettesíti az orvosi vagy egészségügyi ellátást.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.
- Tűztől és hőforrásoktól távol tartandó.
- Tiszta, száraz és árnyékos helyen tárolja.
- Ne töltsen túl és ne hagyja lemerülni az akkumulátort. Tárolás közben rendszeresen töltsen fel az akkumulátort.
- Szobahőmérsékleten használja.

TERMÉKLEÍRÁS

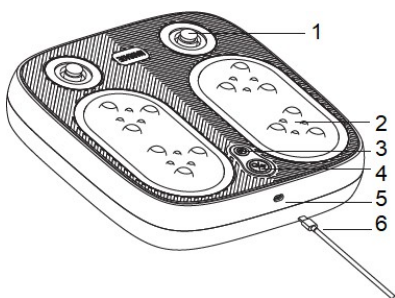

1. Masszázsfej – kopogás

2. Masszírozófej – gyúrás

3. Sebességszabályozás

4. Bekapcsológomb + üzemmódváltás + jelzőfény

5. USB-C töltőport

6. USB-C töltőkábel

VEZÉRLŐK

1. Bekapcsológomb

Tartsa lenyomva a gombot az indításhoz/leállításhoz. Nyomja meg a gombot a mód megváltoztatásához:

1. gombnyomás: dagasztás és kopogás (nagyobb sebességgel)

fűtés nélkül

2. gombnyomás: dagasztás és kopogás (nagyobb sebességgel)

fűtéssel

3. gombnyomás: dagasztás és kopogás (kisebb sebességgel)

fűtés nélkül

4. Sebesség beállítás

A készülék elindítása után nyomja meg a gombot a sebesség beállításához: 1. sebesség (kék LED), 2. sebesség (narancssárga LED), 3. sebesség (piros LED). A beállítás ciklusban történik.

3. Fűtés

Ha a fűtött program fut, a masszázsfelület pirosan világít.


További információ

Ha a masszírozófejek 5 másodpercig elakadnak, a mozgás 3 másodpercre leáll. Ezt követően a masszírozófej megpróbálja újra folytatni a mozgást. Használat közben ne nyomja meg a masszírozófejeket, mert károsíthatja a terméket. Ha az akkumulátor lemerült, a masszírozófejre nehezedő nyomás leállíthatja azt.

A készülék 10 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol.

Töltés

Töltse fel a készüléket USB-C kábellel. Töltés közben a bekapcsológomb kék színnel villog, töltés után pedig kék színnel világít. Ha a bekapcsológomb villog, az azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és a készüléket újra használat előtt fel kell tölteni.

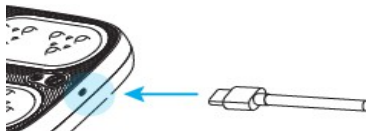

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 7,4 V	Töltési idő: kb. 4 óra
Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 40 °C	Súly: kb. 1920 g
Tárolási hőmérséklet: -20 °C – +60 °C	Méretek: 305x318x78 mm
Akkumulátor kapacitás: 2500 mAh	Üzemidő terhelés nélkül: 120 perc
Töltési bemenet: 5V2A	

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvjaa a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.



