




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 30634 Deréköv infravörös fénnnyel inSPORTline Ilyros

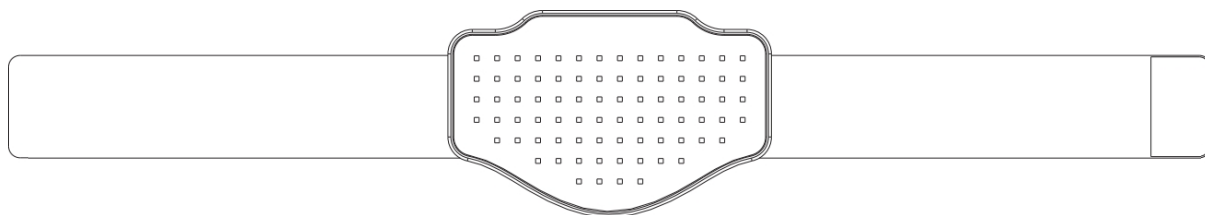

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. Kövesse az összes figyelmeztetést és ajánlást. Ezek be nem tartása sérüléseket vagy a termék károsodását okozhatja.
- A terméket kizárólag a kézikönyvben leírtak szerint használja. A nem megfelelő használat súlyos sérüléseket okozhat. Ne végezzen jogosulatlan módosításokat a terméken.
- Töltés közben ne használja.
- Az intenzitás beállításától függően a bőr 1-2 órára pirosodhat.
- Száraz, árnyékos helyen, szobahőmérsékleten tárolandó.
- Az első használat előtt töltsse fel a terméket a mikro-USB kábellel.
- Ne használja alvás közben vagy fáradt állapotban.
- Ne használja alkohol, kábítószer vagy a döntésképeséget befolyásoló gyógyszerek hatása alatt.
- Ne használja, ha bőrbetegsége van.
- Óvja a terméket fizikai sérülésektől és leejtéstől.
- Védje az elektromos alkatrészeket a víztől. Ne használja és ne csatlakoztassa a terméket nedves/párás kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az öv és a tápkábel sérüléseit és kopását. Ne használja a sérült vagy kopott terméket.
- Tartsa távol hőtől és nyílt lángtól.
- Ez a termék nem játék. Gyermektől és állatoktól elzárva tartandó.
- Gyermek számára nem alkalmas.
- Ne helyezze nyílt sebekre vagy sérült területekre.
- Ne hagyja felügyelet nélkül töltés közben. Csak a mellékelt töltő kábelt használja.
- Ne használja folyamatosan 30 percnél tovább.
- Ha az alábbi állapotok valamelyike fennáll, használat előtt konzultáljon orvosával: daganatok, gyulladás, hőérzékenység, fényérzékenység, nyílt sebek, vérzés, horzsolások, duzzanat, bőrpír stb.
- Terhesség esetén használat előtt konzultáljon orvosával.
- Ne használja, ha az akkumulátor vagy a töltőkábel megsérült.
- Használja és töltsse fel jól szellőző helyiségben, robbanásveszélyes gázoktól távol.
- Használat közben ne takarja le a terméket.
- Ne nézzen közvetlenül a fényekbe.
- Ez a termék nem alkalmas elektronikus implantátummal rendelkező személyek számára.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.
- A termék nem helyettesíti az orvosi ellátást vagy terápiát.

A CSOMAG TARTALMA

Infravörös fényű deréköv, távirányító, töltőkábel, használati utasítás

HASZNÁLAT

Az első használat előtt tesztelje bőrét fényérzékenységre. Kapcsolja be az övet, és helyezze a LED-eket 3 percre a karjára vagy a combjára. Ha a bőre piros lesz, és a bőrpír 2 óránál tovább tart, forduljon orvoshoz, és ne használja a terméket orvosával való konzultáció nélkül.

Az első három napban használja az övet 5 percig, majd háromnaponta 5 perccel növelheti a használat időtartamát.


Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1,5 másodpercig az öv be-/kikapcsolásához.

Az időzítő gombbal állítsa be a használat időtartamát 10/20/30 percre. Az

intenzitás gombbal állítsa be a három intenzitási szint egyikét:


1. Vörös fény és 80% infravörös fény
2. Vörös fény és 90% infravörös fény
3. Vörös fény és 100% infravörös fény

TERMÉKLEÍRÁS

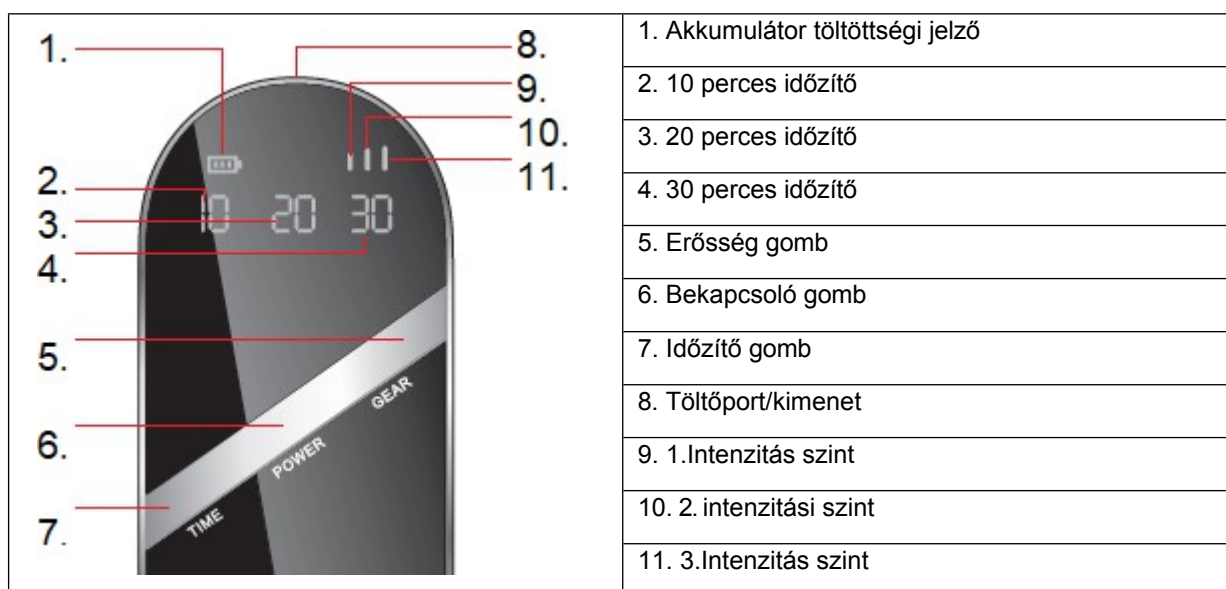

Gombok

Bekapcsolás	Nyomja meg a be-/kikapcsoláshoz
Idő	Időzítő beállítása
Fokozat	Intenzitás beállítása

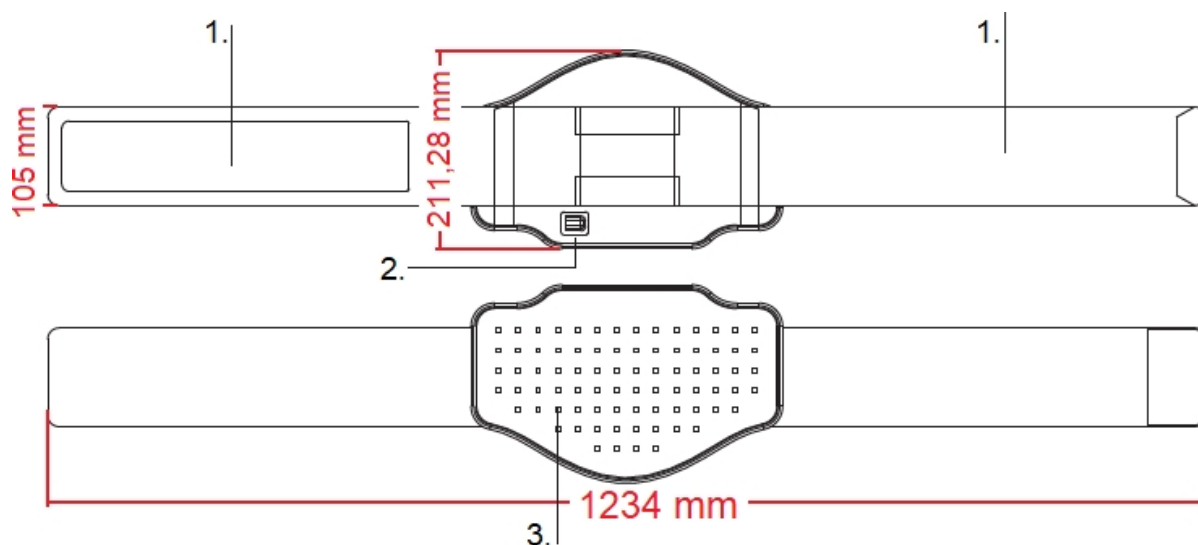

1.	Tépőzáras
2.	Csatlakozó
3.	LED-es lámpák

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a LED-panel kihűlt. Ezután a panelt alkoholos fertőtlenítőszerrel megnedvesített ruhával tisztíthatja. A panel használata előtt hagyja megszáradni.

Ne tisztítsa mosógépben. Kerülje a deréköv túlzott hajtogatását. Száraz, árnyékos helyen tárolja. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a derékövre.

MŰSZAKI ADATOK

Hullámhossz:	Piros: 630 – 660 nm Infravörös fény: 850 – 940 nm
Anyag:	Lycra szövet
Súly:	167,4 g
LED-ek száma	80 LED
Akkumulátor kapacitása	1500 mAh
Teljes méretek:	1235 x 332 mm
Pánt hossza	1235 mm
LED terület	332 x 211 mm
Töltési áram	1A
Teljesítmény	Kb. 4,5 W
Időzítő	10 perc / 20 perc / 30 perc

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

