



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 31160 Infravörös LED nyak- és dekoltázs maszk inSPORTline Rademis

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu címre, ahol megtalálja a használati útmutató legfrissebb verzióját.


BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
- Kizárólag a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a terméket.
- Várandós és szoptató nők, valamint gyermekek és kisgyermekek számára nem alkalmas.
- Fényérzékeny személyek vagy bőrkezelés alatt álló személyek számára nem alkalmas. Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Ne használja, ha olyan gyógyszert szed, amely fokozza a fényérzékenységet.
- Használat közben védőszemüveget kell viselnie, javasoljuk, hogy csukja be a szemét.
- Ha kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot.
- A termék nem vízálló, ne merítse vízbe.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne használja a sérült vagy kopott terméket.
- Ne javítsa, ne módosítsa és ne szerelje szét a terméket saját kezűleg.

MŰSZAKI ADATOK


Vezérlő		Maszk	
Töltő	5 V/1 A vagy 5 V/2 A	Teljesítmény	3 W
Töltési idő	4 óra	Hullámhossz	Piros: 630 nm
Használatok száma	7x (időtartam 30 perc, L4 szint)		Kék: 470 nm
Akkumulátor	3,7 V, 2600 mAh		Sárga: 590 nm
Kimeneti teljesítmény	5 V/2 A		IR: 850 nm
Méreték	123 × 50 × 31 mm	Méreték	269 × 184 × 4 mm
Súly	95 g	Súly	145 g
Üzemi hőmérséklet	0 °C – 45 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C – 45 °C
Tárolási hőmérséklet	-5 °C – 55 °C	Tárolási hőmérséklet	-5 °C – 55 °C
Működési páratartalom	30% – 95%	Működési páratartalom	30% – 95%
Tárolási páratartalom	20% – 85%	Tárolási páratartalom	20% – 85%

A CSOMAG TARTALMA

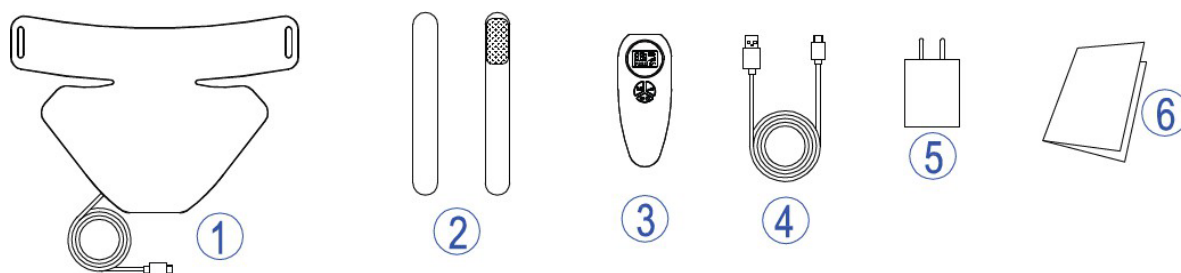

1. LED-maszk	4. Töltőkábel
2. Tépőzáras pántok	5. Töltőadapter
3. Vezérlő	6. Használati útmutató

VEZÉRLŐ

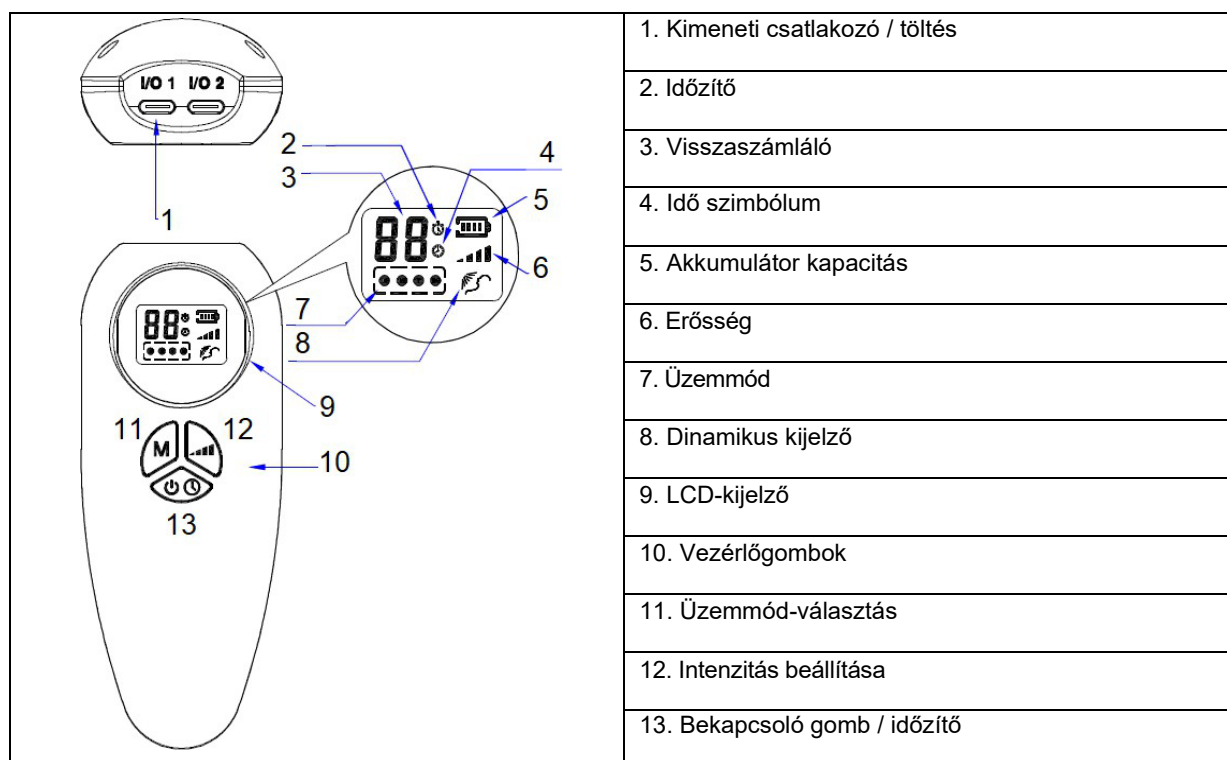

Gombok



Bekapcsoló gomb / időzítő

Tartsa lenyomva 2 másodpercig a vezérlő be-/kikapcsolásához. Nyomja meg az időzítő beállításához: 30 perc / 25 perc / 20 perc / 15 perc / 10 perc / 5 perc.



Mód

Nyomja meg a gombot a hat üzemmód egyikére való váltáshoz.



Erősség

Nyomja meg a gombot a négy intenzitási szint egyikének beállításához.

Ikonok

Akkumulátor

	25%-os akkumulátor-kapacitás
	50%-os akkumulátor-kapacitás
	75% akkumulátor-kapacitás
	100% akkumulátor-kapacitás

Intenzitás

	L1 – legalacsonyabb intenzitás
	L2
	L3
	L4 – legmagasabb intenzitás

Mód

A kiválasztott üzemmód kijelzése.

Időzítő

A beállított időzítő megjelenítése:

30^s	30 perc
25^s	25 perc

INDÍTÁS

Tartsa lenyomva a vezérlőn található bekapcsoló gombot () a vezérlő elindításához. Az alapértelmezett beállítás: 30 perc, L4 intenzitás, 1. üzemmód.

Az idő beállításához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, hogy beállítsa a  időt, és így meghatározza a használat időtartamát. Az idő 3 másodpercnyi inaktivitás után áll be.

Az üzemmód beállításához nyomja meg az üzemmód-gombot . Hat üzemmód közül választhat.

Az intenzitás beállításához nyomja meg az intenzitás-gombot . Négy szint közül választhat.

A vezérlő túlzott lemerülés elleni védelemmel rendelkezik. Folyamatosan ellenőrizze az akkumulátor feszültségét. Ha az 3 V alá csökken, az akkumulátor szimbólum 3 másodpercig villog, majd kialszik.

A vezérlő túlfeszültség-védelemmel is rendelkezik. Töltés közben a CH szimbólum jelenik meg. Az akkumulátor addig töltődik, amíg a feszültség el nem éri a 4,2 V-ot. Ezt követően a töltés leáll. Amikor az akkumulátor feltöltődött, a FU karakter jelenik meg.

Megjegyzés:

- Használat közben ne töltse a vezérlőt.
- A töltés előtt kapcsolja ki a vezérlőt.
- Hosszú tárolás után a vezérlő teljesen lemerülhet. Ha nem indul el, fel kell tölteni.

ÜZEMMÓDOK


1. üzemmód	R	Piros	Fokozott véráramlás és kollagéntermelés. Segít a szövetek helyreállításában (a régi bőrsejtek új sejtekre cserélődése) és a pórusok szűkítésében.
2. üzemmód	B	Kék	Nyugtató, gyulladáscsökkentő, elpusztítja a bőrön található baktériumokat
3. üzemmód	Y	Sárga	Energizálja a bőrt, segít a ráncok csökkentésében, kiegyensúlyozza a pigmentációját és kisimítja a bőrt
4. üzemmód	R+IR	Piros + Infravörös fény	Elősegíti a sejtek regenerálódását, felgyorsítja az anyagcserét, lebontja a bőr alatti narancsbőrt, összehúzza a pórusokat, feszesíti a bőrt és növeli annak rugalmasságát.
5. üzemmód	R+Y+IR	Vörös + sárga + infravörös fény	Lebontja a narancsbőrt, világosítja a melaszt és a szeplőket, javítja a vér- és nyirokkeringést.
6. üzemmód	R+B+IR	Piros + Kék + infravörös fény	Csökkenti a bőrgyulladást és a hegek láthatóságát, elősegíti a sejtek regenerálódását, javítja a nyirokkeringést és gyengéden tisztítja a bőrt.

A MASZK FELVÉTELE

Bőrzérékenységi teszt

1. Helyezze a maszkot a karja belső oldalára.
2. Csatlakoztassa a maszkot a vezérlőhöz, és indítsa el a programot 10 percre.
3. Ha hőérzetet vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal állítsa le a készüléket.
4. Várjon 6 órát a teszt után. Ha bőrpír vagy viszketés jelentkezik, ne használja a terméket.

Húzza át a tépőzáras pántokat (1) úgy, hogy azok a LED-ek (2) oldalához rögzüljenek.

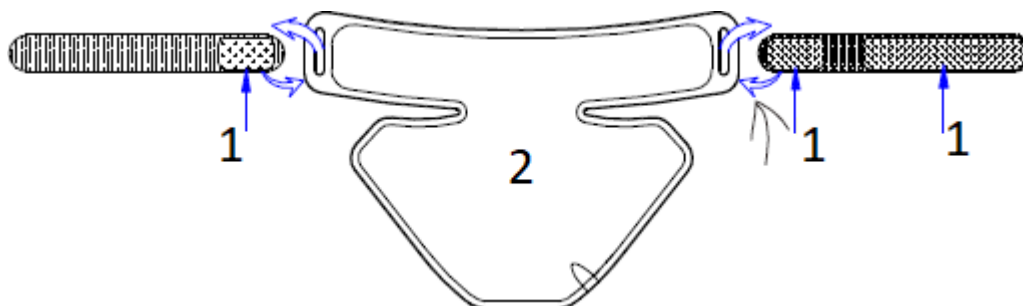

1. lépés

A használat előtti előkészítés



Tisztítsa meg bőrét a sminktől és egyéb kozmetikai termékektől.
Öblítse le a megtisztított bőrt vízzel, majd törölje szárazra.

2. lépés

A maszk előkészítése és felhelyezése



Helyezze a maszkot a nyakára, és rögzítse a tépőzáras pántokkal.

Csatlakoztassa a vezérlő egyik kimenetéhez (I/O 1 vagy I/O 2). Kapcsolja be a vezérlőt, és állítsa be a használat időtartamát, a módot és a teljesítményt.

3. lépés

Tisztítsa meg a bőrt vízzel



Tisztítsa meg a bőrt vízzel, majd vigyen fel kozmetikai termékeket a bőr védelme érdekében.

KARBANTARTÁS

- A tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
- A maszkot nedves ruhával tisztíthatja.
- A látható szennyeződések enyhe tisztítószerrel eltávolíthatja. Fertőtlenítéshez 70%-os izopropil-alkohol oldatot használhat. Vigye fel az oldatot a maszkra, és hagyja hatni 1 percig. Ezután tisztítsa meg, és ismételje meg az eljárást háromszor. Soha ne merítse a maszkot folyadékba, mindig csak nedves ruhával tisztítsa.
- A szemüveget ugyanúgy tisztítsa, mint a maszkot.
- A tisztítás után szárítsa meg a maszkot, és tárolja a csomagolásában. A tisztítás után a maszkon nem látszódhatnak szennyeződés vagy nedvesség nyomai.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy ha a javítás nem gazdaságos, a helyi jogszabályoknak megfelelően és környezetbarát módon ártalmatlanítsa a legközelebbi hulladékgyűjtőben.

A megfelelő ártalmatlanítással védi a környezetet és a természeti erőforrásokat. Ezen felül hozzájárul az emberi egészség védelméhez is. Ha nem biztos a helyes ártalmatlanítás módjában, forduljon a helyi hatóságokhoz, hogy elkerülje a jogszabályok megsértését vagy a szankciókat.

Ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le azokat az újrahasznosító helyre.