



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 31263 inSPORTline Kotorix masszírozó

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

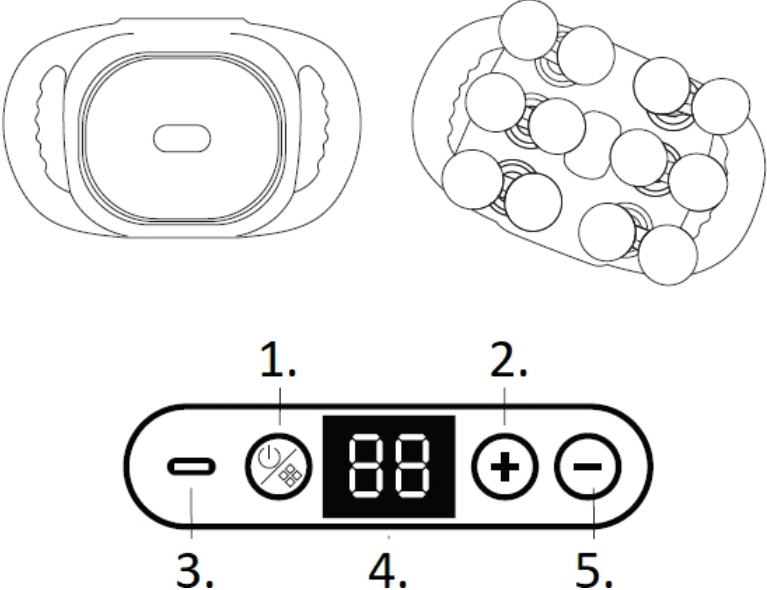
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Tartsa gyermekek és állatok elől elzárva.
- Terhesség alatt ne használja.
- Ne használja vezetés közben vagy olyan tevékenységek során, amelyek koncentrációt igényelnek.
- Nem alkalmas a következő személyek számára: hőérzékenyek, szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, bőrirritációval, kiütéssel, gyulladásal, nyílt sebekkel küzdők, valamint elektronikus orvosi eszközöket (pacemaker stb.) használók. Használat előtt mindig konzultáljon orvosával.
- Ha hányingert, fájdalmat vagy kellemetlen érzést érez, azonnal hagyja abba a masszírozó használatát, és forduljon orvoshoz.
- Ne használja testápolókkal és olajokkal együtt.
- Használat után kapcsolja ki, ne hagyja felügyelet nélkül töltődni.
- Ne használja lefekvés előtt, a stimuláció zavarhatja az elalvást vagy az alvási szokásokat.
- Ne húzza a töltőkábelét.
- Tartsa távol hőforrásoktól, nyílt lángtól, használat közben ne takarja le a masszírozót.
- A masszírozót csak kikapcsolt állapotban és az áramellátástól leválasztva tisztítsa és karbantartsa.
- Nedves ruhával tisztítsa, ne használjon agresszív tisztítószeret. Ezután azonnal szárítsa meg.
- Száraz és tiszta helyen, napfénytől távol tárolja.
- Védje a fizikai sérülésektől, leeséstől és ütésektől.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- Ne javítsa és ne módosítsa a terméket saját kezűleg.
- Kizárólag otthoni használatra, nem helyettesíti az orvosi ellátást.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges teljesítmény: 7,4 V	Töltési paraméterek: 5 V – 1 A
Névleges feszültség: 15 W	Akkumulátor kapacitása: 2000 mAh

TERMÉKLEÍRÁS

	1. Be-/kikapcsoló gomb
	2. Erősség növelése
	3. USB-C töltőcsatlakozó
	4. Digitális kijelző
	5. Intenzitás csökkentése

VEZÉRLŐK

BEKAPCSOLÓ GOMB ÉS A MASSZÁZS TÍPUS BEÁLLÍTÁSA

Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a készülék elindításához/leállításához.

Az indítás után egy 10 perces időzítő jelenik meg. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a P1 – P9 masszázs módok kiválasztásához.

P1 – P3: izomaktiválás P4 –

P6: fasciális relaxáció P7 –

P9: mélymasszázs

INTENZITÁS BEÁLLÍTÁS

Beállíthatja az L1 – L9 intenzitást, az intenzitás 2 másodpercig megjelenik a digitális kijelzőn.

IDŐZÍTŐ

Az időzítő alapértelmezett értéke 10 perc. Hosszabb használat esetén a készüléket újra kell indítani.

GYIK

- Nem indul el: Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, szükség esetén töltsse fel.
- Nem működik: Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, szükség esetén töltsse fel.
- Rendellenes hang: Az első használat során a hangok normálisak.
- Nem tölthető: Ellenőrizze a csatlakozást. Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

