



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 31264 Nyakmasszírozó inSPORTline Yubiko

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.inSPORTline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

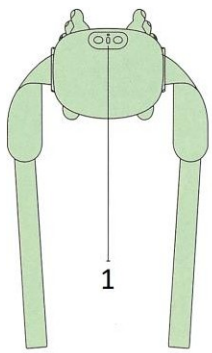
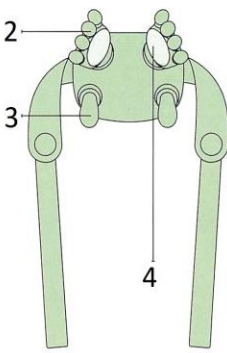
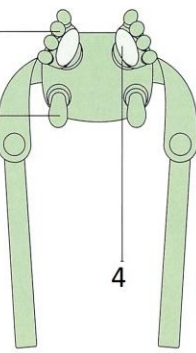
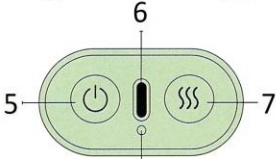
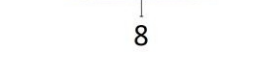
- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- Ne használja a masszírozót elektronikus orvosi eszközökkel (pacemaker, beültethető kardioverter-defibrillátor (ICD), inzulinpumpa stb.) együtt.
- Ha hányingert, fájdalmat vagy szédülést érez, azonnal hagyja abba a masszírozó használatát, és forduljon orvoshoz.
- Ne használja a masszírozót, ha az meghibásodott.
- Ne használja és ne csatlakoztassa a masszírozót a töltőhöz, ha a keze nedves vagy párás.
- Használat közben ne viseljen ékszert.
- Ne használja fekvő helyzetben.
- Ne használja olyan helyiségekben, ahol gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázok vannak.
- Ne használja párás vagy magas hőmérsékletű környezetben.
- Védje a víztől.
- Óvja a fizikai sérülésektől és ütésektől.
- Ne használja a masszírozót olyan tevékenységek végzése közben, amelyek figyelmet igényelnek (vezetés stb.).
- Ne használja a masszírozót fáradt állapotban vagy alvás közben.
- Nem alkalmas gyermekek, mozgáskorlátozottak vagy mentális betegségben szenvedők számára.
- Nem alkalmas érzékeny bőrű vagy hőérzékeny személyek számára.
- Ne használja a masszírozót hegeken vagy műtéten átesett területeken.
- Ne használja a masszírozót, ha sérült a bőrre, gyulladással, pirossal vagy kiütéssel.
- Ne használja a masszírozót, ha szívbetegségben, daganatos betegségben, vénás betegségben, magas vérnyomásban, cukorbetegségben, lázban stb. szenved.
- Ne használja a masszírozót a készülék gyártási céljától eltérő célokra (nyakmasszázs).
- Ne állítsa be és ne módosítsa a masszírozót.
- Ne használja a terméket, ha az sérült vagy elhasználódott.
- Várandós nők számára nem alkalmas.
- Töltse fel felügyelet mellett.
- Ne használja folyamatosan 10 percnél hosszabb ideig.

- Kizárólag otthoni használatra alkalmas, nem helyettesíti az orvosi ellátást.

TÁROLÁS

- Száraz, árnyékos helyen, az eredeti csomagolásban tárolandó.
- Tartsa távol gyúlékony és robbanásveszélyes tárgyaktól.
- Tartsa távol éles tárgyaktól.

TERMÉKLEÍRÁS

	1.	Vezérlőgombok
	2.	Felső masszírozófej
	3.	Alsó masszírozófej
	4.	Fűtés
	5.	Bekapcsoló gomb: 3 másodpercig tartsa lenyomva a kikapcsoláshoz/bekapcsoláshoz, nyomja meg a mód váltásához
	6.	Töltőcsatlakozó
	7.	Fűtési beállítás
	8.	LED-lámpa

GOMBOK LEÍRÁSA

BEKAPCSOLÓ GOMB

Tartsa lenyomva

- Tartsa lenyomva 3 másodpercig a termék be- és kikapcsolásához.
- A bekapcsolás után az alapértelmezett masszázs indul el: 1. masszázs mód, alacsony fűtési szint
- Alapértelmezett masszázs időtartama: 10 perc

Nyomja

- Nyomja meg a gombot a masszázs mód ciklikus váltásához: 1. mód (a fehér LED 1-szer villog), 2. mód (a fehér LED 2-szer villog), 3. mód (a fehér LED 3-szor villog)
- A váltás nem befolyásolja a fűtést

FŰTÉS


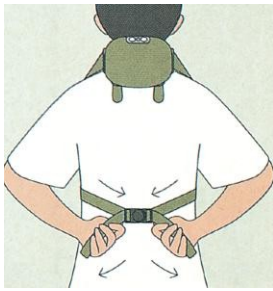

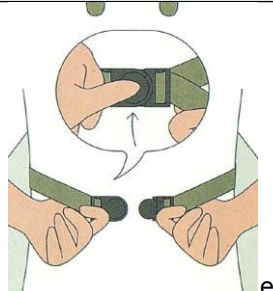
- Nyomja meg a ciklusban a fűtés intenzitásának megváltoztatásához: alacsony intenzitás (a piros LED 1-szer villog) – magas intenzitás (a piros LED 2-szer villog) – kikapcsolva (a piros LED kialszik)
- A változtatás nem befolyásolja a masszázs módot

TÖLTÖTTSEGI JELZŐ

- A jelzőfény indulás után fehérén világít.
- Ha az akkumulátor lemerül, pirosan villog.
- Töltés közben a jelző pirosan világít.

- Az akkumulátor feltöltése után a jelzőfény fehérre vált.

HASZNÁLAT

	
<p>1. Helyezze a masszírozót a nyaka mögé és a vállaira.</p>	<p>2. Rögzítse a hátán a csat és a pántok segítségével. A pántok hosszának mindkét oldalon azonosnak kell lennie.</p>
	
<p>3. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.</p>	<p>4. Használat után lazítsa meg a pántokat a csat segítségével, és vegye le a masszírozót.</p>

GYIK

Hiba	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem indul el	Alacsony akkumulátor töltöttség	Töltse fel az akkumulátort
	Töltés	Töltés közben nem indul el
	A készülék nincs bekapcsolva	Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig
Nem lehet tölteni	A kábel vagy az adapter nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa újra
	Az alaplapp rövidzárlata	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
Készülék bekapcsol kikapcsol működés közben	Alacsony akkumulátor	Töltés
	Az alapértelmezett működési idő lejárt	Újraindítás
A masszázs intenzitása csökkent	Alacsony akkumulátor töltöttség	Töltés
A fűtés nem működik	A fűtés nem indult el	Nyomja meg a fűtés gombot

MŰSZAKI ADATOK

Modell: N7	Névleges teljesítmény: 10 W
Névleges bemeneti feszültség: 5 V	Akkumulátor kapacitása: 2000 mAh

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a töltőből. Tisztítsa meg száraz ruhával. A makacs szennyeződések nedves ruhával tisztítsa meg, majd száraz ruhával törölje szárazra. Ne használja a masszírozót, amíg a készülék meg nem száradt.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

