



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 31394 EMS nyakmasszírozó párna inSPORTline Elixon

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el a www.inSPORTline.cz weboldalunkra, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Az elektródák bőrirritációt okozhatnak, illetve fokozhatják a bőr érzékenységet az elektromos stimuláció vagy a vezetőképes gél használata miatt. Ha ez bekövetkezik, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.
- Szívbetegségben vagy epilepsziában szenvedő, illetve ilyen betegség gyanúja esetén a terméket nem szabad használni.
- Ne helyezze az elektródákat: nyílt sebekre, kiütésekre, duzzadt területekre, bőrpírral járó területekre, fertőzött területekre, gyulladásokra és egyéb bőrsérülésekre.
- Ne helyezze az elektródákat fémmimplantátumokkal ellátott területekre.
- Alvás közben ne használja a készüléket.
- Ha menstruációja során komplikációk lépnek fel, vagy szülés után van, a használatról konzultáljon orvosával.
- Ne használja, ha nemrégiben műtéten esett át.
- Gyermekek számára nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket, és ne vigye olyan helyekre, ahol MRI-, CT- vagy elektromágneses, illetve ultrahangos hullámokat használó készülékek működnek, valamint fémdetektorok közelében és hasonló helyeken.
- Ne módosítsa, ne alakítsa át és ne javítsa meg saját kezűleg a terméket.
- Ne használja, ha szívritmus-szabályozót vagy más elektronikus orvosi eszközt visel.
- Ne használja magas páratartalmú helyiségekben, például fürdőszobákban, zuhanykabinokban, medencékben stb.
- Ne használja az elektródákat fürdés közben.
- Ne használja az elektródákat a következő esetekben: várandósság vagy terhesség gyanúja esetén.
- Ne helyezze az elektródákat ékszerekre, piercingekre és más, a testen elhelyezett fémtárgyakra.
- Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázok jelenlétében.
- Használat előtt konzultáljon orvosával, ha szívbetegségben szenved, vagy fokozottan hajlamos a szívritmuszavarra.
- Használat előtt konzultáljon orvosával, ha rehabilitációs központba jár.
- Használat előtt konzultáljon orvosával akkor is, ha olyan betegségben vagy sérülésben szenved, amely nem szerepel a használati útmutatóban.

- Ha hányingert, fejfájást vagy eszméletvesztést érez, azonnal kérjen orvosi segítséget.
- A termék egészséges személyek számára alkalmas. A termék kizárólag egészséges bőrű felnőttek számára alkalmas.
- A használat után a bőrpír normális jelenség, amennyiben 30 percen belül elmúlik. Ha a bőrpír 30 percen belül nem múlik el, ne használja az elektródákat az adott területen, amíg a bőrpír el nem múlik.
- Ha a használat után tartós bőrirritáció jelentkezik, forduljon orvoshoz.
- Rendszeresen ellenőrizze az alkalmazás helyét.
- A készülék nem helyettesíti a szakszerű orvosi ellátást.
- Otthoni használatra alkalmas.
- Automatikus időzítő: 15 perc




TERMÉKLEÍRÁS

	1. + gomb
	2. EMS intenzitás
	3. Főkapcsoló / funkcióváltás
	4. – gomb
	5. Fűthető EMS elektródák
	6. Masszírozófej
	7. Mágnesek
	8. USB-C töltőcsatlakozó
	9. USB-C töltőkábel

TÖLTÉS

- Csatlakoztassa a töltőkábele a készülékhez.
- Csatlakoztassa a töltőkábele a töltőadapterhez (5 V / 1 A vagy annál nagyobb teljesítményű adaptert javasolunk).
- Töltés közben a LED pirosan villog, amint a készülék feltöltődött, zölden világít.

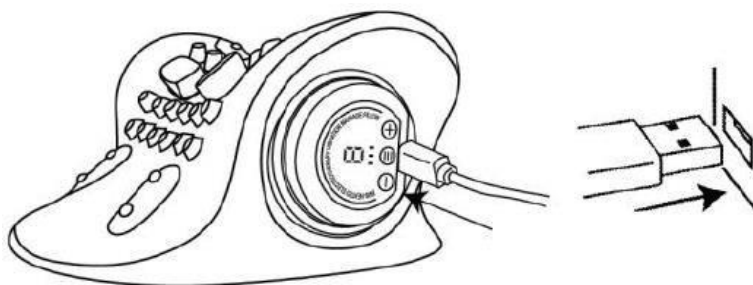


A készülék bekapcsolása után a távirányítóval vezérelhető.



	1. Számkijelző 2. + gomb 3. Fűtési fokozat 4. EMD/Fűtés/Rezgés 5. Bekapcsoló gomb 6. – gomb
--	---

- Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.
- Felgyullad az EMS-masszázs intenzitásának beállítását jelző lámpa. 6 intenzitási szint közül választhat (0: kikapcsolt).
Az EMS-masszázs hatékonyabb működése érdekében nedvesítse meg a nyakát vagy az elektródákat langyos vízzel.
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot a fűtés beállításához. 3 intenzitási szint közül választhat. Figyelem: mindig figyelje a test hőmérsékletre adott reakcióját, égési sérülés veszélye áll fenn.
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot a rezgés beállításához. 3 intenzitási szint közül választhat.
- A készülék 15 perc működés után automatikusan kikapcsol. A fűtési funkciót ne használja hosszú ideig folyamatos üzemmódban.
- Minden funkció együttesen vagy külön-külön is használható.
- A készülék bármilyen helyzetben használható.

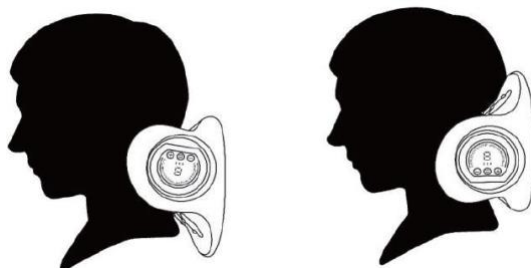

KARBANTARTÁS

- Az EMS-elektroda karbantartása: Tisztítsa meg egy puha ruhával, amelyet langyos víz és semleges tisztítószer keverékével nedvesített meg. Ezután törölje szárazra egy száraz ruhával.

- Soha ne merítse a készüléket vízbe, és ne engedje, hogy víz kerüljön a készülék belsejébe.
- A tisztításhoz ne használjon maró hatású tisztítószereket, oldószereket, illetve alkohol- vagy benzin alapú tisztítószereket.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy amennyiben a további javítás már gazdaságilag nem lenne célszerű, a terméket a helyi előírásoknak megfelelően és környezetkímélő módon ártalmatlanítsa. Vigye a terméket a legközelebbi, erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre.

A szabályoknak megfelelő ártalmatlanítással hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint segít megelőzni a környezetre, illetve az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. Ha bizonytalan, forduljon a helyi illetékes hatóságokhoz, hogy elkerülje a szabályok megsértését és az abból eredő szankciókat.

Az elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem adja le az újrahasznosításra kijelölt helyeken.