

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU


IN 31563 Meleg/hideg masszázspisztoly inSPORTline ChillFrost


A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu címre, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
- Kizárólag felnőttek számára, gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.
- Kizárólag száraz bőrön használja. Óvatosan mozgassa a bőr felületén, egy helyen legfeljebb 60 másodpercig. Az érzékenyebb felhasználók törülközőt vagy ruhát használhatnak a masszázs enyhítésére.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- Ne merítse vízbe.
- Óvja az eszközt ütésektől és leejtéstől.
- Kizárólag 5V2A-os adapterrel töltsse fel.
- Használat előtt ellenőrizze a termék állapotát.
- Ne javítsa és ne módosítsa a terméket.
- Ne hagyja felügyelet nélkül. Használat után mindig kapcsolja ki és tárolja el. Ne hagyja felügyelet nélkül töltés közben.
- Tartsa távol hőforrásoktól és nyílt lángtól.
- Ne használja folyamatosan 1 óránál hosszabb ideig. Ezután a készüléket 30 percig hagyja lehűlni.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Az akkumulátor feltöltése után húzza ki a töltőt a konnektorból. Töltés közben ne használja a készüléket.
- Ne használja orvosi konzultáció nélkül, ha az alábbi kategóriák bármelyikébe tartozik: várandósság; cukorbetegség; pacemaker viselése; műtét utáni ápolás; epilepszia vagy migrén; csigolya- vagy gerincbetegség vagy elmozdulás; nemrégiben végzett ízületi protézis beültetése; méhen belüli eszköz beültetése; fémcsavarok vagy lemezek jelenléte a testben. Ha bizonytalan, a használat előtt mindig konzultáljon orvosával.
- Tisztítsa meg nedves ruhával, majd szárítsa meg száraz ruhával.

TERMÉKLEÍRÁS

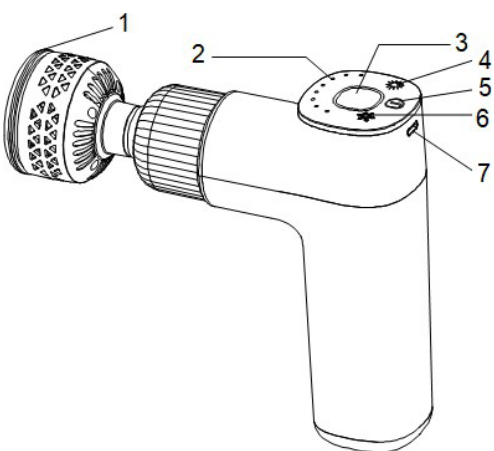	1.	Fűtő/hűtőfej
	2.	Erősség- és sebességkijelző
	3.	Fűtés/hűtés kijelző
	4.	Fűtéskapcsoló
	5.	Be-/kikapcsoló gomb / sebességszabályozó
	6.	Hűtéskapcsoló
	7.	Töltőcsatlakozó

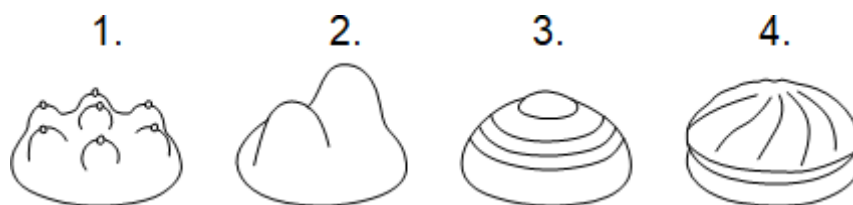

1. Pontmasszázsfej: alkalmas a mellkas, a tenyér, a láb, az alsó végtagok és a csípő masszírozására
2. Kétpontos masszírozófej: alkalmas a nyak, a vállak, a felső végtagok és az Achilles-ín masszírozására
3. Éles hegyű masszázsfaj: mély végtagmasszázsához alkalmas
4. Légmasszázsfej: alkalmas a teljes test vagy az érzékeny testrészek pihentető masszázsára

VEZÉRLÉS

Tartsa lenyomva rövid ideig a bekapcsológombot (⏻), hogy megjelenjen az aktuális akkumulátor töltöttségi szintje, majd tartsa lenyomva 2 másodpercig az indításhoz. Indítás után a sebesség a 4. sebességfokozatra van beállítva. A sebesség beállításához nyomja meg a (⏻) gombot.

A masszázspisztoly automatikus intenzitás-beállítással rendelkezik, amely a masszázs során gyakorolt nyomás alapján működik. Ha megnyomja a fejet, az intenzitás növekszik.

FŰTÉSI/HŰTÉSI FUNKCIÓ


Ha a masszázspisztoly működik, nyomja meg a gombokat a hűtés (❄️) vagy a fűtés (☀️) be- és kikapcsolásához.

Ha a masszázsfaj ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombokat 1,5 másodpercig a hűtés (❄️) vagy a fűtést (☀️).

Nyomja meg a (☀️) vagy a (❄️) gombokat a hűtés/fűtés intenzitásának beállításához a ciklusban: 1. szint (kék), 2. szint (zöld), 3. szint (piros).

HASZNÁLAT

Helyezze a kiegészítőt a masszírozófejre.

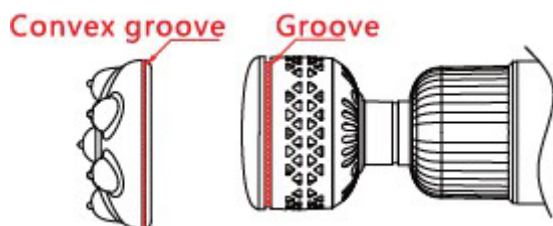

Ha a masszírozófejhez tartozó kiegészítőt használja, ne használja a fűtési vagy hűtési funkciót.

Figyelem: a fűtő/hűtőfej nem távolítható el

TÖLTÉS

Csatlakoztassa a töltőt. A hőmérséklet-jelző kék színnel világít. A

sebességjelző villog, jelezve az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

Amint a sebességjelző kialszik, mind a 8 jelzőfény világít, és a hőmérséklet-jelző folyamatosan zölden világít, az akkumulátor feltöltődött.

Megjegyzés: Töltse fel az akkumulátort, amint az utolsó két jelzőfény megjelenik.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tisztítsa meg nedves ruhával, majd szárítsa meg száraz ruhával.
- Száraz, tiszta és árnyékos helyen tárolja.
- Töltse fel az akkumulátort rendszeresen, 2 havonta, még akkor is, ha a terméket nem használja.
- Óvja a leejtéstől és az ütésektől.
- Ne helyezzen más tárgyakat a termékre.

MŰSZAKI ADATOK

Súly:	620 g	Egy feltöltéssel elérhető használati idő:	Rezgés: 2–3 óra
Anyag:	ABS		Fűtés: 2–3 óra
Névleges teljesítmény:	20 W (max. 27 W)		Hűtési idő: 2–3 óra
Bemeneti feszültség:	5 V egyenáram/2 A	Időzítő:	Rezgés: 15 perc
Méretek:	183 × 53 × 160 mm		Fűtés: 15 perc
Akkumulátor műszaki adatai:	7,4 V, 1800 mAh		Hűtés: 15 perc
Az akkumulátor töltési ideje:	Kb. 3 óra	Hűtés:	1. fokozat: 21 °C
Üzemi hőmérséklet:	0–40 °C		2. fokozat: 19,7 °C
Sebességfokozatok:	8 fokozat		3. fokozat: 18,2 °C
Hűtési intenzitás	3 fokozat	Fűtés:	1 fokozat: 35 °C
Hűtési intenzitás	3 fokozat		2. fokozat: 41 °C
			3. fokozat: 44,5 °C

GYIK

Hiba	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem indul el	Alacsony akkumulátor töltöttség	Töltse fel az akkumulátort
	A a bekapcsoló gomb	Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 1,5 másodpercig
	Magas környezeti hőmérséklet	Helyezze alacsonyabb környezeti hőmérsékletű helyre, és hagyja lehűlni 2 órán át
	Az akkumulátor aktiválta a kisülés elleni védelmet	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
Nem lehet tölteni	A töltő nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa újra a töltőt
	A töltőkábel megsérült	Cserélje ki a töltőkábelelet
	A kábel és az adapter nem felel meg a műszaki előírásoknak	Kizárólag a műszaki előírásoknak megfelelő töltőt és kábelt használjon
	A környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C-ot, a túlmelegedés elleni védelem bekapcsolt	Helyezze alacsonyabb környezeti hőmérsékletű helyre, és hagyja lehűlni 2 órán át
Beindítható, de a funkciók nem működnek	Alacsony akkumulátor töltöttség	Töltse fel az akkumulátort
A masszírozófej meglazult	A masszázs fej nem megfelelően van rögzítve	Rögzítse újra a masszázsféjet
A pisztoly magas nyomás után kikapcsol	Túlfeszültség-védelem, átváltás készenléti üzemmódba	Indítsa újra

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy ha a javítás nem gazdaságos, a helyi jogszabályoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa a legközelebbi hulladéklerakóhelyen.

A megfelelő ártalmatlanítással védi a környezetet és a természeti erőforrásokat. Ezen felül hozzájárul az emberi egészség védelméhez is. Ha nem biztos a helyes ártalmatlanítás módjában, forduljon a helyi hatóságokhoz, hogy elkerülje a jogszabályok megsértését vagy a szankciókat.

Ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le azokat az újrahasznosító helyre.