

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU


IN 31565 Meleg/hideg masszázspisztoly inSPORTline IceBlaze


A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu címre, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
- Kizárólag felnőttek számára, gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.
- Kizárólag száraz bőrön használja. Óvatosan mozgassa a bőr felületén, egy helyen legfeljebb 60 másodpercig. Az érzékenyebb felhasználók törülközőt vagy ruhát használhatnak a masszázs enyhítésére.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- Ne merítse vízbe.
- Óvja az eszközt ütésektől és leejtéstől.
- Kizárólag 5V2A-os adapterrel töltsse fel.
- Használat előtt ellenőrizze a termék állapotát.
- Ne javítsa és ne módosítsa a terméket.
- Ne hagyja felügyelet nélkül. Használat után mindig kapcsolja ki és tárolja el. Ne töltsse fel felügyelet nélkül.
- Tartsa távol hőforrásoktól és nyílt lángtól.
- Ne használja folyamatosan 1 óránál hosszabb ideig. Ezután a készüléket 30 percig hagyja lehűlni.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Az akkumulátor feltöltése után húzza ki a töltőt a konnektorból. Töltés közben ne használja a készüléket.
- Ne használja orvosi konzultáció nélkül, ha az alábbi kategóriák bármelyikébe tartozik: terhesség; cukorbetegség; pacemaker viselése; műtét utáni ápolás; epilepszia vagy migrén; csigolya- vagy gerincbetegség vagy elmozdulás; nemrégiben végzett ízületi protézis beültetése; méhen belüli eszköz beültetése; fémcsavarok vagy lemezek jelenléte a testben. Ha bizonytalan, a használat előtt mindig konzultáljon orvosával.
- Nedves ruhával tisztítsa meg, majd száraz ruhával törölje szárazra.

TERMÉKLEÍRÁS

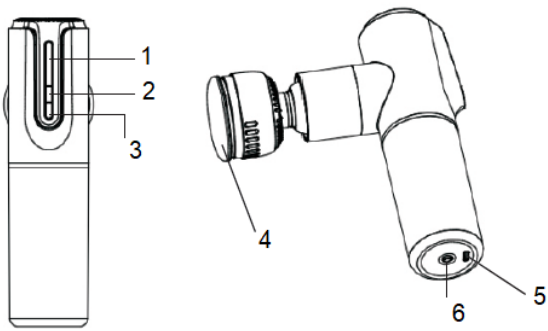	1.	Kijelző
	2.	Fűtéskapcsoló
	3.	Hűtéskapcsoló
	4.	Fűtő/hűtőfej
	5.	Töltőcsatlakozó
	6.	Be-/kikapcsoló sebességszabályozó gomb

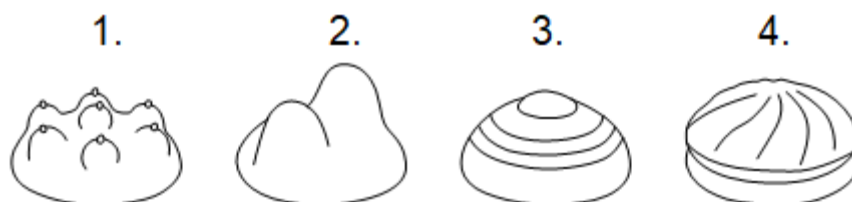

1. Pontmasszázsfej: alkalmas a mellkas, a tenyér, a láb, az alsó végtagok és a csípő masszírozására
2. Kétpontos masszírozófej: alkalmas a nyak, a vállak, a felső végtagok és az Achilles-ín masszírozására
3. Éles hegyű masszázsfő: mély végtagmasszázsához alkalmas
4. Légmasszázsfej: alkalmas a teljes test vagy az érzékeny testrészek pihentető masszázsára

KEZELŐELEMEK

Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig a masszírozópisztoly be- és kikapcsolásához. Az indítás után rövid gombnyomással állíthatja be a sebességet (1–5 fokozat).

Ha a masszírozópisztoly működik, nyomja meg a kék gombot a hűtés intenzitásának beállításához (1–5 fokozat, 0: kikapcsolva), nyomja meg a narancssárga gombot a fűtés intenzitásának beállításához (1–5 fokozat, 0: kikapcsolva).

Ha a masszírozópisztoly ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a kék gombot a bekapcsoláshoz, majd állítsa be a hűtés intenzitását (1–5 fokozat, 0: ki), nyomja meg a narancssárga gombot a bekapcsoláshoz, majd állítsa be a fűtés intenzitását (1–5 fokozat, 0: ki).

Kijelző:

Fehér: sebesség

Kék: hűtés

Piros: fűtés


A jelzőfény hossza jelzi az intenzitást (minél hosszabb, annál intenzívebb)

A masszázsasztal megjegyzi az utolsó beállítást; indításkor az utolsó beállítás aktiválódik.

HASZNÁLAT

Helyezze a masszázsfő-kiegészítőt a masszázsfőre.

Convex groove Groove

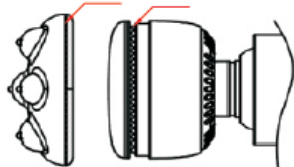

Ha csatlakozót használ, ne használja a fűtési vagy hűtési funkciót.

Figyelem: a fűtő/hűtőfej nem távolítható el

TÖLTÉS

Csatlakoztassa a töltőt. A bekapcsológomb fehéren világít, és a töltés során folyamatosan villog.

A kijelző az akkumulátor töltöttségi állapotát mutatja.

Amint a jelzőfény fehérre vált, az akkumulátor feltöltődött.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tisztítsa meg nedves ruhával, majd törölje szárazra egy száraz ruhával.
- Száraz, tiszta és árnyékos helyen tárolja.
- Az akkumulátort rendszeresen, 2 havonta töltsse fel, még akkor is, ha a terméket nem használja.
- Óvja a leejtéstől és az ütésektől.
- Ne helyezzen más tárgyakat a termékre.

MŰSZAKI ADATOK

Súly:	kb. 565 g	Egy feltöltéssel elérhető használati idő:	Rezgés: 2–3 óra
Anyag:	ABS		Fűtés: 2–3 óra
Névleges teljesítmény:	20 W		Hűtés: 2–3 óra
Bemeneti feszültség:	DC 5 V/2 A	Időzítő:	Rezgés: 15 perc
Méret:	150 × 53 × 183 mm		Fűtés: 15 perc
Akkumulátor műszaki adatai:	2400 mAh		Hűtés: 15 perc
Az akkumulátor töltési ideje:	Kb. 4 óra	Hűtés:	1. fokozat: 21,2 °C
Üzemi hőmérséklet:	0–40 °C		2. fokozat: 19,2 °C
Sebességfokozatok:	5 fokozat		3. fokozat: 18,7 °C
Hűtési intenzitás	5 fokozat		4. fokozat: 18,4 °C
Fűtési intenzitás	5 fokozat		5. fokozat: 18,2 °C
		Fűtés:	1. fokozat: 35,2 °C
			2. fokozat: 38,5 °C
			3. fokozat: 40,3 °C
			4. fokozat: 42,1 °C
			5. fokozat: 44,5 °C

GYIK

Hiba	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem indul el	Alacsony akkumulátor töltöttség	Töltse fel az akkumulátort
	A bekapcsológomb helytelen megnyomása	Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1,5 másodpercig
	Magas környezeti hőmérséklet	Helyezze alacsonyabb környezeti hőmérsékletű helyre, és hagyja lehűlni 2 órán át
	Az akkumulátor aktiválta a kisülés elleni védelmet	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
Nem lehet tölteni	A töltő nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa újra a töltőt
	A töltőkábel megsérült	Cserélje ki a töltőkábelelet
	A kábel és az adapter nem felel meg a műszaki előírásoknak	Kizárólag a műszaki előírásoknak megfelelő töltőt és kábelt használjon
	A környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C-ot, a túlmelegedés elleni védelem bekapcsolt	Helyezze alacsonyabb környezeti hőmérsékletű helyre, és hagyja lehűlni 2 órán át
Beindítható, de a funkciók nem működnek	Alacsony akkumulátor töltöttség	Töltse fel az akkumulátort
A masszírozófej laza	A masszírozófej nincs megfelelően rögzítve	Rögzítse újra a masszázsféjet
A készülék magas nyomás után kikapcsol	Túlfeszültség-védelem, készenléti üzemmódba váltás	Újraindítás

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejárta után, vagy ha a javítás nem gazdaságos, a helyi jogszabályoknak megfelelően és környezetbarát módon ártalmatlanítsa a legközelebbi hulladéklerakóhelyen.

A megfelelő ártalmatlanítással védi a környezetet és a természeti erőforrásokat. Ezen felül hozzájárul az emberi egészség védelméhez is. Ha nem biztos a helyes ártalmatlanítás módjában, kérdezze meg a helyi hatóságokat, hogy elkerülje a jogszabályok megsértését vagy a szankciókat.

Ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le azokat az újrahasznosító helyre.