




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 21961 Masszázsasztoly inSPORTline Rondys

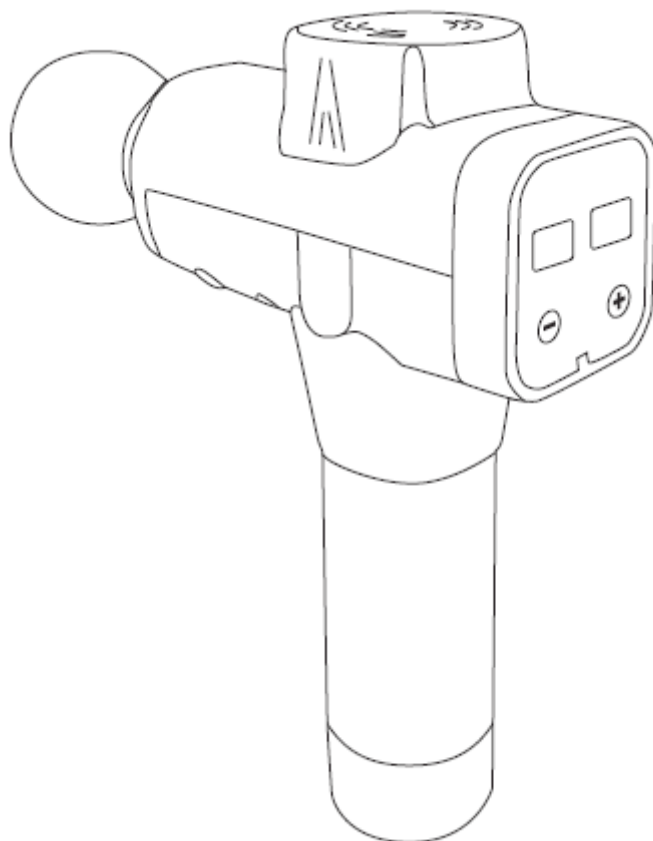

TARTALOM


BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
TERMÉKLEÍRÁS.....	4
HASZNÁLAT.....	4
ÚJRATÖLTÉS.....	4
KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS.....	5
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	5

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Első használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Ne merítse vízbe. Tartsa távol a víztől és a hőforrásoktól.
- A szellőzőnek mindig tisztának kell lennie.
- A készülék 1 óránál tovább nem működhet folyamatosan. Javasoljuk, hogy a készüléket 30 perc üzemidő után hagyja lehűlni.
- Töltés után válassza le a töltőt.
- Csak felnőttek számára alkalmas a készülék.
- Ne használja sérült vagy érzékeny bőrön.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Csak 60 másodpercig használja a test minden egyes részén.
- Csak puha testrészekre alkalmazza a készüléket, ne használja csontos vagy a test egyéb szilárdabb, izmosabb részén.
- A masszázsnak fájdalommentesnek és kellemesnek kell lennie.
- Használja a célnak legjobban megfelelő masszázsféjet.
- Használat közben foltok keletkezhetnek, gyakran ellenőrizze a masszírozott területet.
- Ha fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a masszázst.
- Tartsa távol az ujjakat, a haját és más testrészeit a készülék hátuljától.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a furatokba.
- Kerülje a pisztoly megrázását és ütését.
- Használat előtt és után ellenőrizze a termék állapotát.
- Ne módosítsa a terméket.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket a töltőben vagy bekapcsolt állapotban.
- Nem alkalmas olyan személyek számára, akik érzékenyek a rezgésekre.
- Tartsa a mozgó alkatrészek részeit, nehogy becsípődjenek.
- Csak eredeti töltőt használjon.
- A készülék 15 perc használat után automatikusan kikapcsol.
- Nem alkalmas csökkent motoros képességekkel, mentális vagy fizikai betegséggel, tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek számára. Ezek a személyek csak a biztonságukért felelős felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.

- Nem alkalmas: várandós nők, cukorbetegség, neuropathia, retina károsodás, epilepszia, migrén, sérv, spondylolisthesis, spondylolysis-ben szenvedők számára; peacemaker-rel rendelkezők, nemrég műtéttek, orvosi fém implantátumokkal rendelkezők számára sem ajánlott. Mindenképp konzultáljon orvosával a készülék alkalmazása előtt.

TERMÉKLEÍRÁS

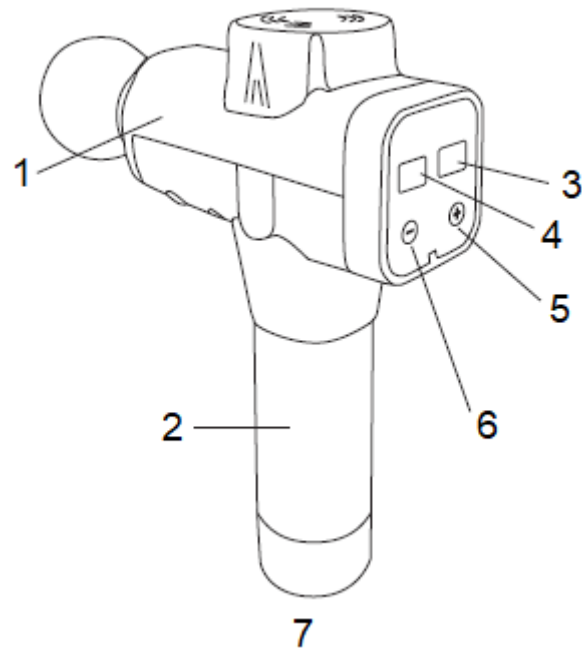

1.	főtest
2.	akkumulátor és markolat
3.	akkumulátor töltöttségi állapota
4.	sebesség kijelző
5.	sebesség +
6.	sebesség -
7.	ki/bekapcsoló gomb

HASZNÁLAT

Csatlakoztassa az akkumulátort az alaphoz.

Kapcsolja be a készüléket az akkumulátor alján található főkapcsoló bekapcsolásával. Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló kikapcsolásával.

Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a sebesség + / - gombokat a sebesség növeléséhez vagy csökkentéséhez. A készülék leállításához 3 másodpercig nyomja meg az egyik nyomógombot.

Helyezze az akkumulátor kapcsolóját kikapcsolt pozícióba, a képernyő kikapcsol.

A készülék 10 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.

ÚJRATÖLTÉS

Az akkumulátor teljes feltöltése az első használat előtt akár 6 órát is igénybe vehet.

A töltéshez csatlakoztassa a töltőt a töltőcsatlakozóhoz, és dugja a csatlakozóaljzathoz.

Az akkumulátor kijelzője mutatja az akkumulátor állapotát, ha az érték 20, töltse fel az akkumulátort.

Nem ajánlott hagyni teljesen lemerülni az akkumulátort.

A művelet időtartama a masszázsk intenzitásától és sebességétől függ.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Nedves ronggyal tisztítsa meg a készüléket, majd törölje szárazra.

Tároláshoz vagy szállításhoz vegye ki az akkumulátort, és tárolja a készüléket egy dobozban.

KÖRNYEZETVÉDELLEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon szabaduljon meg tőle a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az arra kijelölt újrahasznosító helyre.