



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 21969 Légnyomásos lábmasszírozó inSPORTline
Beinhowair



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	4
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS HASZNÁLATA.....	5
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	6
HIBAELHÁRÍTÁS.....	6
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	6

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ


- Az első használat előtt gondosan olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Ne használjon olyan alkatrészeket, amelyeket a gyártó nem engedélyezett.
- Ne módosítsa vagy javítsa a készüléket otthon. A javításokat csak hivatalos eladó vagy szakszerviz végezheti el.
- Ha a tápkábel megsérült, ne használja a készüléket, amíg azt ki nem cserélték.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket magas páratartalmú vagy hőmérsékletű helyen.
- Használat után húzza ki a készülék csatlakozóját.
- Ne használja a készüléket 15 percnél tovább.
- Ha bármilyen hiba lép fel, vagy a készülék nem rendeltetésszerűen működik, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ha a hőmérséklet túl magas, vagy ha kellemetlen szagot érez a gép irányából, azonnal hagyja abba a készülék használatát és húzza ki az áramból.
- Ne húzza a tápkábelt.
- Csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, vagy olyan emberek, akiknek nincs tapasztalatuk és megfelelő ismeretük, nem használhatják a készüléket (beleértve a gyermekeket is).
- Ez az eszköz nem orvosi vagy terápiás eszköz.

• Otthoni használatra alkalmas.

Ne használja a készüléket, ha:


- Érzékeny a hőre.
- Nem alkalmas gyermekek, idősek vagy várandós nők számára.
- Bőrérzékenység, bőrpír, ekcéma, szívbetegségek, daganatok, magas vérnyomás, csontritkulás, instabil vérnyomás stb.
- Pacemaker vagy más orvosi eszközt használó személyek számára.
- Bármilyen kezelés alatt álló felhasználók számára.

TERMÉK LEÍRÁS

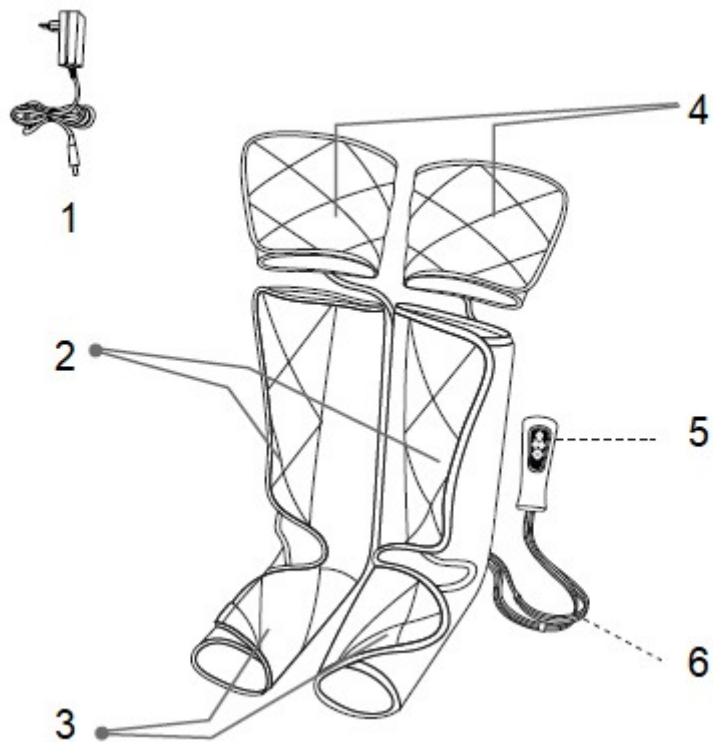

1. Tápkábel
2. Vádli masszírozó
3. Lábfej masszírozó
4. Comb masszírozó
5. Távirányító
6. Kábelek

TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS HASZNÁLATA

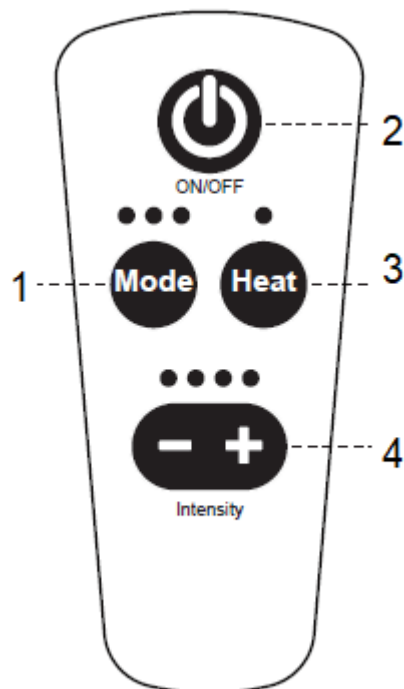

1. Mód váltó
2. Be/ki kapcsoló
3. Fűtés
4. Intenzitás beállítása

Csatlakoztassa az adaptert a tápegységhez és a DC tápkábelhez. A termék készenléti állapotba lép.



Az indításhoz nyomja meg a gombot, amikor a készülék készenléti állapotban van. A fűtés és az intenzitás alapértelmezett beállítása 1. Megkezdődik a 15 perces visszaszámlálás. Ha megnyomja a gombot a masszázs során, a masszázs kikapcsol. A masszázs 15 perc működés után kikapcsol és készenléti állapotba lép.

Válassza ki a masszázs típusát:



1. Teljes láb-, vádli- és combmasszázs.
2. Masszázs sorrendben: comb, vádli és láb
3. Masszázs sorrendben: láb, vádli és comb

A masszázs típusát nyilak jelzik.



Nyomja meg a gombot a fűtés elindításához a vádli és a láb területén.

A nyíl segítségével ellenőrizze az állapotot.



Nyomja meg a gombot az intenzitás legfeljebb 4 szinttel történő növeléséhez.

A nyíl segítségével megtudhatja az intenzitás szintjét.



Nyomja meg a gombot az intenzitás legfeljebb 4 szinttel történő csökkentéséhez.

Az indikátor segítségével megtudhatja az intenzitás szintjét.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
- Törölje le a készüléket száraz és puha ruhával.
- Ne tisztítsa a készüléket és a tartozékokat maró hatású tisztítószerrel.
- Hűvös és száraz helyen tárolja.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy nedves környezetnek.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A termék nem működik	A tápkábel nincsen megfelelően csatlakoztatva	Dugja be a tápkábelt
	A kapcsoló ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a kapcsolót.
A melegítő funkció nem működik	A túlmelegedés elleni védelem automatikusan kikapcsolja a hőfunkciót	A fűtés bekapcsolás után lehűlt
Fura zaj hallható használat közben	A hangok a működő motorból származnak	Normális motor működés

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.