



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 22994 Masszázsasztoly inSPORTline Shormi**



# TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
CSOMAG TARTALMA.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	4
MASSZÁZS FEJ.....	4
HASZNÁLAT.....	4
TÖLTÉS.....	5
TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ.....	5
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	5

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- A termék nem játék.
- Tartsa távol gyermekektől.
- A termék nem vízálló, ne merítse vízbe.
- Ne helyezze a készüléket nyílt tűz, magas hőmérsékletű források közelébe, és ne dobja tűzbe.
- Ne használja a fej, a szív és a nemi szervek közelében.
- Csak lágy szöveteken, például izmokon, ne csontokon használja.
- Óvja az eséstől és ütésektől.
- Ne módosítsa és ne szerelje szét a terméket.
- Csak az eredeti töltőt és kábelt használja, vagy ugyanazokkal a specifikációkkal.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket.
- Töltse a készüléket 10 ° C és 40 ° C közötti hőmérsékleten.
- Ne tegye ki a készüléket napfénynek.
- Ne használja a készüléket, ha a környezeti hőmérséklet magasabb, mint 70 ° C.
- Ne használjon gyorstöltőt.
- A terméket nem orvosi vagy gyógyászati célokra tervezték. Ha hányingert vagy fájdalmat tapasztal a használat során, azonnal hagyja abba a készülék használatát és forduljon orvoshoz.
- Tartsa távol az ujjakat, a haját és a test többi részét a tengelyektől és a mozgó részekről.
- Ha a készülék sérült vagy nem működik megfelelően, azonnal állítsa le a működését.
- A készülék bemenete 5V 2A.
- Csak otthoni használatra alkalmas.
- **FIGYELEM:** A terméket nem orvosi vagy egészségügyi célokra szánják.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A termék nem alkalmas: várandós nőknek, cukorbetegeknek, neuropátiáknak, sérült retinánál, pacemakerrel rendelkezőknek, ízületi transzplantáció után, műtét után, migrénben, epilepsziában szenvedőknek stb.
- **FIGYELEM:** Használat előtt konzultáljon orvosával.

## CSOMAG TARTALMA

1x masszázss eszköz


6x masszázsfaj

1x USB-C töltőkábel

1x kézikönyv

ADAPTER / TÖLTŐ NEM A CSOMAG RÉSZE

## TERMÉKLEÍRÁS

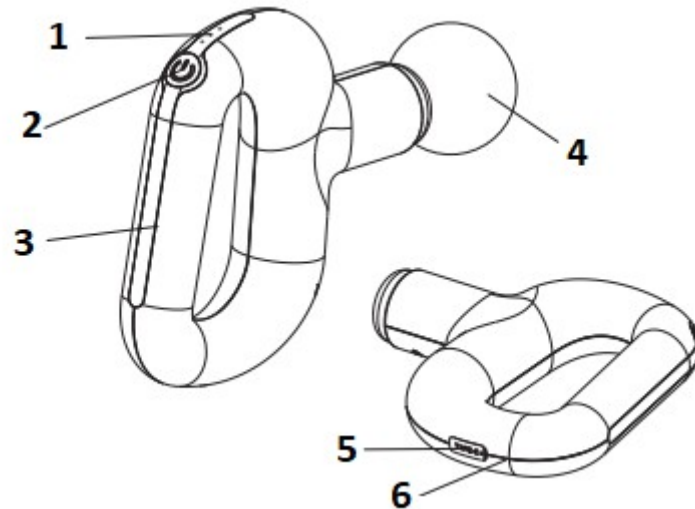

1. LED sebességjelzők
2. Bekapcsolás / mód gomb
3. Fogantyú
4. Masszázs fej
5. USB-C töltőport
6. LED kijelző

## MASSZÁZS FEJ



Kis lapos fej  
minden  
izomhoz



Kis kör alakú  
fej az  
ízületekhez



U fej a  
csigolyákhoz



Kör alakú fej a  
nagy  
izmokhoz



Keresztfej az  
összes izom  
számára




Ívelt fej  
combokhoz,  
szövetekhez és  
csuklóhoz

## HASZNÁLAT

1 – lassú sebesség  
(2100)

2 – közepes  
sebesség (2700)

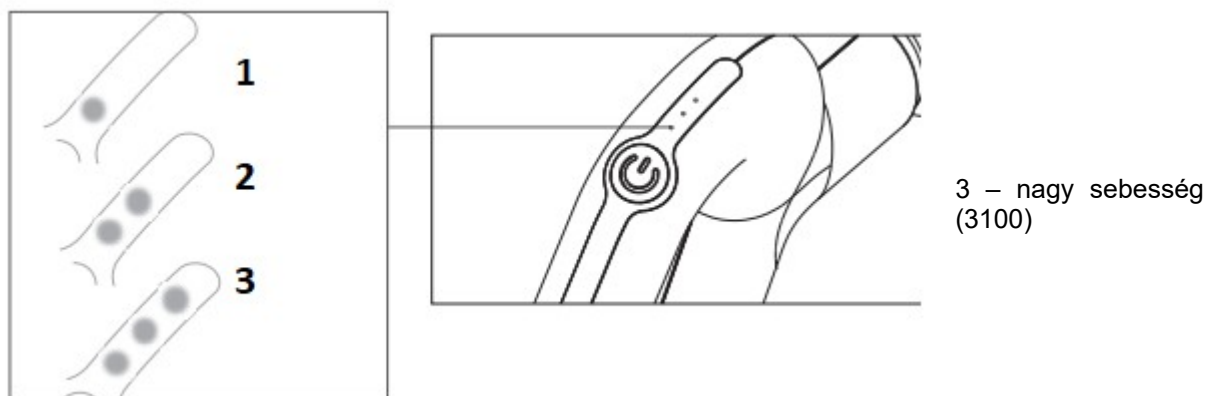

Nyomja meg a gombot 3 másodpercig, a készülék bekapcsol, a sebességjelző világítani kezd, az alapértelmezett mód a lassú sebesség.

A készüléknek 3 sebességmódja van, sorrendben: lassú - közepes - gyors - kikapcsolva

A sebességmód megváltoztatásához nyomja meg a gombot, ha a gombot a legnagyobb sebességgel nyomja meg, a készülék visszakapcsol a leglassabb üzemmódra.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához.

**FIGYELMEZTETÉS:** A készülék beépített zárral rendelkezik, ha a fej beragadt, a motor kikapcsol. Az újraindításhoz 3 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

## TÖLTÉS

**FIGYELEM:** Csak az eredeti adaptert / töltőt használja 5 V-os bemenettel vagy az eredetivel megegyező specifikációkkal. Ne használjon gyorsöltőt.

Az USB-C használatával töltsse fel.


Csatlakoztassa a kábelt az eszközhöz, majd a töltőhöz vagy a számítógéphez.

A LED jelzőfény kigyullad töltés közben.



A jelzőfény töltés közben pirosan világít.

A jelzőfény fehér színnel világít, amikor az akkumulátor töltődik

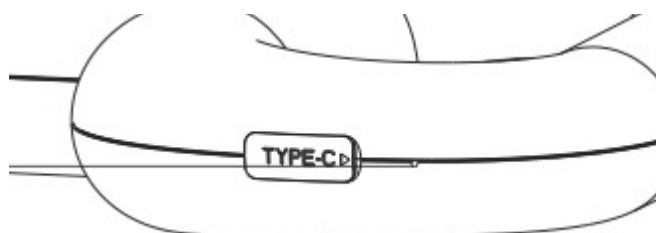

## TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

Névleges teljesítmény	12W ± 10%
Sebesség módok	3 szint
Sebesség	2000 – 3100 RPM
Akkumulátor	4800 mAh

<b>Bemenet</b>	5V 2A, USB-C
<b>Az akkumulátor élettartama egyetlen töltéssel</b>	12 óra
<b>Töltési idő</b>	3,5 óra



## **KÖRNYEZETVÉDELEM**

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.