



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 23083 Galvanikus arcvasaló inSPORTline Giva



TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	3
HASZNÁLAT.....	4
TISZTÍTÓ MÓD.....	4
TÁPLÁLÓ MÓD.....	4
STIMULÁLÓ MÓD.....	5
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK.....	5
HASZNÁLAT GYAKORISÁGA.....	5
TÖLTÉS.....	6
KARBANTARTÁS.....	6
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	6

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg, ha később szüksége lenne rá.
- Távolítson el minden ékszert, például fülbevalót, karkötőt, nyakláncot és piercinget
- Ne használja a terméket töltés közben. A töltés után húzza ki az USB-kábelt.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
- Ne használja a szemén és egyéb lágy felületeken.
- Használat előtt vegye le a szemüvegét.
- Nem alkalmas fémallergiában, ekcémában vagy daganatos betegségben szenvedőknek. Továbbá nyílt sebek esetében se használja.
- A termék nem játék, tartsa gyermekektől elzárva.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon a szervizhez.
- Használat előtt konzultáljon kezelőorvosával.
- Nem alkalmas az alábbi személyek számára: várandós nők; gyermekek; epilepsziában, daganatokban, gyulladásban szenvedők; pacemakerrel használó személyek; hőre, rezgésre érzékeny emberek; ekcémában vagy bőrgyógyászati betegségekben szenvedők számára. Forduljon kezelőorvosához első használat előtt.

TERMÉK LEÍRÁS

	1.	Szivacsnak való tartógyűrű
	2.	Masszázsfej
	3.	Intenzitásjelző
	4.	Intenzitás beállítása
	5.	Kapcsoló
	6.	Tisztítási mód
	7.	Tápláló mód
	8.	Stimuláló mód
	9.	Ion csík
	10.	USB adapter

HASZNÁLAT

ELŐKÉSZÍTÉS

1. Tisztítsa meg arcát a sminktől és a szennyeződésektől.
2. Használat előtt vigyen fel vízbázisú kozmetikumot.
3. Vigyen fel krémet vagy bőrápoló terméket, hogy elkerülje a bőr kiszáradását.
4. Ha a készülék nem tiszta, akkor nedves ruhával tisztítsa meg.
5. Ne használja a szem és a fül környékén.

HASZNÁLAT

TISZTÍTÓ MÓD – Megtisztítja arcát a pórusokban maradt szennyeződésektől.

Az arc megtisztítása után vigyen fel krémet egy kozmetikai vattakorongra. Ne használjon testápolókat vagy gélkrémeket.

Állítsa a készüléket "tisztítás" módba.

Állítsa a tisztítás intenzitását „magas”, „közepes” vagy „alacsony” üzemmódba.

Tartsa a készüléket a két ioncsíknál fogva.

Óvatosan vigye fel a krémet az arcra.

MEGJEGYZÉS: Ha a kozmetikai vattakorong nem érinti a bőrt, miközben fogja az ioncsíkokat, a készülék nem fog rezegni.



TÁPLÁLÓ MÓD bőrpuhító mód a hidratálókrémek hatékonyabb felviteléhez.

Egyenletesen puhítja a bőrt.


Állítsa a készüléket tápláló módba.

Állítsa az intenzitást "magas", "közepes" vagy "alacsony" üzemmódba.

Tartsa a készüléket a két ion csíknál fogva.

Óvatosan mozgassa a masszázsflejt a bőrön.

MEGJEGYZÉS: Kozmetikai vattakorong használata nem szükséges.

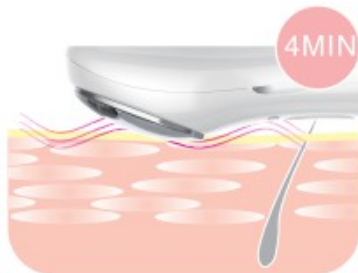


STIMULÁLÓ MÓD– mód a bőr stimulálására rezgések és elektródák segítségével

Vigyen fel arcmaszkot vagy krémet egyenletesen az arcára.

Állítsa a készüléket stimuláló módba.

Állítsa az intenzitást "magas", "közepes" vagy "alacsony" üzemmódba.

Tartsa a készüléket a két ion csíknál fogva. Óvatosan mozgassa a masszázsfjejet a bőrön.

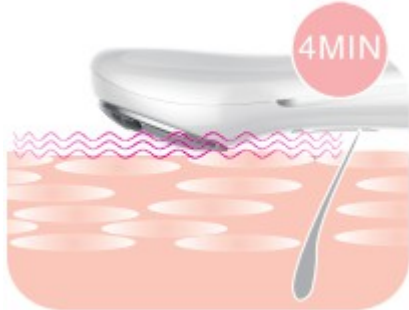

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- Mindegyik üzemmód 4 percig tart.
- 4 perc elteltével a készülék leáll, és további 4 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.
- Ha a készülék nem csúszik könnyen, akkor vigyen fel több krémet az arcra.
- Ha a kozmetikai vattakorong nem érinti a bőrt, és nem az ioncsíknál fogva tartja, akkor a készülék nem fog rezegni.
- Ne használja a készüléket ugyanazon a helyen 10 másodpercnél tovább.
- A kozmetikai vattakorongok csak egyszer használhatók.



Javasolt mozzgatás

HASZNÁLAT GYAKORISÁGA

Gyors tisztítás – válassza ki a 3. módot (stimulálás), napi egyszeri használatát javasoljuk, az eljárás időtartama 4 perc.

Bőrrevitalizáció – válassza ki az 1. módot (tisztítás), majd a 3. módot (stimulálás) módot, heti 4-5 alkalommal, eljárási idő 8 perc.

Alapos tisztítás – válassza az 1-es módot (tisztítás), majd a 2. módot (táplálás) és az utolsó alkalommal 3. módot (stimulálás) válassza, használjon heti 3-4 alkalommal.

TÖLTÉS

- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a LED villogni kezd.
- Töltés után mind a 3 szín világítani fog.
- Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja, rendszeresen töltse fel az akkumulátort.
- Töltés után húzza ki a töltőt.

KARBANTARTÁS

- Karbantartást csak kikapcsolt készülék mellett végezzen.
- Használat után tisztítsa meg a fejet nedves pamut kendővel.
- A készülék nem vízálló. Ne merítse vízbe.
- Ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel.
- Tárolja a készüléket árnyékos és száraz helyen.
- Ha a készülék sérült, ne használja.
- Óvja az ütésektől és a leeséstől.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a készüléket.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.