



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 23084 Rádiófrekvenciás masszázskészülék a szemkörnyékre device Insportline Eyewish



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	3
HASZNÁLAT.....	4
KARBANTARTÁS.....	5
TÖLTÉS.....	5
SPECIFIKÁCIÓ.....	5
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	5

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Ne használja töltés közben.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket.
- Ne használja szem vagy más lágy terület közelében.
- Nem alkalmas az alábbi személyek számára: várandós nők; gyermekek; epilepsziában, daganatokban, gyulladásban szenvedők; pacemaker használó személyek; hőre, rezgésre érzékeny személyek; ekcémában vagy bőrgyógyászati betegségekben szenvedők. Első használat előtt konzultáljon orvosával.

TERMÉK LEÍRÁS

1.	Fém masszázsfaj
2.	LCD kijelző
3.	Bekapcsoló/üzemmód gomb
4.	USB töltő port
5.	Piros fény
6.	Intenzitás beállítása
7.	Akkumulátor állapot
8.	LED jelzőfény
9.	Rádiófrekvenciás jelző (RF)
10.	Rezgésjelző
11.	Intenzitás kijelző

HASZNÁLAT


Az indításhoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot. Nyomja meg az üzemmódváltáshoz.

1. Rádiófrekvencia + piros fény + rezgés
2. Rádiófrekvencia + piros fény
3. Rádiófrekvencia + rezgés
4. Rádiófrekvencia

Az intenzitás beállítása csak rádiófrekvenciára vonatkozik.




Vigyen fel megfelelő mennyiségű szemkrémet az arcra.

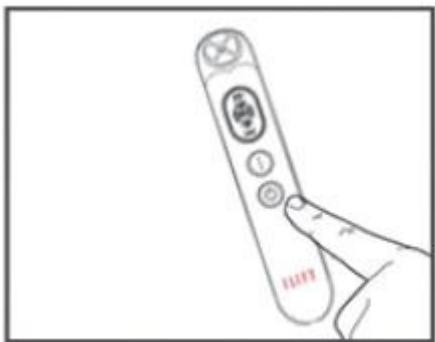

Tartsa lenyomva a főkapcsolót, majd nyomja meg a bekapcsológombot az üzemmód beállításához. Nyomja meg az intenzitás beállító gombot az intenzitás beállításához.



Gyengéden masszírozza be a szem körüli területet az ábra szerint.

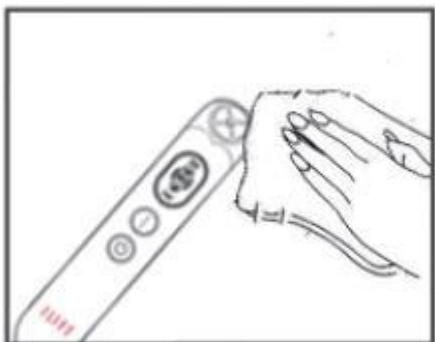

Használat után törölje le a masszázsféjet száraz törülközővel, ruhával vagy papírtörülőkendővel.

KARBANTARTÁS

- Vigye fel a krémet az arcra egyenletesen és megfelelő mennyiségben, hogy ne ülepedjen túlzottan a masszázsfaján.
- Használat után törölje le a masszázsfajét száraz törülközővel vagy törlőkendővel.
- Óvja a készülék testét a vízzel való érintkezéstől.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret.
- Árnyékos és száraz helyen tárolandó.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült.
- Óvja a készüléket ütésektől és leesésektől.

TÖLTÉS

- Ha az akkumulátor lemerült, kapcsolja ki a készüléket és töltsse fel.
- Töltés közben az akkumulátor jelzőfénye villog. A szimbólum villogása megszűnik, ha teljesen fel van töltve.
- Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja, rendszeresen töltsse fel az akkumulátort.
- Töltés után válassza le a töltőt.

SPECIFIKÁCIÓ

Név:	Rádiófrekvenciás masszázskészülék a szemkörnyékre		
Modell:	IF-1208	Egy töltéssel üzemel:	>30 perc
Súly:	54g	Rádiófrekvencia:	400kHz
Méret:	149,9x28x22 mm	Bemenet:	DC5V/1A
Rezgés frekvencia:	12000 RPM	Akkumulátor:	500 mAh
Töltési idő:	3 óra		

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.