




## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 23085 Masszázs készülék szemre Insportline Simbora

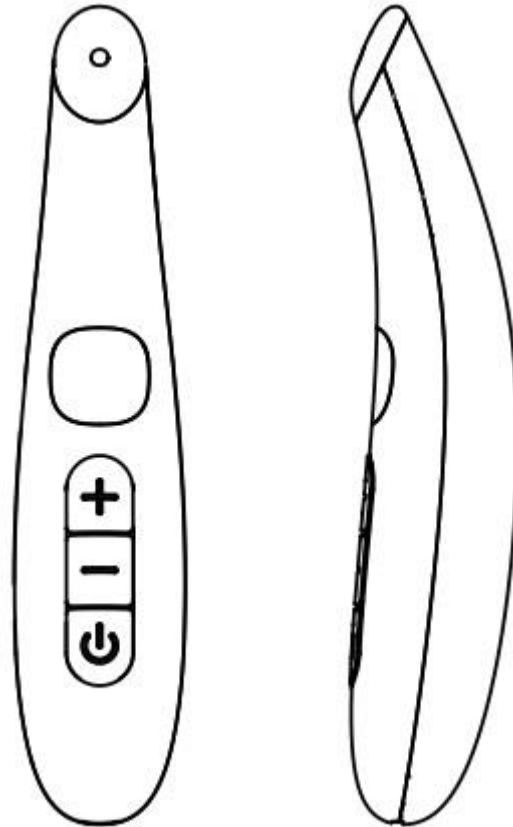


# TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	3
HASZNÁLAT.....	4
MÓDOK .....	4
KARBANTARTÁS.....	5
TÖLTÉS.....	5
SPECIFIKÁCIÓK.....	5
KÖRNYEZETVÉDELEM .....	5

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Használat előtt távolítsa el minden fémtárgyat és ékszert a testéről.
- Ne használja töltés közben.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket, ha a készülék nem működik megfelelően, forduljon a szervizhez.
- Nem alkalmas hőre, fémallergiára vagy túlérzékeny bőrre érzékeny személyek számára.
- **Nem alkalmas az alábbi személyek számára:** várandós nők; gyermekek; epilepsziában, daganatokban, gyulladásban szenvedők; pacemakerrel használó személyek; hőre, rezgésre érzékeny személyek; ekcémában vagy bőrgyógyászati betegségekben szenvedők. Konzultáljon orvosával első használat előtt.


## TERMÉK LEÍRÁS

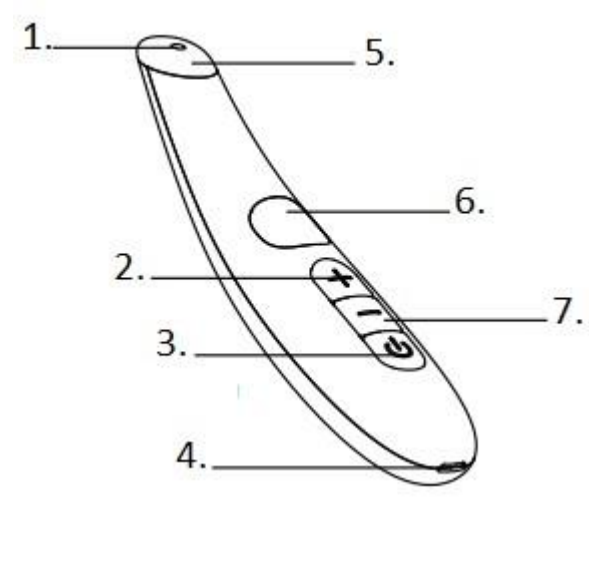	1.	Fém masszázsfaj
	2.	Hőmérséklet növelés
	3.	Tápkapcsoló / üzemmódváltás
	4.	USB töltő port
	5.	Piros fény
	6.	Fém indukciós lemez
	7.	Hőmérséklet csökkentés

## HASZNÁLAT




Vigyen fel elegendő szemkörnyékápoló krémet egyenletesen a szem körül.

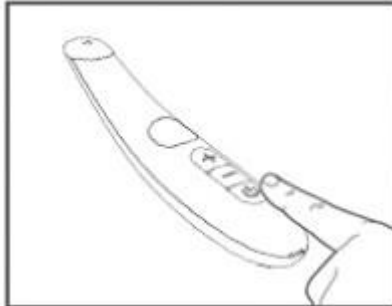

Az indításhoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd nyomja meg a gombot az üzemmód megváltoztatásához. A + és - gombokkal állítsa be a hőmérsékletet.



Mozgassa a masszázsfjet a képen látható módon

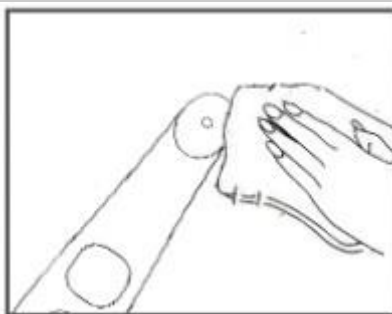

Használat után tartsa lenyomva a kapcsolót a kikapcsoláshoz, és törölje le a fejet egy száraz törülközővel vagy törülőkendővel.

## MÓDOK

### 1. mód: Rezgés + fűtés + piros fény

Világosítja és revitalizálja a bőrt.

### 2. mód: Fűtés + piros fény

Támogatja a sejtmegújulást és a kollagéntermelést.

### 3. mód: Rezgés + fűtés

Felgyorsítja a felszívódást, hogy táplálja a bőrt.

## KARBANTARTÁS

- Vigye fel a krémet az arcra egyenletesen és megfelelő mennyiségben, hogy ne ülepedjen le túlzottan az arcon.
- Használat után törölje le a fejet száraz törülközővel vagy törlőkendővel.
- Óvja a készülék testét a vízzel való érintkezéstől.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret.
- Árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült.
- Óvja a készüléket ütésektől és leesésektől.

## TÖLTÉS

- Ha az akkumulátor lemerült, kapcsolja ki a készüléket és töltsse fel.
- Töltés közben az akkumulátor jelzőfénye villog. A szimbólum abbahagyja a villogást, ha teljesen fel van töltve.
- Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja, rendszeresen töltsse fel az akkumulátort.
- Töltés után válassza le a töltőt.

## SPECIFIKÁCIÓ

<b>név:</b>	Masszázskezelő szemre		
<b>model:</b>	IF-1203	<b>töltésidő:</b>	1,5 óra
<b>súly:</b>	47,5 g	<b>méret:</b>	139x29x28,5 mm
<b> feszültség:</b>	DC 3,7V	<b>teljesítmény:</b>	0,7 W
<b>hőmérséklet:</b>	37 °C–45 °C	<b>anyag:</b>	Zinc alloy + ABS
<b>Vibráció frekvencia:</b>	10 000 RMP	<b>üzemi feszültség:</b>	3,7 – 4,2 V

## KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.