




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 23086 Masszázs készülék szemre Insportline Mikaella

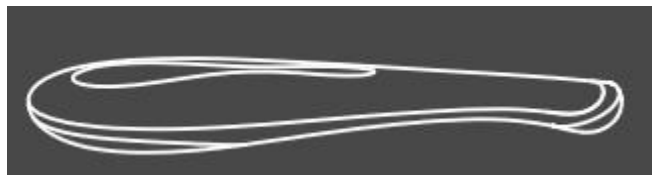


TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	3
HASZNÁLAT.....	4
KARBANTARTÁS.....	4
TÖLTÉS.....	4
SPECIFIKÁCIÓK.....	5
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	5

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Használat előtt távolítsa el minden fémtárgyat és ékszert a testéről.
- Ne használja töltés közben.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket, ha a készülék nem működik megfelelően, forduljon a szervizhez.
- Nem alkalmas hőre, fémallergiára vagy túlérzékeny bőrre érzékeny személyek számára.
- **Nem alkalmas az alábbi személyek számára:** várandós nők; gyermekek; epilepsziában, daganatokban, gyulladásban szenvedők; pacemakerrel használó személyek; hőre, rezgésre érzékeny személyek; ekcémában vagy bőrgyógyászati betegségekben szenvedők. Konzultáljon orvosával első használat előtt.


TERMÉK LEÍRÁS

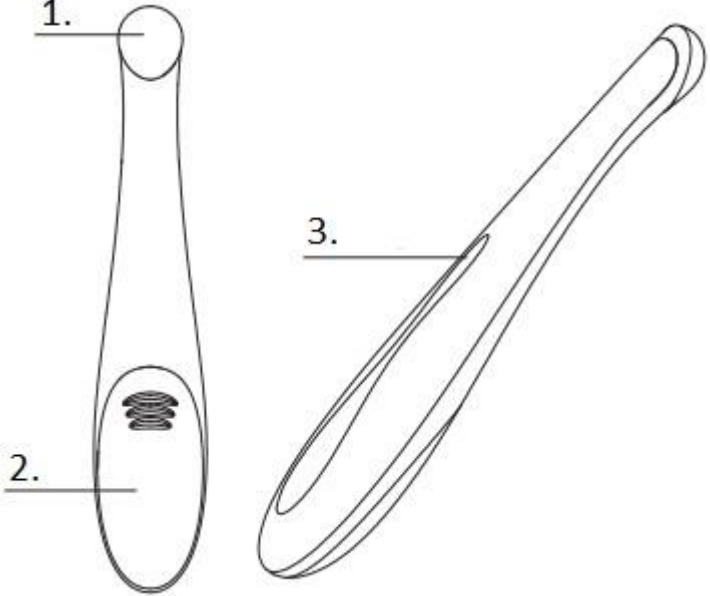	1.	Fém masszázss fej
	2.	Akkumulátor
	3.	Induktív lemez

HASZNÁLAT




Vigyen fel elegendő szemkörnyékápoló krémet egyenletesen a szem körül.

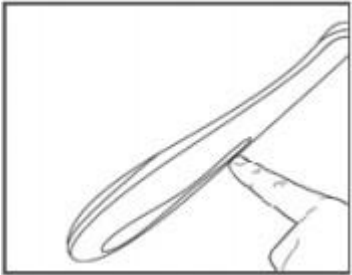

Érintse meg az induktív lemezt, és helyezze a masszázsféjet a bőrre. A készülék vibrálni kezd.



Mozgassa a masszázsféjet az ábra szerint.

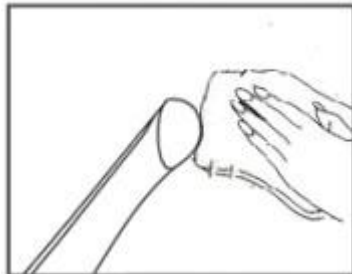

Használat után tartsa lenyomva a kapcsolót a kikapcsoláshoz, és törölje le a fejet egy száraz törülközővel vagy törlőkendővel.

KARBANTARTÁS

- Vigye fel a krémet az arcra egyenletesen és megfelelő mennyiségben, hogy ne ülepedjen le túlzottan az arcon.
- Használat után törölje le a fejet száraz törülközővel vagy törlőkendővel.
- Óvja a készülék testét a vízzel való érintkezéstől.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket.
- Árnyékos és száraz helyen tárolja.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült.
- Óvja a készüléket ütésektől és leesésektől.

TÖLTÉS

- Ha az akkumulátor lemerült, kapcsolja ki a készüléket, és cserélje ki az akkumulátort.
- Ha hosszabb ideig szeretné tárolni a készüléket, vegye ki az akkumulátort.

SPECIFIKÁCIÓ

név:	Masszázs készülék szemre		
model:	IF-1207	súly:	23 g
anyag:	ABS	méret:	138x27x19,6 mm
Vibráció frekvencia:	12 000 RPM	hőmérséklet:	42 °C
Tápegység:	1x AAA akkumulátor	névleges feszültség	1,5 V
Üzemi feszültség:	350 mA	tápegység:	0,7 W

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvjaa környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.