



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 23200 Masszázs készülék inSPORTline Lilona**



# TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
CSOMAG TARTALMA.....	3
TERMÉKLEÍRÁS.....	3
HASZNÁLAT.....	4
KARBANTARTÁS.....	4
SPECIFIKÁCIÓ.....	4
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	5

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ


- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- A készülék első használata előtt először tesztelje a készüléket az alkaron, majd az arcon.
- A készülék kipróbálása után hagyja a bőrt egy órán át pihenni. Ha nem jelentkezik allergiás reakció vagy irritáció, akkor biztonságosan használhatja a készüléket.
- A készülék nem alkalmas: allergiásoknak, pl. allergia fémekre, sérült vagy heges bőrre, várandós nőknek, bőrgyógyászati betegségekben szenvedőknek, hőre érzékenyeknek stb.
- A termék nem játék, tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek.
- Ne használja vagy tárolja a terméket magas hőmérsékletű és páratartalmú helyen.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, illetve ne érintkezzen közvetlenül vízzel.
- Ne tisztítsa a terméket vízzel.
- Használat előtt vigye fel a krémet a bőrre.
- Kombinálja a készüléket a szokásos bőrápolási szokásaival.
- Használja az arcra 5-10 percig, a nyakra legfeljebb 3 percig.
- Javasoljuk, hogy a készüléket hetente 3-4 alkalommal használja, maximum 15 percig.
- A készülék 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha folytatni kívánja a készülék használatát, nyomja meg a bekapcsoló gombot az automatikus kikapcsolás után 1 percen belül.
- FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem helyettesíti az orvosi vagy terápiás kezeléseket.

## CSOMAG TARTALMA

Masszázs készülék	1x
USB töltőkábel	1x
Használati útmutató	1x

## TERMÉKLEÍRÁS


	1.	Burkolat
	2.	Masszázs lemez
	3.	LED
	4.	Bekapcsoló gomb/mód változtatás

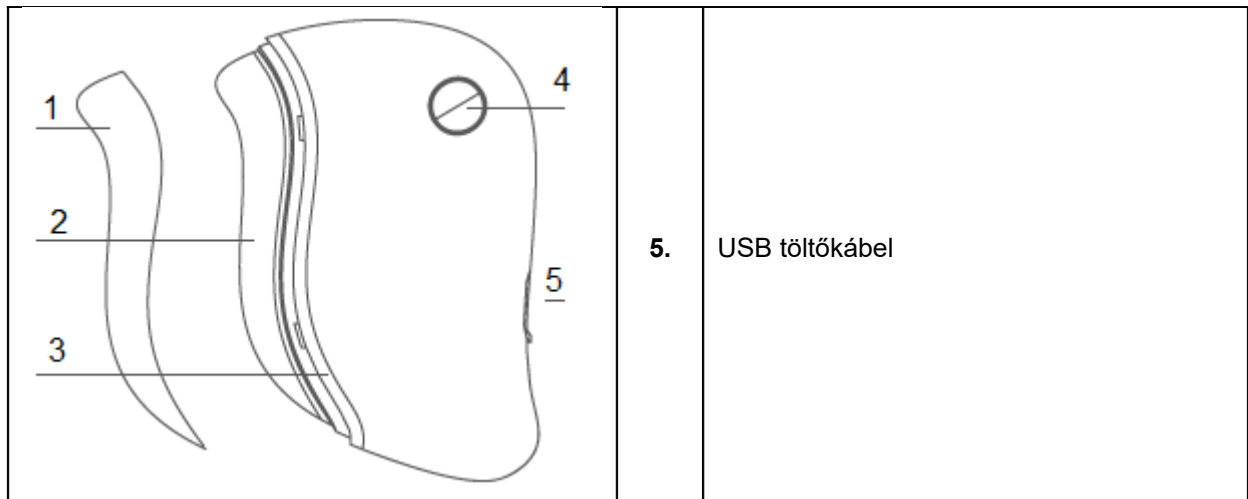

## HASZNÁLAT

A készülék 4 üzemmódot tartalmaz: rezgés + LED, fűtés + LED, fűtés + rezgés, fűtés + rezgés + LED.

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot az indításhoz, a kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig bármely üzemmódban.
- Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg az üzemmódváltás gombot.
- A készülék 5 perc működés után automatikusan kikapcsol.
- A készülék három mozdulatot hajt végre: toló, spirálozó és csúsztató mozgás.
- Nyomás: finoman nyomja a bőrt
- Spirál: gyengéd és ritmikus spirális mozgások
- Csúszó mozgás: mozgás felfelé és lefelé

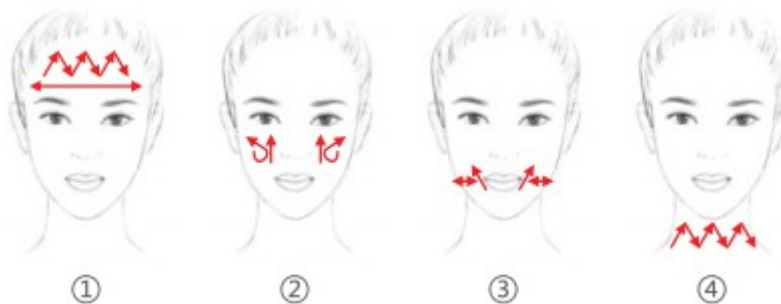

Az alábbi területeken alkalmazható:

- Homlok: Lassan mozgassa a készüléket fel és le / jobbra és balra.
- Arc: Lassan mozgassa a készüléket az arcán felülről lefelé / belülről kifelé.
- A száj sarkai: Lassan haladjon felülről lefelé a szája sarka körül.
- Nyak: Lassan mozgassa a készüléket felülről lefelé vagy alulról felfelé.

## KARBANTARTÁS

- Tisztítsa meg a masszázslamezt puha ruhával.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret vagy oldószereket.

- Ne merítse vízbe.

## SPECIFIKÁCIÓ

Név	Masszázs készülék, szépségápolási eszköz		
Bemeneti feszültség	DC 5 V	Tápegység	2,6 W
Töltési idő	90 perc	Aktuális	330 mA
Akkumulátor-kapacitás	500 mAh	Hőfok	42-46 °C
Egy töltéssel a működési idő	50 perc	Súly	60 g
Rezgési frekvencia	8000 rpm		
Termék méretei	101 x 73,5 x 19 mm		

## KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.