




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 24985 Kollagén lámpa inSPORTline Coladan

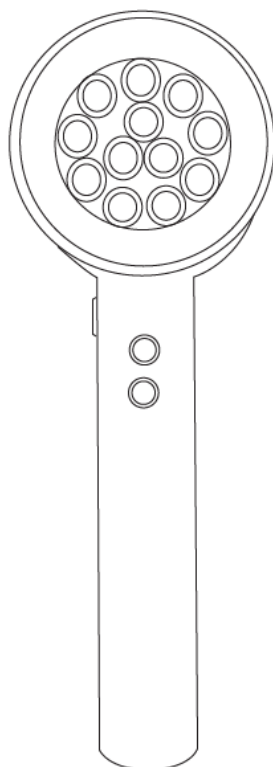

TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
TERMÉK LEÍRÁS.....	3
HASZNÁLAT.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	4
SPECIFIKÁCIÓ	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
KÖRNYEZETVÉDELEM	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Először is tesztelje az eszközt az alkaron, hogy lássa, allergiás vagy fényérzékeny e a kezelésre. Ezután várjon körülbelül egy órát, és ellenőrizze a területet, amelyen alkalmazta a készüléket. Ha nincs allergia vagy érzékenység jele, használhatja a készüléket az arcán.
- Tárolja a készüléket száraz és árnyékos helyen.
- Tartsa távol a készüléket víztől.
- Ne használja a készüléket töltés közben.
- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.
- Használat előtt tisztítsa meg a bőrt és kenje be hidratáló krémmel. Soha ne használjon alkoholtartalmú kozmetikumokat.
- Ne használja a következő területeken: szem, szemhéj, irritált vagy sérült bőr, hegek, nyílt sebek, nyak, viszkető bőrfelületek stb.
- Ne használja a készüléket, ha fényérzékeny.
- Nem alkalmas várandós nők és szoptató anyák számára.
- Ne használja plasztikai műtét után.
- Ne használja vezetés, séta vagy más olyan tevékenység közben, amely teljes figyelmét igényli.

TERMÉKLEÍRÁS



1. LED lámpák

2. Intenzitás beállítása

3. Főkapcsoló / üzemmód beállítása

4. USB-C töltőport

5. Eszköz állapotjelző

LED lámpák: 24 db, egyik oldalon 630 nm, a másikon 660 nm

Intenzitás beállítása

Tápellátás / Üzemmódok: Tartsa lenyomva a gombot a készülék be- és kikapcsolásához; indítás után nyomja meg a gombot a lámpakészlet váltásához

USB-C a töltéshez

Jelzőlámpa: fehér - normál működés, piros (villog) - alacsony akkumulátor töltöttség, fehér (villog) - töltés, piros - teljesen feltöltve

CSOMAG TARTALMA

Készülék; töltőkábel; használati útmutató; szemüveg

Rendszeres használatával a fény jótékony hatással van a bőrre (csökkenti a ráncokat, pattanásokat és az arcbőr tökéletlenségeit) és az egész testre – segít enyhíteni az izom-, ízületi- és csontfájdalmakat, támogatja a kollagén termelődését a szervezetben..

HASZNÁLAT

Mozgassa az eszközt a homlokán balról jobbra.



Mozgassa az álltól az állkapocsig.



Mozgassa felfelé.



Mozgassa a szem körül.



- Javasolt használati idő: max. 3 percig ugyanazon a helyen az arcon
- Használat gyakorisága: heti 5 alkalommal

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztításhoz használjon puha, száraz ruhát.
- A készülék nem érintkezhet vízzel, ne használjon tisztítószereket.

SPECIFIKÁCIÓ

Csomagolóanyag	Alumínium ötvözet
A vörös fény hullámhossz	Két részre osztva 630 nm és 660 nm
LED lámpák száma	24 db
Fényszög	25 °
Tápegység	Magasabb hullámhossz 15W, kisebb hullámhossz 12W
USB-C	5V / 1A
Súly	245 g
Akkumulátor-kapacitás	5000 mAh
Méret	190 x 68 x 35 mm

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.