



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

**IN 24988 Ultrahangos kozmetikai készülék inSPORTline
Lovret**



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
HASZNÁLAT.....	3
Tisztítás mód.....	3
Hidratáló mód.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Feszesítő mode	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
TÖLTÉS.....	5
TERMÉK LEÍRÁS	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
FUNKCIÓ.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
PARAMÉTEREK	6
KÖRNYEZETVÉDELEM	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Ne használja hosszú ideig.
- A termék nem játék, tartsa gyermekektől elzárva.
- Kerülje a szembe jutást.
- A jobb hatás érdekében használja rutinszerű bőrápolással együtt.
- Ne használja alvás közben.
- Ne merítse vízbe.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret vagy oldószeret a tisztításhoz.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek.
- A termék nem alkalmas: várandós nők, epilepsziában szenvedők, fény- és hőallergiában szenvedők, érzékeny bőrűek, bőrgyógyászati megbetegedésekben szenvedők, sérült vagy heges bőrfelületen stb.
- Ne használja folyamatosan 15 percnél tovább.
- Ne használja többször, mint hetente egyszer.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék nem helyettesíti az orvosi vagy terápiás kezelést.

HASZNÁLAT

Módok:

Tisztítás

Bőrtisztítás nagyfrekvenciás ultrahangos rezgéssel, a pozitív ionok alaposan kitisztítják a pórusokat.

Hidratálás (kozmetikumok felszívódása / hidratálás)

Támogatja a tápanyagok felszívódását a kozmetikumokból. Segít hidratálni, táplálni és ragyogóvá tenni a bőrt.


Bőrfeszítés

Az elektrostimuláció visszaállítja a bőr rugalmasságát, erősíti és kisimítja a bőrt.

Tisztítás mód

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.

2. Ezután nyomja meg a bekapcsológombot, és válassza ki a Cleanse (Tisztítás) módot, a megfelelő LED kigyullad (1. ábra). A pozitív ionos tisztításhoz mindkét vezető csíkot meg kell fognia. Tisztítás előtt javasoljuk a bőr tisztítását olyan bőrápoló termékekkel, amelyeket általában használ.

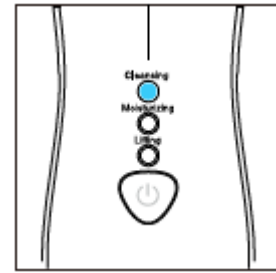

1. ábra

3. Vigyen fel bőrápoló termékeket.

4. Mozgassa a készüléket a 2. ábrán látható módon.




2. ábra

Hidratálás mód

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.

2. Ezután nyomja meg a bekapcsológombot, és válassza ki a Moisturizing (Hidratáló) módot, a megfelelő LED kigyullad (1. ábra). A negatív ionos hidratáláshoz mindkét vezető csíkot meg kell fognia. Hidratálás előtt javasoljuk az arcmaszk használatát.

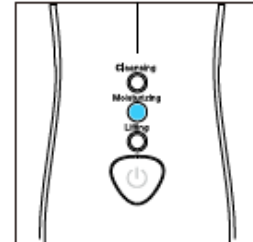

1. ábra

3. Vigyen fel bőrápoló termékeket.

4. Mozgassa a készüléket a 2. ábrán látható módon.




2. ábra

Bőrfeszítő mód

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.

2. Ezután nyomja meg a bekapcsológombot, és válassza ki a Lifting (Bőrfeszítő) módot, a megfelelő LED kigyullad (1. ábra). A feszesítéshez mindkét vezető szalagot meg kell fognia. Bőrfeszítés előtt bőrfiataltító vagy feszesítő krémek használatát javasoljuk.

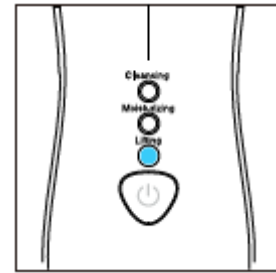

1. ábra

3. Vigyen fel bőrápoló termékeket a bőrre.

4. Mozgassa a készüléket a 2. ábrán látható módon.




2. ábra

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS


- Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva minden karbantartás és tárolás előtt.
- A készüléket nedves ruhával tisztíthatja. Ne használjon maró hatású tisztítószeret vagy oldószereket.
- A készülékfej tisztítása után a készüléket száraz helyen tárolja.
- Ne tárolja a készüléket nedves helyen, például fürdőszobában.
- Tartsa távol a készüléket gyermekektől és állatoktól.

TÖLTÉS


- Az első használat előtt tölts fel a készüléket és távolítsa el a védőfóliát.
- A készülék töltése USB-n keresztül történik.
- Csatlakoztassa az USB-t az adapterhez a mobiltelefon, a powerbank vagy a számítógép töltéséhez.
- A LED töltés közben villog. Amikor teljesen fel van töltve, a LED világít.

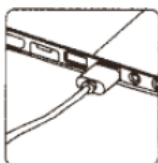

Töltés számítógépről

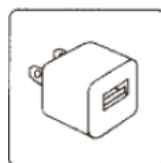

Töltés adapteren keresztül

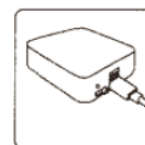

Töltés power bankon keresztül

• Ha az akkumulátor kapacitása alacsony, hangjelzés hallható, majd a készülék kikapcsol.

• A töltési idő körülbelül 2,5-3 óra.

TERMÉKLEÍRÁS

	1. Fém fej
	2. Tisztítási mód
	3. Hidratálási mód
	4. Bőrfeszítő üzemmód
	5. Tápkapcsoló / üzemmód kiválasztása
	6. Ionvezető csíkok
	7. USB töltőport
	8. Szilikon tisztító kefe

FUNKCIÓ

- Mélytisztítás és az elhalt hámsejtek eltávolítása.
- A pigmentfoltok elhalványítása.
- A ránctalanító növeli a bőr rugalmasságát.
- Támogatja a vérkeringést és a nyirokrendszert.
- Növeli a bőrsejtek regenerálódását és permeabilitását.
- Arcmasszázs, tápanyagimport.

PARAMÉTEREK

Megnevezés: Ultrahangos kozmetikai készülék	Modell: IF-1015
Bemeneti feszültség: DC 5 V	Töltési idő: kb. 3 óra
Teljesítmény: ≤ 3 W	Súly: 122 g
Méret: 175 x 55 x 67 mm	Működési idő: 15 perc
Akkumulátor: 500 mA	Használat gyakorisága: hetente egyszer

KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.