



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**

**IN 25851 Infravörös LED fénypanel inSPORTline Katuni**



# TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
TERMÉKLEÍRÁS.....	3
CSOMAG TARTALMA .....	5
SPECIFIKÁCIÓ .....	5
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	5
HASZNÁLAT.....	6
KÖRNYEZETVÉDELEM .....	6

A SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu), ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az első használat és összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- A készülék nem játék, ne hagyjon gyermekeket és háziállatokat felügyelet nélkül a készülék közelében.
- Ne nézzen közvetlenül a lámpákba.
- A készüléket megfelelően kell felszerelni, ha nem biztos a rögzítésben, forduljon szakemberhez.
- A termék nem alkalmas: várandós nők, epilepsziában szenvedők, fény- és hőallergiában szenvedők, érzékeny bőrűek, bőrgyógyászati betegségekben szenvedők számára, illetve ne használja ha bőrén bármilyen sérülés van.
- Ne merítse vízbe.
- Ne használja hosszú ideig.
- Ne módosítsa vagy javítsa a készüléket.
- Használat gyakorisága: kezdetben 1-2 perc területenként, 2-3 hét alatt maximum 10 perc területenként.
- A normál használat munkamenetenként 10 perc lehet, 15-40 cm-re a készüléktől. A maximális használati idő 15-20 perc lehet a problémás területeken. Javasoljuk, hogy két használat között 6 órás intervallumot tartson, és a készüléket napi 2-3 alkalommal használja.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem helyettesíti az orvosi vagy terápiás ellátást.

FIGYELMEZTETÉS: Viseljen szemvédőt. Soha ne nézzen közvetlenül a LED-ekbe. A NIR (Near Infrared Light) szabad szemmel nem látható.

## TERMÉKLEÍRÁS

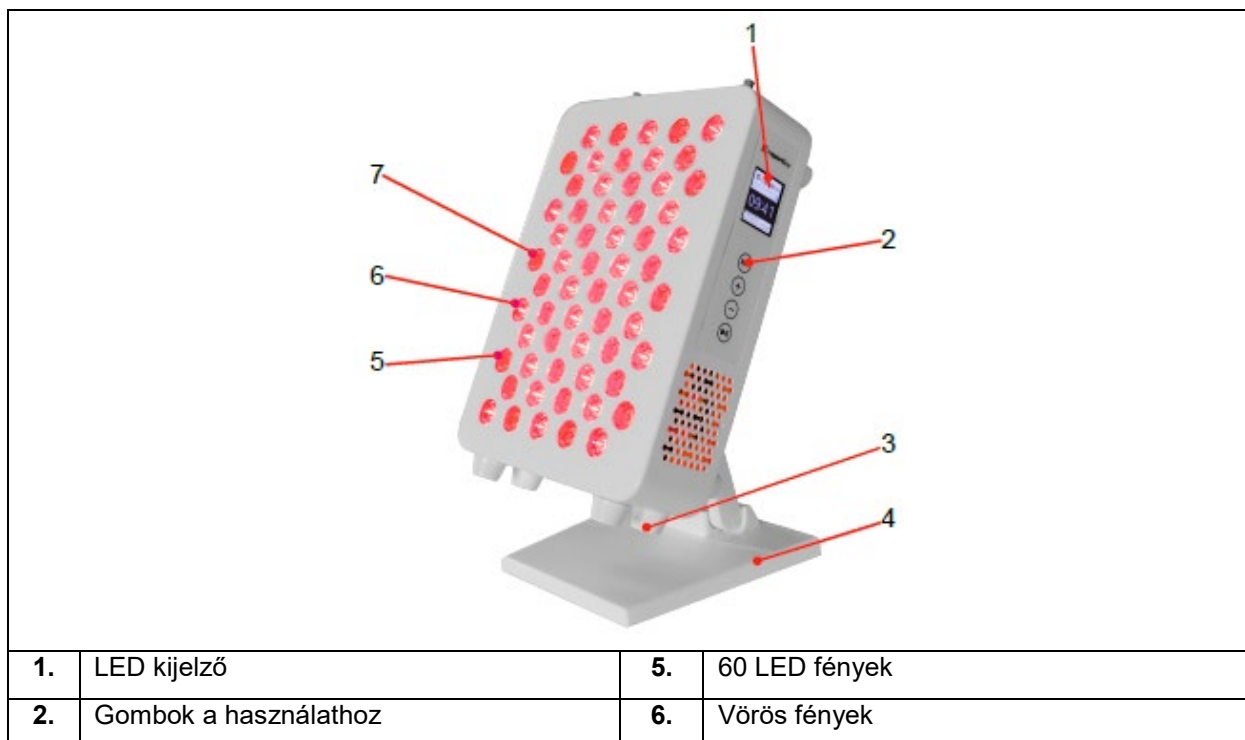

3.	Csúszásgátló lábak	7.	NIR (Near infrared light) fény
4.	Állvány		

## CSOMAG TARTALMA



## SPECIFIKÁCIÓ

Méretek	28.4 x 20.8 x 13 cm
Súly	3.25 kg
Hullámhossz	650 nm, 850 nm
LED lámpák száma	60 pcs, 5 W
Idő beállítás	alapértelmezett: 10 min, max: 20 min
Sugárzás	180 mw/cm <sup>2</sup> 15 cm-nél
Anyag	Fém test
Alkatrész lista	1x LED panel, 1x szemüveg, 1x használati útmutató, 1x tápkábel, 1x távirányító


## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva az elektromos hálózatról. Tisztítsa meg a fém részeket (kivéve a LED-lámpákat) nedves mikrovékony ronggyal. Soha ne öntsön vizet közvetlenül a készülékre. Ne engedje, hogy víz vagy nedvesség jusson a szellőzőnyílásokba.

Ne használjon maró hatású tisztítószereket.

Árnyékos, száraz és tiszta helyen, 0-40°C hőmérsékleten tárolandó

## HASZNÁLAT

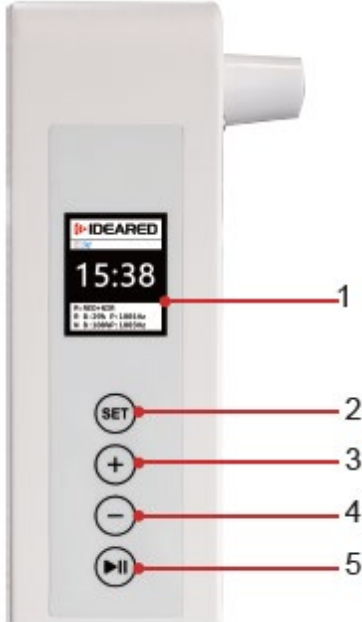	1. Kijelző: az interfész megjelenítése (idő, mód, fényerő, pulzálás)
	2. Beállítás: beállítási idő, hullámhossz, fényerő és pulzáció
	3, 4. + és – gombok: időbeállítás 1-30 perc, 1 perc után változás, eredeti időérték: 10 perc fényerő beállítás: 1% és 100% között mód beállítása: csak piros, csak NIR, vegyes pulzációs beállítások: 1-től 9999 Hz-ig, nincs
	5. Indítás: az üzemmód beállítása után nyomja meg a gombot a program elindításához

A 650 nm, 850 nm hullámhosszú vörös fény javítja a bőrt, a vérkeringést és javítja a kollagén, **valamint** elasztin termelést.

A NIR (Near Infrared Spectroscopy) csökkenti a gyulladást, enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat, javítja a belső szöveteket, például izmokat, ízületeket és **belső** szervek **működését**.

A vörös fény és a NIR kombinációja egyesíti mindkét sugárzás előnyeit.

Megjegyzés: A közeli infravörös fény szabad szemmel nem látható.

Megjegyzés: A vezérlő hatótávolsága ideális körülmények között 15 méter. A vezérlőnek megfelelő távolságra kell lennie használat közben.

## KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.