



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 24911 Elektromos négykerekű robogó Baichen Omis



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
ALKATRÉSZ LISTA.....	3
ELÜLSŐ - VEZÉRLŐPANEL.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
HÁTSÓ RÉSZ.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
AKKUMULÁTOR.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
NYEREG.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
ÖSSZESZERELÉS.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
ELSŐ ÉS HÁTSÓ CSATLAKOZÓK.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
NYEREG BEÁLLÍTÁS.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
MAGASSÁG BEÁLLÍTÁS.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
NYEREG FORGÁSA.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
KARTÁMLA SZÉLESSÉG BEÁLLÍTÁS.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
HANDLEBARS ANGLE ADJUSTMENT.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
HASZNÁLAT.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
AKKUMULÁTOR TÖLTÉS.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
AKKUMULÁTOR SPECIFIKÁCIÓ.....	12
VEZÉRLŐ PANEL.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
SZÉTSZERELÉS.....	15
KARBANTARTÁS.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
HIBAE LHÁRÍTÁS.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
SPECIFIKÁCIÓ.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Ne használja a készüléket, ha éles szélek vannak rajta.
- Hiba esetén azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez. Ne javítsa meg egyedül a robogót.
- Használat előtt tanulja meg a robogó használatát, keressen egy biztonságos és nyitott helyet, és kérjen segítséget egy másik személytől, amíg biztonságosan nem tudja használni a robogót.
- Győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva, mielőtt fel- és leszállna.
- Mindig olyan sebességgel vezessen, hogy önmagát, másokat és vagyonukat ne veszélyeztesse.
- Mindig azt javasoljuk, hogy a legalacsonyabb sebességfokozattal indítsa el.
- Egyes kommunikációs eszközök ugyanazon a frekvencián működhetnek, mint a robogó távirányítója. Ha van ilyen eszköz (telefon stb.), ellenőrizze, hogy nem zavarja-e a vezérlőt.
- Egyes adók zavarhatják a robogó távirányítóit.
- Ha bármilyen nem kívánt mozgást észlel, vagy a robogó hirtelen leáll, azonnal kapcsolja ki.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
- Ha a leírt helyzetek bármelyike előfordul, azonnal kapcsolja ki a robogót: hirtelen mozgás felhasználói beavatkozás nélkül, a menetirány nem szabályozható, fékhiba.
- A robogót egy személy szállítására tervezték.
- Ne vezessen túl meredek lejtőn.
- Ne vezessen kábítószer, gyógyszer vagy alkohol hatása alatt.
- Ne vontasson más járműveket vagy tárgyakat a robogó mögött.
- Ne vontassa a robogót más járművek mögé.
- Ne lépje túl a megengedett legnagyobb vezetési szöveget.
- A robogó csak egy személy számára készült, és ne lépje túl a robogó maximális teherbírását.
- Ne kapcsolja ki a robogót mozgás közben, mert ez károsíthatja a motort vagy a kezelőszerveket. Csak akkor kapcsolja ki a robogót, ha elveszíti az irányítást.
- Ne vezessen nem burkolt felületen (homok, magas fű stb.)
- Ne vezessen lépcsőn.
- Tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg róla, hogy a robogó ki van kapcsolva.
- Ne kapcsolja be a robogót, ha nem ül rajta.
- A robogó nem közúti használatra készült. Csak az erre kijelölt utakon (járdán) közlekedjen.

- Ne változtasson hirtelen irányt (előre - hátra). Változtassa meg a haladási irányt, amikor a robogó megáll.
- Lefelé mindig a legalacsonyabb sebességgel haladjon, a joystickot a középső pozíció közelében hagyva.
- Mindig tartsa a lábát a lábtartón.
- Indulás előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- A robogót jól szellőző helyiségben töltsé.
- Indulás előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész meg van-e húzva és megfelelően működik-e.
- Tolatás előtt győződjön meg arról, hogy nincs akadály mögötte. Hátramenet a legalacsonyabb sebességre.
- Kerülje a hirtelen mozgásokat és a hirtelen irányváltásokat.
- Kezét és lábát tartsa a karfákon.
- Ha dombon halad, ne tolasson.
- Ne vezessen puha, egyenetlen vagy nem rögzített felületen (fű, kavics).
- Lefelé haladás előtt állítsa be a legalacsonyabb sebességet, lefelé haladva megnő a fékút.
- Ne vezessen át egyenetlenségeken, például oszlopokon stb.
- Ne vezessen vízben, jégen vagy havon, illetve rossz látási viszonyok között.
- Ne hagyja a robogót közvetlen napfénynek vagy az időjárásnak kitéve.
- Óvja esőtől és víztől.
- A vezérlőpanel nem vízálló.
- Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát. Az elhasználódott gumikat azonnal cserélje ki.
- Ne vezessen esőben vagy nedves úton. Fennáll az elektronika és az akkumulátor károsodásának veszélye.
- Maximális dőlésszög 9°.
- Teljes terhelés: 120 kg


ALKATRÉSZ LISTA

A	A robogó eleje	G	Kosár
B	A robogó hátulja	H	Akkumulátor biztonsági lemez
C	Ülés	I	Kosártartó
D	Akkumulátor	J	2x csavar
E	Töltő kábel	K	Nyereg csapszeg
F	4x kézi csavarok	L	Karfa




ELSŐ VEZÉRLŐPANEL

A vezérlőpanel a következő részeket tartalmazza.

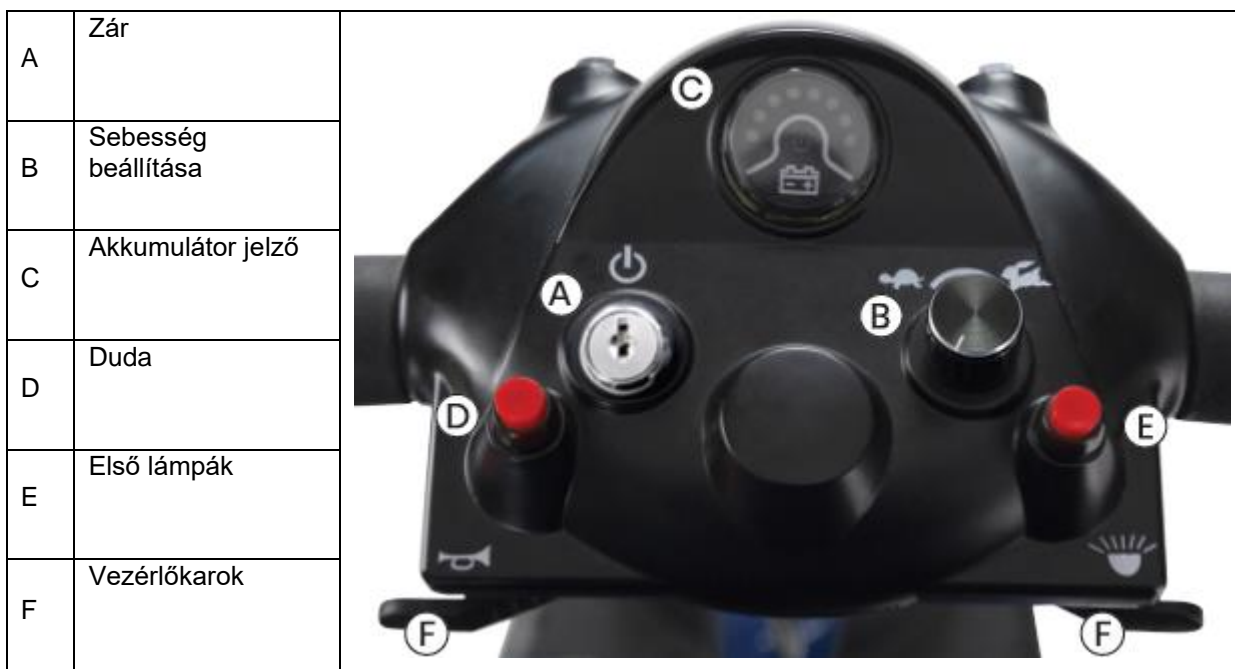

HÁTSÓ RÉSZ

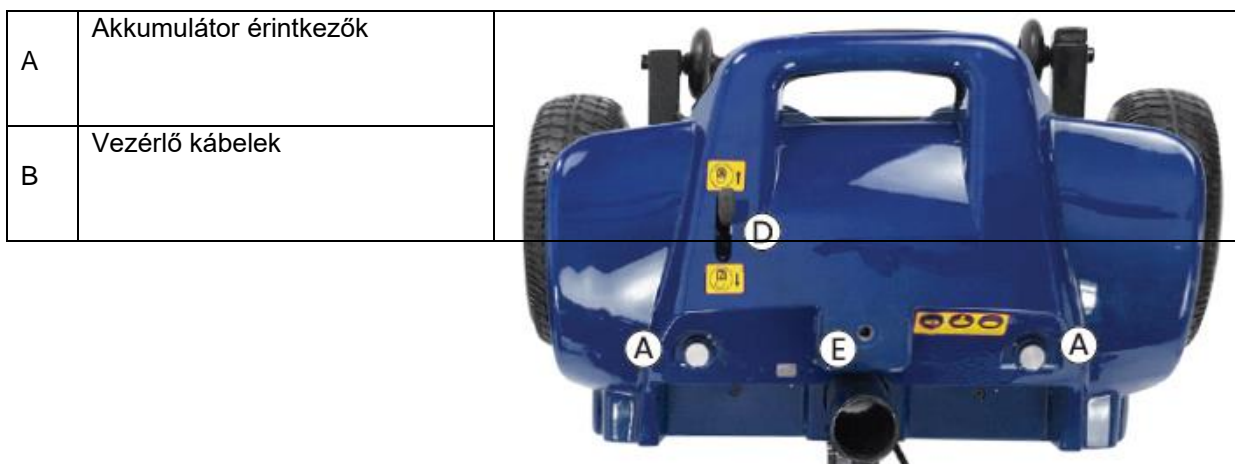

C	Horgok	
D	Manuális kerékvezérlés	
E	Üléstartó	

AKKUMULÁTOR

A	3-pin töltőport	
B	Túlfeszültség védelem	

NYEREG

A	Ülés	
B	Nyeregcső	
C	Karfa	
D	Kar	
E	Csapszeg	

ÖSSZESZERELÉS

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot, és húzza ki az összes alkatrészt a dobozból.
2. Használat előtt a kormányt fel kell emelni és rögzíteni kell.

a. Lazítsa meg a kézi beállítócsavart.



b. Emelje fel a kormányt a kívánt szögbe, hogy vezetés közben elérje.



c. Húzza meg a kézi beállítócsavart.

d. A kormány kívánt dőlésszöge változtatható, csak lazítsa meg a kézi gombot, állítsa be a szöget, majd ismét húzza meg a gombot.

FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a kormány megfelelően meg van-e húzva. Ennek elmulasztása sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

e. Az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos érintkezők tiszták.

f. Helyezze az akkumulátort a robogó hátuljába, ügyelve arra, hogy az akkumulátor és a robogó érintkezői egy vonalban legyenek.



3. Rögzítse az akkumulátort a lemezzel és a kézi beállítócsavarral. A lemez és a gomb helye a nyeregcső mögött található. Húzza meg megfelelően a csavart.



4. Győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően van rögzítve a nyeregcsőhöz



5. Illessze az ülést a robogó hátulján lévő nyeregcsőbe.



6. Állítsa be a magasságot és helyezze be a csapszeget a nyeregcső nyílásain keresztül, teljes hosszában be kell helyezni.



7. Rögzítse az ülést az elülső kézi beállítócsavarral.



8. A kar segítségével oldja ki az ülést, és fordítsa el úgy, hogy a kormány eleje felé nézzen. Ezután a kar segítségével rögzítse az ülést.



9. Rögzítse a jobb és a bal kartámaszt az ülés oldalához. A karfák kézi beállítócsavarokkal vannak rögzítve.



10. Távolítsa el a 2x csavart a kormányról, és helyezze be a kosártartót. Rögzítse a kosártartót 2 db eltávolított csavarral. Ezután csúsztassa a kosarat a kosártartóba. Győződjön meg arról, hogy a kosarat megfelelően helyezte be.



ELSŐ ÉS HÁTSÓ CSATLAKOZÁSOK

A robogót csatlakoztatva szállítjuk; az elülső és a hátsó rész azonban leválasztható a könnyebb szállítás vagy tárolás érdekében.

1. Kapcsolja kézi üzemmódba a robogót a hátsó kerekeken lévő kar segítségével.
2. Döntse hátra a robogó hátulját, amíg az a hátoldalon lévő csúszásgátló rudakon és fogantyúkon nem támaszkodik.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az nyeregcső párhuzamos a talajjal, és a fogantyúk felső helyzetben vannak.

3. Emelje fel az elejét a fogantyúknál fogva, és akassza be az elejét a hátul lévő kampókba.
4. Fogja meg az elejét, és lassan döntse előre a hátlapot, amíg kattánást nem hall. Nem szabad erővel zárni az alkatrészeket.
5. Csatlakoztassa az akkumulátor tápkábelét, és rögzítse az anyát.
6. Kapcsolja ki a kézi üzemmódot a kar hátrahúzásával, és rögzítse az akkumulátort és az ülést.

ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA

FIGYELMEZTETÉS: Ne állítsa be az ülés helyzetét használat közben. A pozíció beállítása előtt mindig kapcsolja ki és vegye ki a kulcsot. Ennek elmulasztása sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

MAGASSÁG BEÁLLÍTÁS

Lazítsa meg a kézi beállítócsavart, és húzza ki a csapszeget.

Állítsa be a kívánt magasságot. Rögzítse ismét az ülést a kézi beállítócsavarral és csapszeggel.

NYEREG FORGÁSA

Emelje fel és tartsa lenyomva az ülés jobb oldalán található kart az ülés kioldásához.

Fordítsa el az ülést a kívánt irányba, majd engedje el a kart, automatikusan reteszelt helyzetbe kapcsol.

Mielőtt újra mozgatná, győződjön meg arról, hogy az ülés rögzítve van, és nem forog.

KARTÁMASZ SZÉLESSÉG BEÁLLÍTÁSA

Lazítsa meg a karfát tartó beállítócsavart.

Állítsa a kartámaszokat a kívánt szélességre a tartományon belül.

Rögzítse ismét a karfákat a kézi beállítócsavarokkal.

KORMÁNY SZÖGBEÁLLÍTÁS

Lazítsa meg a csavarokat a mechanizmusoknál.

Döntse a kormányt a kívánt helyzetbe.

Rögzítse a kézi beállítócsavart.

HASZNÁLAT

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

FIGYELMEZTETÉS: Mindig csak az eredeti akkumulátort és töltőt használja. Nem megfelelő töltő használata károsíthatja a készüléket.

Az első használat előtt tölts fel maximálisan az akkumulátort. Szánjon rá időt a robogó használatának megtanulására, ne vezessen túl gyorsan, és maradjon közel otthonához. Ismerje meg, hogyan olvassa le az akkumulátorra vonatkozó információkat. Tölts fel az akkumulátort 10-12 órán keresztül, majd használja tovább a robogót. 4-5 töltési ciklus után az akkumulátor eléri maximális kapacitását.

Ha nem használja rendszeresen a robogót, akkor kéthetente egyszer fel kell töltenie az akkumulátort a maximumra.

Az akkumulátor lemerülése után a lehető leghamarabb újra kell tölteni. Ha hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, csökkenti a kapacitását.

1. Helyezze a robogót a fali aljzat közelébe. Kapcsolja ki és vegye ki a kulcsot.
2. Távolítsa el a gumiburkolatot a töltőcsatlakozóról.
3. Csatlakoztassa a töltő 3 tűs csatlakozóját.
4. Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz. A piros töltésjelző világít.
5. Amikor a zöld fény kigyullad, a töltés majdnem befejeződött, azonban javasoljuk, hogy hagyja az akkumulátort további 1-2 órán át tölteni a teljes feltöltéshez. A teljes töltési idő 10-12 óra.
6. Az akkumulátor feltöltése után először húzza ki a töltőt a konnektorból, majd az akkumulátorból. Helyezze vissza a fedelet



MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort külön is kiveheti és feltöltheti.

TÚLFESZÜLTÉSÉG-VÉDELEM

A túlfeszültség elleni védelmet az elektromos alkatrészek védelmére használják. Túlfeszültség vagy rövidzárlat esetén a túlfeszültségvédelem azonnal megszakítja az áramot. Ha a túlfeszültségvédelem leold, várjon legalább 1 percet, mielőtt újraindítaná a robogót.

A túlfeszültség-védő újraindításához távolítsa el a fedelet, és nyomja meg a túlfeszültség-védő gombot.

AKKUMULÁTOR SPECIFIKÁCIÓ

Elemtípus	Ólom-sav akkumulátor
Méret	152 mm x 99 mm x 96 mm
Feszültség	2x 12 V
Kapacitás	12 Ah

VEZÉRLŐPANEL

A vezérlőpanel segítségével beállíthatja a sebességet, az akkumulátor állapotát, és vezérelheti a robogót. A vezérlési funkciókat az alábbi fejezetek

ismertetik.



GYÚJTÁS ÉS KULCS

A robogó működtetéséhez kulcsra és gyújtásra van szükség. A bekapcsoláshoz helyezze be a kulcsot. A tápellátás jelzőfénye kigyullad. Ha nem használja a robogót, vegye ki a kulcsot.

FIGYELMEZTETÉS: Ne vegye ki a kulcsot megállítási céljából, hacsak nem vészhelyzetről van szó. A kulcs hirtelen kihúzása károsíthatja a terméket.

SEBESSÉGBEÁLLÍTÁS

Működés közben a maximális lehetséges sebesség 6 km/h-ig, a maximális hátrameneti sebesség pedig 3,5 km/h-ig állítható be. Fordítsa el a gombot balra a maximális sebesség csökkentéséhez, jobbra a maximális sebesség növeléséhez.

FIGYELMEZTETÉS: Javasoljuk, hogy a robogót a legalacsonyabb sebességen használja, amíg meg nem tanulja biztonságosan és magabiztosan kezelni. Ezen utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTJELZŐ

Amint elindítja a robogót, megjelenik az akkumulátor állapota, 3 színnel jelölve:

- Zöld: teljes akkumulátorkapacitás
- Sárga: az akkumulátor kapacitásának fele
- Piros: Az akkumulátor teljesen lemerült, és a további használat előtt fel kell tölteni

DUDA

Nyomja meg a gombot a dudu elindításához.

FÉNYSZÓRÓK

Nyomja meg a fényszóró be- és kikapcsolásához.

VEZÉRLŐKAROK

Az oldalsó karok segítségével előre-hátra haladási irányt változtathat. Minél erősebben nyomja meg a kart, annál gyorsabb lesz a mozgás a beállított maximumig. Amint elengedi a kart, a robogó lassítani kezd, amíg meg nem áll.

A jobb oldali kart az előrehaladáshoz használják.

A bal oldali kar tolatásra szolgál.



KÉZI MŰKÖDTETÉS

A hátsó kerekeken lévő kar segítségével kézi üzemmódba kapcsolhatja a kerekeket, ami lehetővé teszi a robogó tolását.

A kar hátrahúzása bekapcsolja a motor mozgását.

A kart előrenyomva a roller kézi üzemmódba kapcsol, és nem hajtja a motor.



FIGYELMEZTETÉS: Soha ne kapcsolja át a robogót kézi üzemmódba, ha csak nincs más személy segítsége. Ne kapcsolja a robogót kézi üzemmódba domboldalon vagy emelkedőn. Ezen utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

SZÉTSZERELÉS

1. Kapcsolja ki a robogót, és vegye ki a kulcsot a gyújtásból.
2. Engedje el a nyeregcsövet és húzza ki az üléssel együtt.
3. Lazítsa meg az akkumulátorrögzítő lemezt, és vegye ki az akkumulátort.

4. Lazítsa meg az akkumulátortáp anyáját az alkatrészek eleje és hátulja között.



5. Lazítsa meg a kézi beállítócsavart a robogó talpa közelében a kormányon, és húzza le a kormányt, majd ismét rögzítse a kézi beállítócsavart.



6. Az első és hátsó rész kioldásához emelje fel a sárga fogantyút



7. Emelje fel azt a részt, ahol a két rész össze van kötve, és engedje ki a horgokból.



8. A csatlakoztatáshoz kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben

KARBANTARTÁS

Kerülje el a kezelőpanel és a kormány ütődéseit vagy ütéseit.

Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak, például hidegnek, melegnek vagy páratartalomnak való kitettséget.

Ha a robogó nedvességnek van kitéve, használat előtt először meg kell szárítani. Ne tisztítsa a robogót folyó vízzel.

A robogót -7°C és $+50^{\circ}\text{C}$ közötti üzemi hőmérsékletre tervezték.

Rendszeresen tisztítsa meg a robogót a szennyeződésektől.

Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozások és érintkezések állapotát.

Távolítsa el a kulcsot, ha nem használja.

Megjegyzés: A robogó beépített funkcióval rendelkezik, amely csökkenti az akkumulátor fogyasztását, amikor nincs használatban. 20 perc inaktivitás után energiatakarékos módba kapcsol. Az indításhoz egyszerűen húzza ki és helyezze be újra a kulcsot.

Minden csapágy olajozott és tömített, nem kell kenni.

Időszakos karbantartási táblázat:

Alkatrészek	Minden használat után	Hetente	Havonta	6 havonta
Motor		X		
Fékek	X			
Kapcsolatok		X		
Akkumulátor állapot	X			
Kerékkopás			X	
Motor				X
Vezérlőpult		X		
Tisztítás	X			

HIBAEELHÁRÍTÁS

A robogó hangjelzésekkel jelzi a problémákat. Helyezze be a kulcsot, rövid sípolást és villogást fog hallani a vezérlőpulton, majd hosszú szünet következik be és a riasztás megismétlődik. A hangjelzések és a hibák számát az alábbi táblázat írja le.

Az alábbi megoldások némelyike zavarja a kosár működését, és módosításukkal érvénytelenítheti a garanciát. Ezért azt javasoljuk, hogy minden, a robogót érintő problémát a panasz- és szervizosztályon keresztül oldjon meg.

Jel	Ok	Hiba	Megoldás
1x hangjelzés	Alacsony akkumulátor	Lemerült akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort
	Rossz akkumulátor érintkezők	Lazítsa meg az akkumulátorkábeleket	Húzza meg az akkumulátor csatlakozó anyáját
	Hibás akkumulátor érintkezők	A kábelek ellentétes pólusokra voltak csatlakoztatva, rövidzárlati vezérlőegység	Cserélje ki a vezérlőegységet
	Rövidzárlat a motor és az akkumulátor negatív pólusai között	A fekete tápkábel hozzáér a motorkábelhez, vagy rosszul van szigetelve	Szigetelje le a kábeleket
2x hangjelzés	A motorrugó nincs megfelelően rögzítve	A motor rugója nincs megfelelően csatlakoztatva	Ellenőrizze a rugó csatlakozását
	Motor kopás	A kábelek ellenállása mindkét végén nagyobb, mint 100 Ω	Cserélje ki a motort
	Lazítsa meg a motorkábelt	A motorkábel meglazult	Csatlakoztassa újra a kábeleket
3x hangjelzés	Rövidzárlat a motor és a tápegység között	Kábel sérülés	Cserélje ki vagy szigetelje le a kábeleket
6x hangjelzés	A művelet nem lehetséges	A töltő csatlakoztatva van	Húzza ki a töltőt, és helyezze be a kulcsot
7x hangjelzés	A sebességváltó kar nincs kiengedve	A kar nincs kiengedve	Engedje el a kart, és helyezze vissza a kulcsot
	A sebességnövelő kar helytelen csatlakoztatása, ellenőrizze a 3 tűs kábel csatlakozását	Laza kábel	Csatlakoztassa a kábelt
	Sérült kar vagy 3 tűs kábelszabályzó	A 3 tűs vezérlő kimeneti árama nem kb. 5 V	Cserélje ki a vezérlő 3 érintkezős csatlakozóját
	A fordulatszám-potenciométer nem működik	A fordulatszám-potenciométer sérült	Cserélje ki a fordulatszám-potenciométert
8x hangjelzés	A vezérlőegység sérült	A vezérlőegység rövidzárlata	Cserélje ki a vezérlőegységet
	A vezérlőegység tápellátása az ellentétes pólusokra volt csatlakoztatva	A vezérlőegység tápellátása az ellentétes pólusokra volt csatlakoztatva	Cserélje ki a vezérlőegységet

9x hangjelzés	Rossz kapcsolat	A fék nincs megfelelően csatlakoztatva a vezérlőegységhez	Csatlakozzon újra
	A robogó kézi üzemmódban van	A fék nem működik	Kapcsolja ki a kézi vezetési módot
	A robogó nem kézi üzemmódban van, és a fék sem működik	A töltő csatlakoztatva van	Cserélje ki a fékeket
	A féktekerics rövidzárlatos	Az ellenállás kisebb, mint 40 Ω	Cserélje ki a fékeket
10x hangjelzés	Az akkumulátor párhuzamosan és nem sorosan van csatlakoztatva	A feszültség nagyobb, mint 48 V	Ellenőrizze a kábeleket
	Az akkumulátor lemerült	A feszültség nagyobb, mint 30,5 V	Cserélje ki az akkumulátort

SPECIFIKÁCIÓ

Befoglaló méretek	960 mm x 500 mm x 840 mm
Ülésmagasság (a talajtól)	470 mm – 546 mm
Ülésszélesség	431 mm
Ülésmélység	381 mm
Kartámasz magassága (üléstől)	171 mm
Háttámla magassága	330 mm
Üléstávolság a kormánytól	685 mm
Súly	40 kg
Maximális sebesség	6 km/h
Maximális fékút	1500 mm
Súlykorlátozás	120 kg
Maximális hatótáv (ideális körülmények között)	≥ 20 km
Statikus stabilitás	≥ 9°
Dinamikus stabilitás	≥ 6°
Maximális dőlésszög	≤ 9°
Maximális emelkedés	≤ 9°
Motor	24 V / 180W
Akkumulátor	Ólom-savas akkumulátor két részre osztva (12 V, 12 Ah mindegyik részhez)
Maximális kimeneti áram	45 A
Minimális kimeneti áram	2 A
Első kerék	190 mm (felfújt)
Hátsó kerék	190 mm (felfújt)

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.