



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 29685 Infravörös LED panel inSPORTline Veluni - 4x30 LED

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu-ra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Nem orvosi eszközként használható.
- Kizárólag a kézikönyvben leírtak szerint használja.
- Terhes vagy szoptató nők, gyermekek és csecsemők számára nem alkalmas.
- Ne használja a panelt, ha mentális vagy fizikai fogyatékkal, bőrbetegséggel (ekcéma, albinizmus, pikkelysömör stb.) rendelkezik. Használat előtt mindig konzultáljon orvosával.
- Ne használja a panelt, ha fényérzékeny, vagy fényérzékenységet fokozó gyógyszereket szed.
- Használat után ne alkalmazzon olyan kozmetikai termékeket, amelyek növelhetik a fényérzékenységet.
- Használat közben viseljen védőszemüveget és csukja be a szemét. Ne használja a panelt, ha örökletes látászavarban szenved.
- Ha használat közben kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a panel használatát, és forduljon orvoshoz.
- A készülék nem vízálló, ne merítse a panelt vízbe.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne használjon kopott vagy sérült terméket.
- Ne javítsa, módosítsa vagy szerelje szét a terméket saját kezűleg.

TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény: 12 W (max.)

Töltő: DC5V 1A/2A

Beépített akkumulátor: 1500 mAh/7,4 V

Méretek: H278*Sz178*M16 mm

LED hullámhossz:

- Piros: 630 nm
- Kék: 470 nm
- Sárga: 590 nm
- IR: 850 nm

Súly: 625 g


Üzemi hőmérséklet: 0 °C és 45 °C között

Tárolási és szállítási hőmérséklet: -5 °C és 55 °C között

Üzemi páratartalom: 30% és 95% között


Malátázás és szállítás során megengedett nedvességtartalom: 20%–85%

MÉRETEK

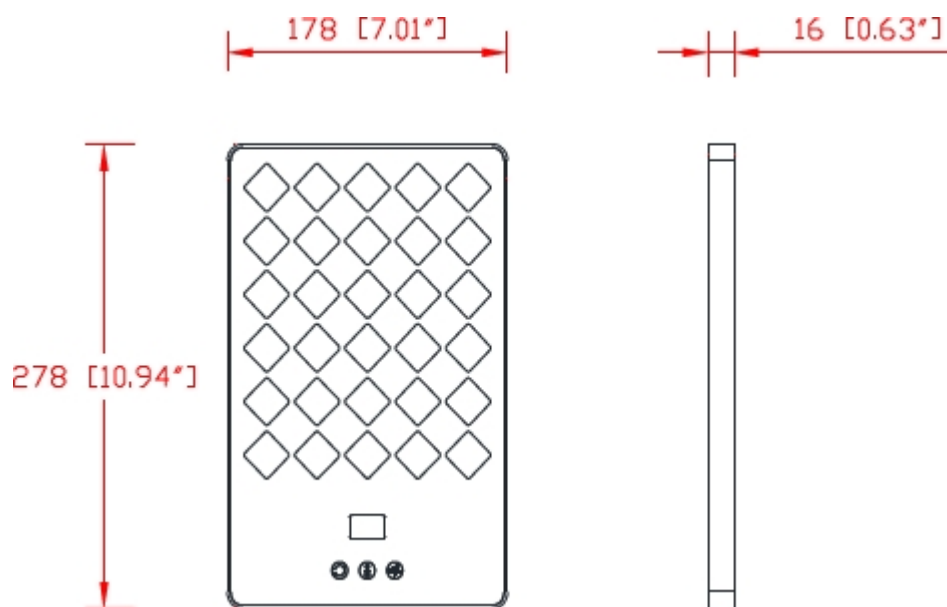

A CSOMAG TARTALMA

1. LED panel, 2. Keret, 3. Védőszemüveg, 4. Töltőkábel, 5. Felhasználói kézikönyv

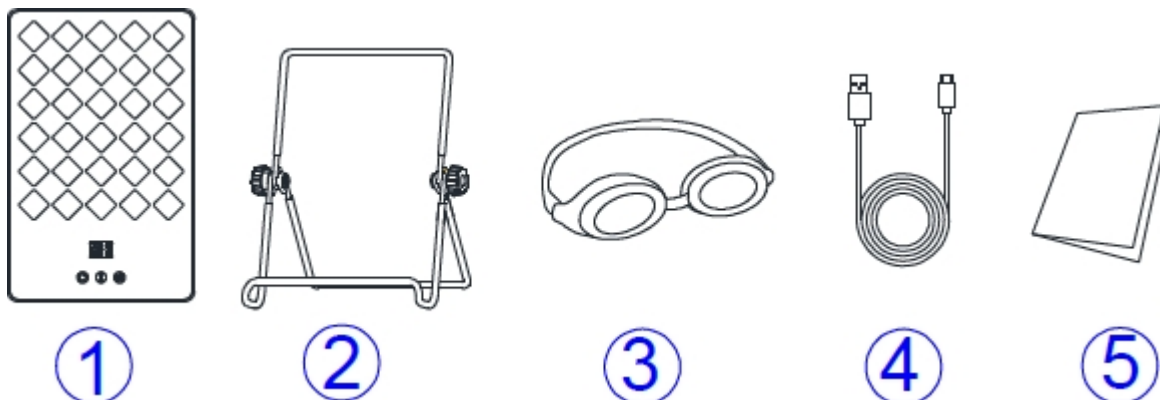

KIJELZŐ



Kijelző

Akkumulátor		Intenzitás	
	25% kapacitás		Intenzitás L1
	50% kapacitás		Intenzitás L2
	75% kapacitás		Intenzitás L3
	100% kapacitás		Intenzitás L4, a lámpák villogó üzemmódban működnek
Világítási mód típusa			
	Piros		
	Kék		
	Sárga		
	Infravörös		
Időzítő			
	Maradék idő		

Gombok

	Nyomja meg a 6 fénymód egyikének kiválasztásához
	2 másodpercig tartsa lenyomva a panel be-/kikapcsolásához Nyomja meg az időzítő 30/25/20/15/10/5 percre történő beállításához
	Nyomja meg az intenzitás 1–4 szintjének beállításához, 4. szinten a fény villog

HASZNÁLAT

Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a panel fel van töltve.

A panel elindításához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig. A panel az alapértelmezett beállításokkal indul: időzítő 30 perc, fényerő 4, fénymód 1.

Időzítő

Nyomja meg a gombot az időzítő beállításához. 3 másodpercnyi inaktivitás után az idő mentésre kerül. A kijelzőn megjelenik a jelenlegi maradék üzemidő.

Világítási mód kiválasztása

Nyomja meg a gombot a 6 fénymód egyikének beállításához.

1. mód	R	Piros	Fokozza a véráramlást és a kollagéntermelést. Segít a szövetek helyreállításában (a régi bőrsejtek újjal való felváltásában) és a pórusok csökkentésében.
2. mód	B	Kék	Nyugtató, gyulladáscsökkentő, elpusztítja a bőr baktériumait.
3. mód	Y	Sárga	Energizálja a bőrt, segít csökkenteni a ráncokat, kiegyensúlyozza a pigment színének és simítja a bőrt.
4. mód	R+IR	Piros + Infravörös fény	Elősegíti a sejtek regenerálódását, felgyorsítja az anyagcserét, lebontja a bőr alatti cellulitist, összehúzza a pórusokat, feszesíti a bőrt és növeli annak rugalmasságát.
5. mód	R+Y+IR	Piros + sárga + infravörös fény	Lebontja a cellulitot, világosítja a kloazmát és a szeplőket, javítja a vér- és nyirokkeringést.
6. mód	R+B+IR	Piros + Kék + Infravörös fény	Csökkenti a bőr gyulladását és a hegek láthatóságát, elősegíti a sejtek regenerálódását, javítja a nyirokkeringést és gyengéden tisztítja a bőrt.


Intenzitás

Nyomja meg a gombot a 4 intenzitási szint egyikének kiválasztásához.

Megjegyzések:

- A panel beépített védelemmel rendelkezik a túlzott lemerülés ellen. Amikor az akkumulátor kapacitása egy bizonyos érték alá csökken, az akkumulátor ikon 3 másodpercig villog, majd a panel kikapcsol.
- A panel beépített túlfeszültség-védelemmel rendelkezik. Töltés közben a kijelzőn a CH szimbólum jelenik meg, és az akkumulátor szimbólum villog. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kijelzőn a FU szimbólum jelenik meg, és az akkumulátor szimbólum nem villog.
- Ne töltsse a panelt használat közben, mindig kapcsolja ki a panelt a töltés előtt.
- Ha a panelt hosszabb ideig tárolni kívánja, rendszeresen töltsse fel az akkumulátort.

ÖSSZESZERELÉS

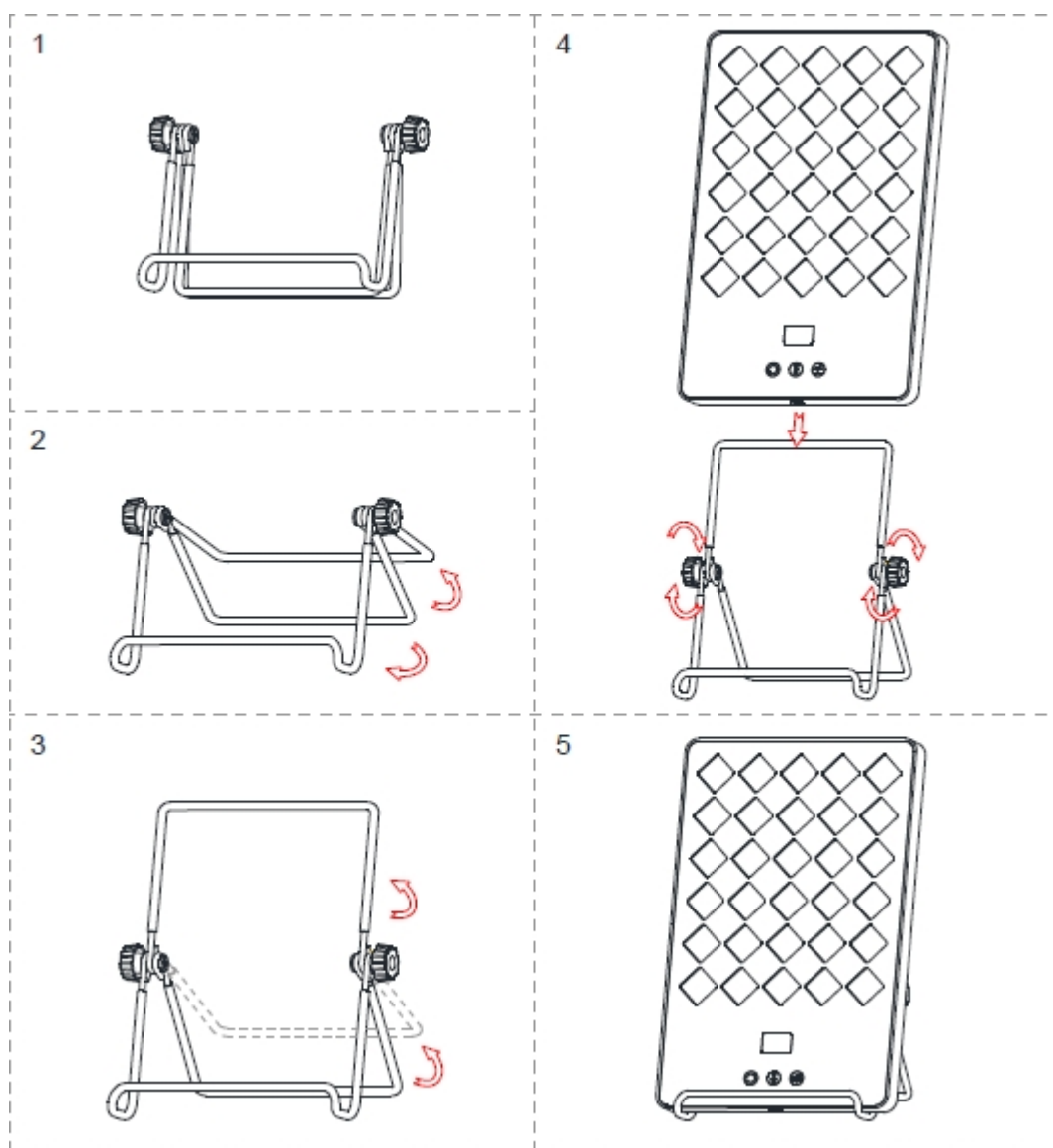

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

